

Содержание

Имплантаты 6-31	Имплантаты SEVEN	8- 15
	Имплантаты M4	16-23
	Инструменты для имплантологии	24
	Имплантаты UNO	25-28
	Ортодонтические имплантаты	29
	Упаковка	30
	Цветовая кодировка имплантатов	31
Хирургические инструменты 32-49	Пилотные фрезы -Внешнее охлаждение	34
	Формирующие фрезы для SEVEN-Внешнее охлаждение	35
	Формирующие фрезы для M4-Внешнее охлаждение	36-37
	Короткие формирующие фрезы для M4-Внешнее охлаждение	38-39
	Формирующие фрезы для SEVEN и M4-Внутреннее охлаждение	40-41
	Маркирующие и профильные фрезы	42
	Трепаны	43
	Керамические фрезы - Внешнее охлаждение	43
	Хирургический инструментарий - имплантаты UNO	44
	Хирургический инструментарий	45-46
	Ортопедические отвертки	47
	Хирургические инструменты	48
	Набор реверсивного ключа	49
Наборы 50-69	Расширенный хирургический набор SEVEN	52-53
	Расширенный хирургический набор M4	54-55
	Набор формирующих фрез для M4	56
	Набор фрез для сбора кости	57
	Набор стоперов для стандартной платформы имплантатов SEVEN	58
	Наборы стоперов для фрез	59
	Внутриротовой параллелометр Авраами	60-61
	Компрессионный набор	62-63
	Хирургический набор UNO	64-65
	Набор ортопедических инструментов	66-67
	Набор остеотомов для синус-лифтинга	68
	Набор остеотомов со стопером	69
Принадлежности Ортопедические опции 70-128	Узкая платформа	
	Аналог имплантата и слепочные трансферы	70
	НРК - ортопедические наборы	72-73
	Прямая система протезирования с винтовой фиксацией	74
	Система протезирования с цементной фиксацией	75
	Набор Ti-Base для CAD/CAM систем - одиночная реставрация	76
	Набор Ti-Base для CAD/CAM систем - для реставраций из нескольких единиц	77
	Система многокомпонентного абатмента	78-79
	Наборы циркониевых абатментов	80-81
	Система шаровидного абатмента	82
	Система аттачмента Locator	83-84
	Стандартная платформа	
	Аналог имплантата и слепочные трансферы	85
	СРК - ортопедические наборы	86-87
	Прямая система протезирования с винтовой фиксацией	88
	Система протезирования с цементной фиксацией	89
	Прямая система протезирования с цементной фиксацией	90-91
	Набор Ti-Base для CAD/CAM систем - одиночная реставрация	92


Набор Ti-Base для CAD/CAM систем - для реставраций из нескольких единиц	93
Набор матриц и абатменты OT Equator	94-95
Наборы циркониевых абатментов	96-97
Система многокомпонентного абатмента	100-101
Система многокомпонентного углового абатмента	102
Шаровидные абатменты	103
Угловые шаровидные абатменты	104-105
Система аттачментов Locator	106-107
Широкая платформа	
Аналог имплантата и слепочные трансферы	108-109
СРК - ортопедические наборы	110-111
Прямая система протезирования с винтовой фиксацией	112
Система протезирования с цементной фиксацией	113
Прямая система протезирования с цементной фиксацией	114-115
Набор Ti-Base для CAD/CAM систем - одиночная реставрация	116
Набор Ti-Base для CAD/CAM систем - для реставраций из нескольких единиц	117
Набор матриц и абатменты OT Equator	118-119
Наборы циркониевых абатментов	120-121
Система многокомпонентного абатмента	122-123
Шаровидные абатменты	124-125
Система аттачментов Locator	126-127
Балочная система	128

Принадлежности 129-147	Инструменты для ортопедии	130-132
	Набор алмазных фрез, предназначенных для работы с цирконием	133
	Набор абатментов для ортопедического планирования	134-135
	Блок управления MCU	136-137
	Специальный цемент для фиксации коронок на имплантатах	138
	Ортопедический держатель абатментов	139
	Ортопедический презентационный набор	140-141
	Хирургический набор MGUIDE	142-147

Остеопластические материалы 148-157	4BONE XBM - остеопластический материал (ксенографт)	150
	4BONE BCH - синтетический остеопластический материал	151
	BONDBONE - Связующий остеопластический материал	152
	RCB - Резорбируемая коллагеновая мембрана	153
	RSB - Резорбируемая коллагеновая мембрана	154
	RCM - Резорбируемая коллагеновая мембрана	155
	4BONE® TAPE - Резорбируемое коллагеновое покрытие	156
	4BONE® PLUG - Резорбируемое коллагеновое покрытие	157

Приложение 158-162	Состав и свойства материалов	159
	Ортопедические компоненты	160
	Цветовая кодировка диаметра и платформы имплантата	161
	Описание этикетки	162

Алфавитный указатель 163-168	Алфавитный указатель	163-168
--	----------------------	---------

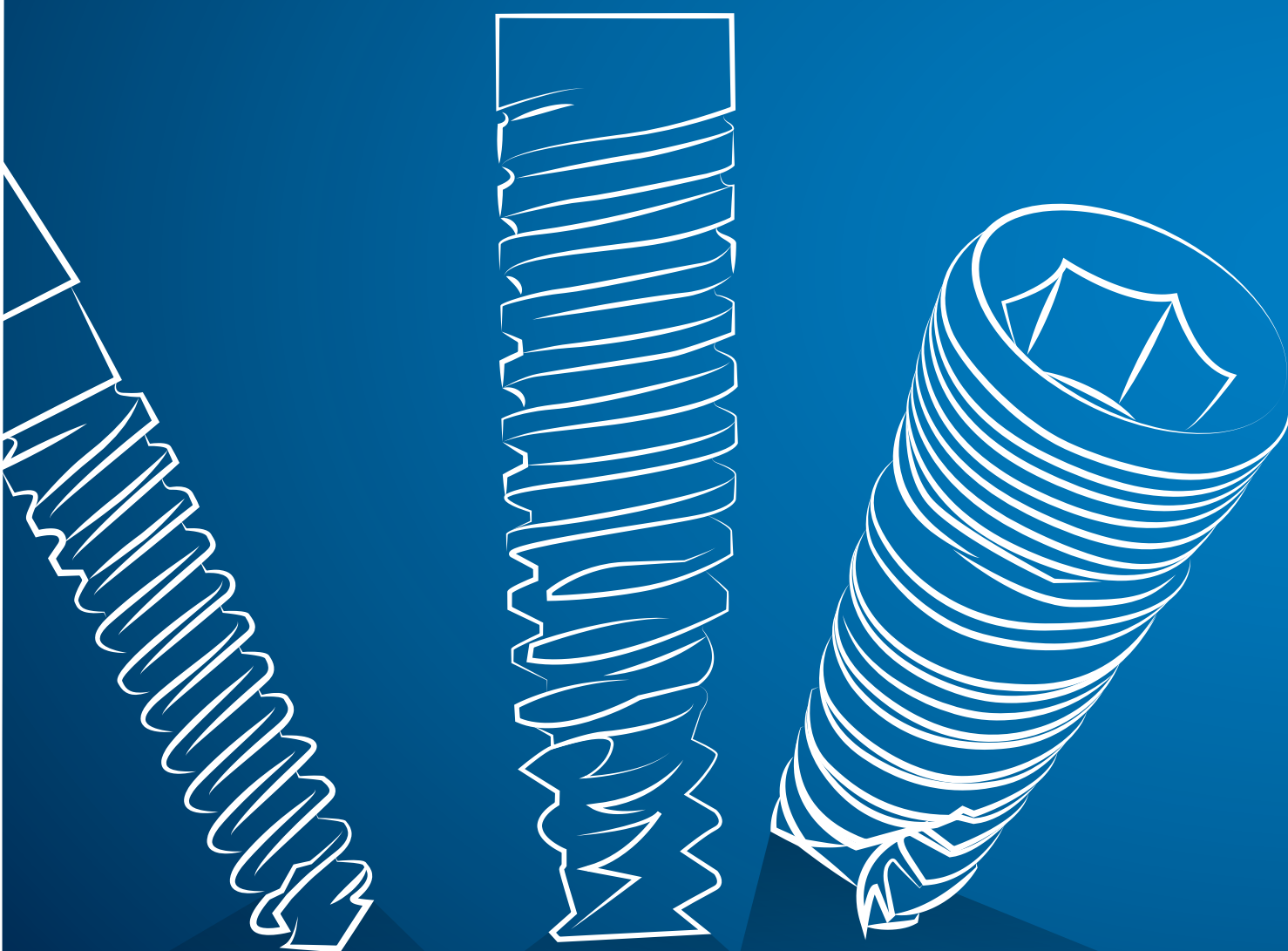

Имплантаты.

Компания MIS с гордостью представляет широкий спектр имплантатов, предлагая простые решения для клинических случаев разной степени сложности. Макро и микро дизайны каждого имплантата основаны на данных многолетних исследований и разработок. Все имплантаты изготавливаются из биосовместимого титанового сплава медицинского назначения. Поверхность имплантатов MIS модифицируется с помощью пескоструйной обработки и кислотного травления, обеспечивая надежную, долгосрочную и прогнозируемую остеоинтеграцию. Продукция компании MIS соответствует международным стандартам качества, в том числе имеет сертификат системы управления качеством для изделий медицинского назначения ISO 13485:2003. Продукция, указываемая в каталоге, имеет Европейский сертификат качества (CE) и сертифицирована Американским управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов для свободной продажи (FDA).



SEVEN

Самонарезающие имплантаты MIS SEVEN разработаны специально для проведения имплантации при различных типах кости и использования при различных клинических ситуациях. Их уникальный геометрический дизайн включает двойную компрессионную резьбу (толщина режущего края увеличивается от апикальной части имплантата к шейке по всей длине тела имплантата), три спиральных канала, исходящих из апекса и микрокольца на шейке имплантата. Следуя своему принципу "Сделай это Просто", компания представляет первую и единственную в своем роде комплектацию имплантата SEVEN со стерильной финальной фрезой однократного использования, позволяющей быстро и безопасно препарировать ложе под имплантат.



M4

Имплантаты MIS M4 представляют собой винтовые имплантаты цилиндро-конической формы, предназначенные как для одноэтапной, так и для двухэтапной имплантации. Цилиндрический дизайн обеспечивает высокую первичную стабильность имплантата. Самонарезающая резьба, три спиральных канала и коническое завершение в апикальной части делают имплантаты M4 идеальным решением для установки в плотной костной ткани.



UNO

Одноэтапный цельный имплантат UNO создан для установки, главным образом, в узкий альвеолярный гребень и в условиях недостатка костной ткани, когда проведение манипуляций по увеличению объема костной ткани противопоказано либо невозможно. Особые показания включают установку имплантата при единичном отсутствующем зубе или множественном включенном дефекте в области передних зубов нижней челюсти и боковых резцов верхней челюсти. Благодаря усовершенствованной геометрии двойной резьбы и морфологии поверхности, имплантаты UNO обеспечивают быстрое и простое проведение имплантации с достижением долгосрочной предсказуемой остеоинтеграции.

SEVEN®

NARROW

Ассортимент имплантатов
Узкая платформа

Длина

6мм

8мм

10мм

11.50мм

13мм

16мм

Вид

Ø3.30
мм

MF7-10330



MF7-11330



MF7-13330



MF7-16330



Хирургические инструменты

Подробная информация на стр.45-46



MT-HL10 | Длинный адаптер для микромотора



MT-HS10 | Короткий адаптер для микромотора



MT-SRA10 | Адаптер для реверсивного ключа



MT-SHA10 | Ручной ключ





MT-NRH20 | Длинный адаптер для реверсивного ключа , узкая платформа

Винт-заглушка и
формирователи десны

Имеющийся диапазон высот: 2, 3, 4, 5, 6 мм



MC1-00330

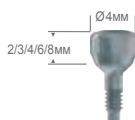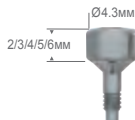MH-N2330
MH-N3330
MH-N4330
MH-N6330
MH-N8330MH-52330
MH-53330
MH-54330
MH-55330
MH-56330


SEVEN®

NARROW

Ø3.30mm
Узкая платформа

Номер по каталогу

Размеры

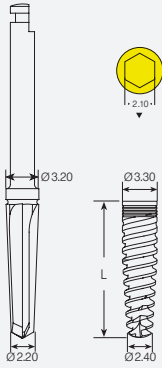MF7-10330	Ø3.30mm длина 10mm	
MF7-11330	Ø3.30mm длина 11.5mm	
MF7-13330	Ø3.30mm длина 13mm	
MF7-16330	Ø3.30mm длина 16mm	

Имплантат SEVEN

Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI


Пескоструйная обработка и кислотное травление

Финальная фреза

С каждым имплантатом длиной 10, 11.5, 13 и 16мм в комплекте поставляется специальная стерильная одноразовая финальная фреза, позволяющая быстро и надежно препарировать ложе под имплантат.

Ø3.30mm Хирургический протокол имплантации

Скорость препарирования (об./мин.)	1200- 1500	900- 1200	200- 400	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.40	Ø2.20 Ø3.20
				Ø3.30

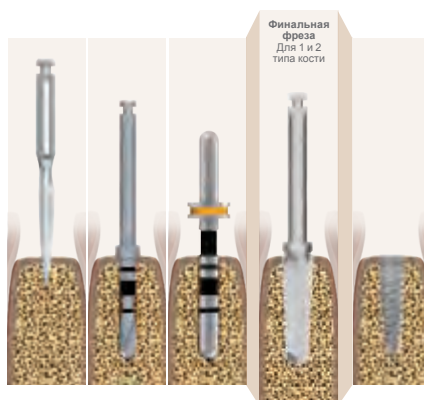

Финальная фреза не используется для 3 и 4 типа кости

Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13мм.

Рекомендуемый протокол проведения процедуры имплантации не может служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.

SEVEN®

STANDARD

Ассортимент имплантатов
Стандартная
платформа

Длина

6мм

8мм

10мм

11.50мм

13мм

16мм

Вид

Ø3.75
мм

MF7-08375



MF7-10375



MF7-11375



MF7-13375



MF7-16375



Ø4.20
мм

MF7-06420



MF7-08420



MF7-10420



MF7-11420



MF7-13420



MF7-16420



Хирургические инструменты

Подробная информация на
стр.45-46



MT-HL10

Длинный адаптер для микромотора



MT-HS10

Короткий адаптер для микромотора



MT-SRA10

Адаптер для реверсивного ключа



MT-SHA10


Ручной ключ

Винт-заглушка и формирователи десны

Имеющийся диапазон высот: 3, 4, 5, 6мм



MC1-00375

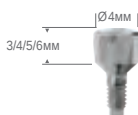

MH-03375
MH-04375
MH-05375
MH-06375



MH-53375
MH-54375
MH-55375
MH-56375

SEVEN®


STANDARD

Ø3.75mm

Стандартная платформа

Номер по каталогу

Размеры

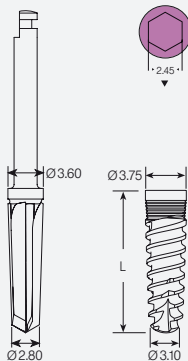MF7-08375	Ø3.75mm длина 8mm	
MF7-10375	Ø3.75mm длина 10mm	
MF7-11375	Ø3.75mm длина 11.5mm	
MF7-13375	Ø3.75mm длина 13mm	
MF7-16375	Ø3.75mm длина 16mm	

Имплантат SEVEN

Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI


Пескоструйная обработка и кислотное травление

Финальная фреза

С каждым имплантатом длиной 8, 10, 11.5, 13 и 16 мм в комплекте поставляется специальная стерильная одноразовая финальная фреза, позволяющая быстро и надежно препарировать ложе под имплантат.

Ø3.75mm Хирургический протокол имплантации

Скорость препарирования (об./мин.)	1200- 1500	900- 1200		500- 700		200- 400	200- 500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.40	Ø2.80	Ø2.80	Ø2.80 Ø3.60	Ø3.75	Ø3.75

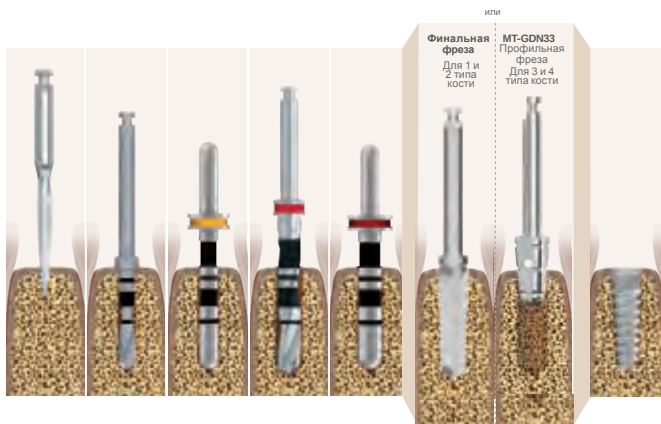

Финальная фреза не используется для 3 и 4 типа кости


Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13мм.

Рекомендуемый протокол проведения процедуры имплантации не может служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.

SEVEN®

STANDARD

Ø4.20mm
Стандартная платформа

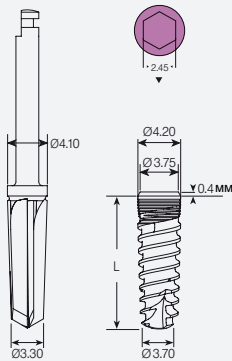Номер по каталогу	Размеры	
MF7-06420	Ø4.20mm длина 6mm	
MF7-08420	Ø4.20mm длина 8mm	
MF7-10420	Ø4.20mm длина 10mm	
MF7-11420	Ø4.20mm длина 11.5mm	
MF7-13420	Ø4.20mm длина 13mm	
MF7-16420	Ø4.20mm длина 16mm	


Имплантат SEVEN

Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI
Пескоструйная обработка и кислотное травление

Финальная фреза
С каждым имплантатом длиной 6, 8, 10, 11.5, 13 и 16мм в комплекте поставляется специальная стерильная одноразовая финальная фреза, позволяющая быстро и надежно препарировать ложе под имплантат.

Ø4.20mm Хирургический протокол имплантации

Скорость препарирования (об./мин.)	1200-1500	900-1200		500-700	400-700		200-400	200-500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.40	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.20	Ø3.30 Ø4.10	Ø3.30 Ø4.20	Ø4.20

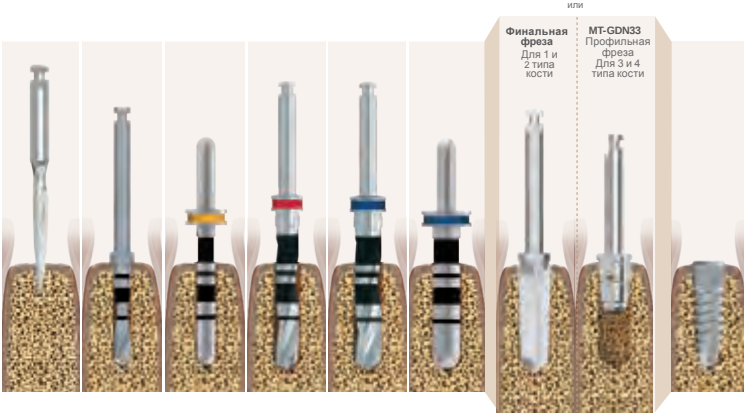

Финальная фреза не используется для 3 и 4 типа кости

Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13мм.

Рекомендуемый протокол проведения процедуры имплантации не может служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.

SEVEN®

WIDE

Ассортимент имплантатов
Широкая платформа

Длина	6mm	8mm	10mm	11.50mm	13mm	16mm
Вид						
Ø5 mm	MF7-06500 	MF7-08500 	MF7-10500 	MF7-11500 	MF7-13500 	MF7-16500 
Ø6 mm	MF7-06600 	MF7-08600 	MF7-10600 	MF7-11600 	MF7-13600 	

Хирургические инструменты

Подробная информация на
стр.45-46



MT-HLI10

Длинный адаптер
для микромотора



MT-HSI10

Короткий адаптер для
микромотора



MT-SRA10

Адаптер для
реверсивного ключа



MT-SHA10

Ручной ключ

Винт-заглушка и формирователи десны

Имеющийся диапазон высот: 3, 4, 5mm



MC1-00470



MH-W3500
MH-W4500
MH-W5500




MH-W3630
MH-W4630
MH-W5630

SEVEN®

WIDE

Ø5mm

Широкая платформа

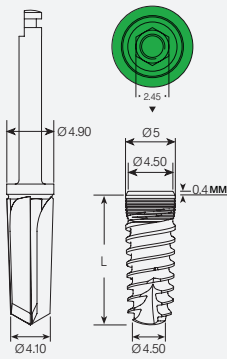Номер по каталогу	Размеры	
MF7-06500	Ø5mm длина 6мм	
MF7-08500	Ø5mm длина 8мм	
MF7-10500	Ø5mm длина 10мм	
MF7-11500	Ø5mm длина 11.5мм	
MF7-13500	Ø5mm длина 13мм	
MF7-16500	Ø5mm длина 16мм	

Имплантат SEVEN

Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI


Пескоструйная обработка и кислотное травление

Финальная фреза

С каждым имплантатом длиной 6, 8, 10, 11.5, 13 и 16мм в комплекте поставляется специальная стерильная одноразовая финальная фреза, позволяющая быстро и надежно препарировать ложе под имплантат.

Ø5mm Хирургический протокол имплантации

Скорость препарирования (об./мин.)	1200-1500	900-1200		500-700	400-700	300-500		200-400	200-500		15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.40	Ø2.80	Ø3.20	Ø4	Ø4	Ø4.10 Ø4.90	Ø5		Ø5

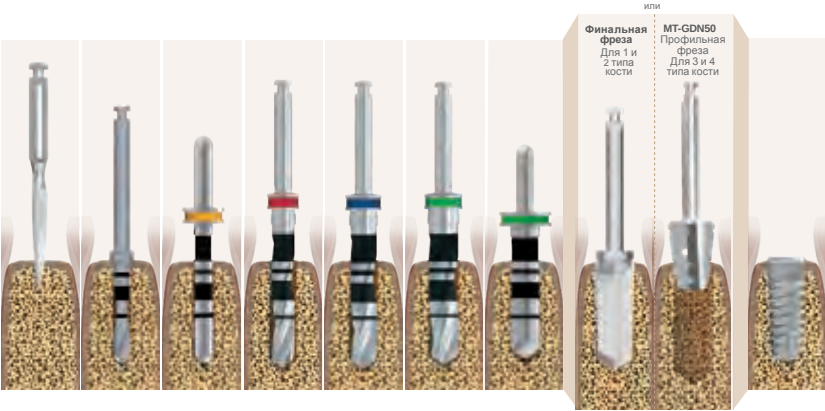

Финальная фреза не используется для 3 и 4 типа кости


Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13мм.

Рекомендуемый протокол проведения процедуры имплантации не может служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.

SEVEN®

WIDE

Ø6mm
Широкая платформа

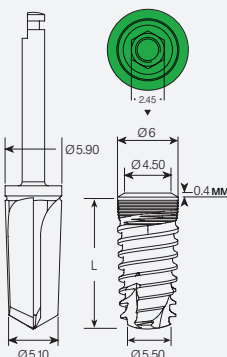Номер по каталогу	Размеры	
MF7-06600	Ø6mm длина 6mm	
MF7-08600	Ø6mm длина 8mm	
MF7-10600	Ø6mm длина 10mm	
MF7-11600	Ø6mm длина 11.5mm	
MF7-13600	Ø6mm длина 13mm	


Имплантат SEVEN

Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI
Пескоструйная обработка и кислотное травление

Финальная фреза
С каждым имплантатом длиной 6, 8, 10, 11.5, 13 и 16мм в комплекте поставляется специальная стерильная одноразовая финальная фреза, позволяющая быстро и надежно препарировать ложе под имплантат.

Ø6mm Хирургический протокол имплантации

Скорость препарирования (об./мин.)	1200-1500	900-1200		500-700	400-700	300-500	300-500	300-500		200-400	200-500	
Диаметр	Ø1.90	Ø2.40	Ø2.40	Ø2.80	Ø3.20	Ø4	Ø4.50	Ø5	Ø5	Ø5.10 Ø5.90	Ø6	15-25 Ø6

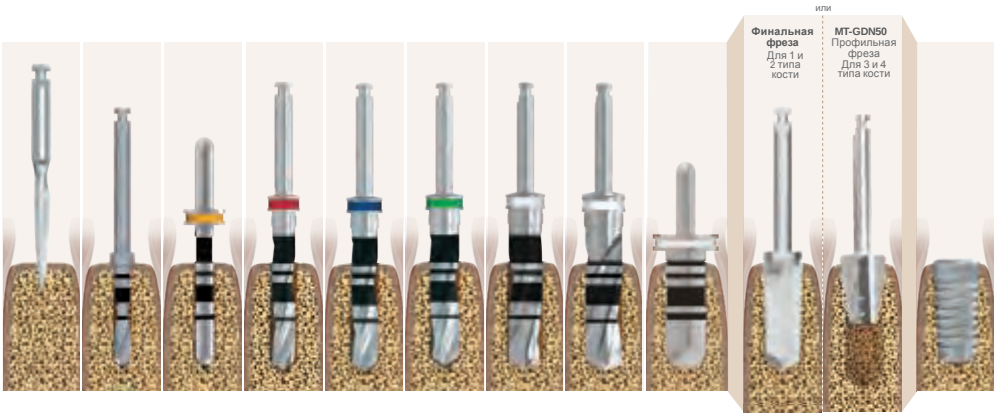

M4

NARROW

Ассортимент имплантатов
Узкая платформа

Длина

6мм

8мм

10мм

11.50мм

13мм

16мм

Вид

Ø3.30
мм

MF4-10330



MF4-11330



MF4-13330



MF4-16330



Хирургические инструменты

Подробная информация на стр.45-46



MT-HLI10 | Длинный адаптер для микромотора



MT-HSI10 | Короткий адаптер для микромотора



MT-SRA10 | Адаптер для реверсивного ключа



MT-SHA10 | Ручной ключ



MT-NRH20 | Длинный адаптер для реверсивного ключа,
узкая платформа

Винт-заглушка и формирователи десны


Имеющийся диапазон высот: 2, 3, 4, 5, 6мм



MC1-00330



MH-N2330
MH-N3330
MH-N4330
MH-N6330
MH-N8330

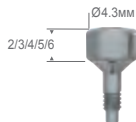

MH-52330
MH-53330
MH-54330
MH-55330
MH-56330


M4

NARROW

Ø3.30mm
Узкая платформа

Номер по каталогу

Размеры

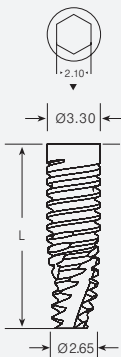MF4-10330	Ø3.30mm длина 10mm	
MF4-11330	Ø3.30mm длина 11.5mm	
MF4-13330	Ø3.30mm длина 13mm	
MF4-16330	Ø3.30mm длина 16mm	


Имплантат M4

Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI

Пескоструйная обработка и кислотное травление

Ø3.30mm Хирургический протокол имплантации

Скорость препарирования (об./мин.)	1200- 1500	900- 1200	500- 700	200- 500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.4	Ø2.80	Ø3.00 или Ø3.30	Ø3.30

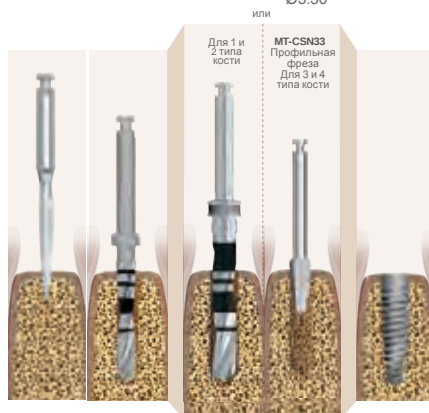

Рекомендуемый протокол проведения процедуры имплантации не может служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.

M4

STANDARD

Ассортимент имплантатов Стандартная платформа

Хирургические инструменты

Подробная информация на
стр.45-46



MT-HL10

Длинный адаптер
для микромотора



MT-HS10

Короткий адаптер
для микромотора



MT-SRA10

Адаптер для
реверсивного ключа



MT-SHA10

Ручной ключ

Длина

6мм

8мм

10мм

11.50мм

13мм

16мм

Вид

Ø3.75
мм

MF4-08375



MF4-10375



MF4-11375



MF4-13375



MF4-16375



Ø4.20
мм

MF4-06420



MF4-08420



MF4-10420



MF4-11420



MF4-13420



MF4-16420




Винт-заглушка и формирователи десны

Имеющийся диапазон высот: 3, 4, 5, 6мм



MC1-00375

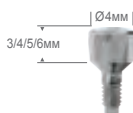

MH-03375
MH-04375
MH-05375
MH-06375



MH-53375
MH-54375
MH-55375
MH-56375

M4


STANDARD

Ø3.75mm

Стандартная платформа

Номер по каталогу

Размеры

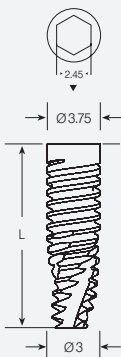MF4-08375	Ø3.75mm длина 8mm	
MF4-10375	Ø3.75mm длина 10mm	
MF4-11375	Ø3.75mm длина 11.5mm	
MF4-13375	Ø3.75mm длина 13mm	
MF4-16375	Ø3.75mm длина 16mm	


Имплантат M4

Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI

Пескоструйная обработка и кислотное травление

Ø3.75mm Хирургический протокол имплантации

Скорость препарирования (об./мин.)	1200- 1500	900- 1200	500- 700	400- 700	200- 500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.4	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.20 Ø3.75	Ø3.75

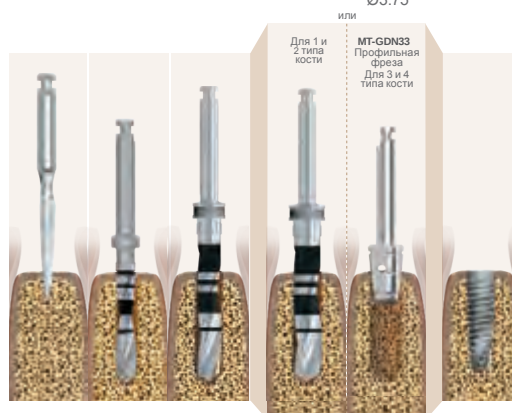

Рекомендуемый протокол проведения процедуры имплантации не может служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.

M4

STANDARD

Ø4.20mm
Стандартная платформа

Номер по каталогу

Размеры

MF4-06420

Ø4.20mm
длина 6mm

MF4-08420

Ø4.20mm
длина 8mm

MF4-10420

Ø4.20mm
длина 10mm

MF4-11420


Ø4.20mm
длина 11.5mm

MF4-13420

Ø4.20mm
длина 13mm

MF4-16420

Ø4.20mm
длина 16mm

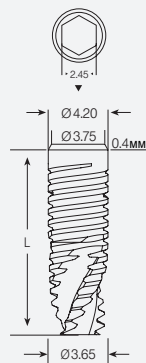


Имплантат M4

Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI

Пескоструйная обработка и кислотное травление

Ø4.20mm Хирургический протокол имплантации

Скорость препарирования (об./мин.)	1200- 1500	900- 1200	500- 700	400- 700	400- 600	200- 500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.4	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.80	Ø3.20 Ø4.20	Ø4.20

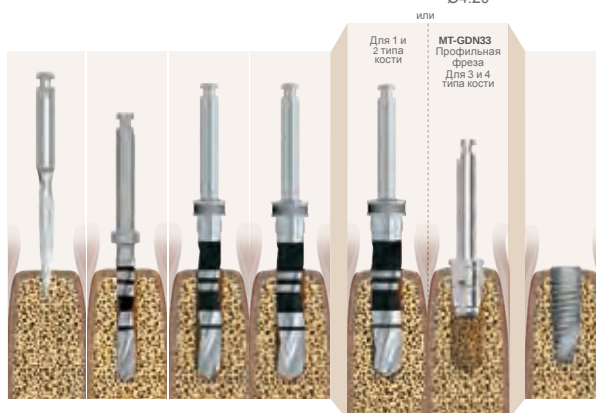

Рекомендуемый протокол проведения процедуры имплантации не может служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.

M4

WIDE

Ассортимент имплантатов
Широкая платформа

Длина	6мм	8мм	10мм	11.50мм	13мм	16мм
Вид						
Ø5 мм	MF4-06500	MF4-08500	MF4-10500	MF4-11500	MF4-13500	MF4-16500
						
Ø6 мм	MF4-06600	MF4-08600	MF4-10600	MF4-11600	MF4-13600	
						

Хирургические инструменты

Подробная информация на
стр.45-46



MT-HLI10

Длинный адаптер
для микромотора



MT-HSI10

Короткий адаптер
для микромотора



MT-SRA10

Адаптер для
реверсивного ключа



MT-SHA10

Ручной ключ

Винт-заглушка и формирователи десны

Имеющийся диапазон высот: 3, 4, 5мм



MC1-00470



MH-W3500
MH-W4500
MH-W5500




MH-W3630
MH-W4630
MH-W5630

M4

WIDE

Ø5mm
Широкая платформа

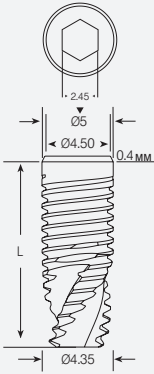
Номер по каталогу	Размеры	
MF4-06500	Ø5mm длина 6mm	
MF4-08500	Ø5mm длина 8mm	
MF4-10500	Ø5mm длина 10mm	
MF4-11500	Ø5mm длина 11.5mm	
MF4-13500	Ø5mm длина 13mm	
MF4-16500	Ø5mm длина 16mm	

Имплантат M4

Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI
Пескоструйная обработка и кислотное травление

Ø5mm Хирургический протокол имплантации

Скорость препарирования (об./мин.)	1200- 1500	900- 1200	500- 700	400- 700	400- 600	400- 600	200- 500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.4	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.80	Ø4.50	Ø4.50 Ø5.00	Ø5

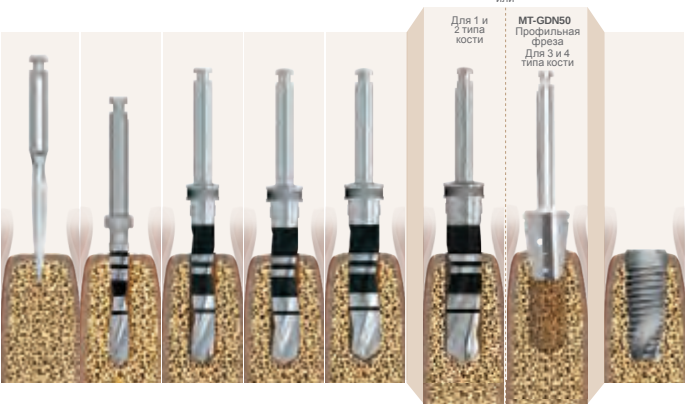

Рекомендуемый протокол проведения процедуры имплантации не может служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.



M4

WIDE

Ø6mm
Широкая платформа


Номер по каталогу	Размеры	
MF4-06600	Ø6mm длина 6mm	
MF4-08600	Ø6mm длина 8mm	
MF4-10600	Ø6mm длина 10mm	
MF4-11600	Ø6mm длина 11.5mm	
MF4-13600	Ø6mm длина 13mm	

Имплантат M4


Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI
Пескоструйная обработка и кислотное травление

Ø6mm Хирургический протокол имплантации

Скорость препарирования (об./мин.)	1200-1500	900-1200	500-700	400-700	400-600	400-600	300-500	300-500	200-500	15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2.4	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.80	Ø4.50	Ø5	Ø5.50	Ø4.50 Ø6.00	Ø6

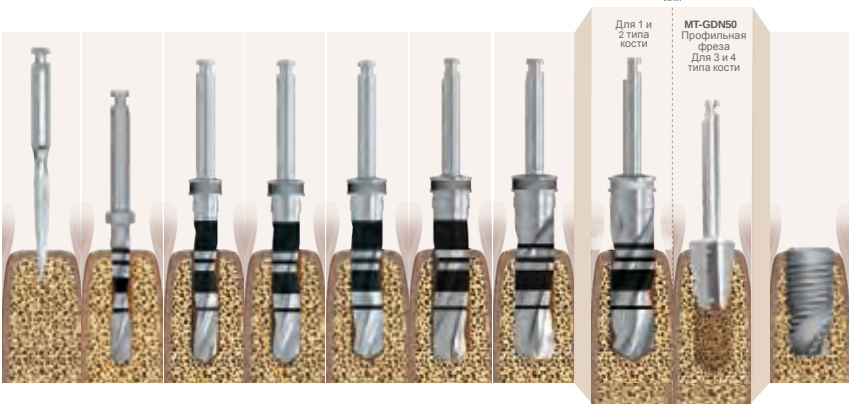

Хирургические инструменты

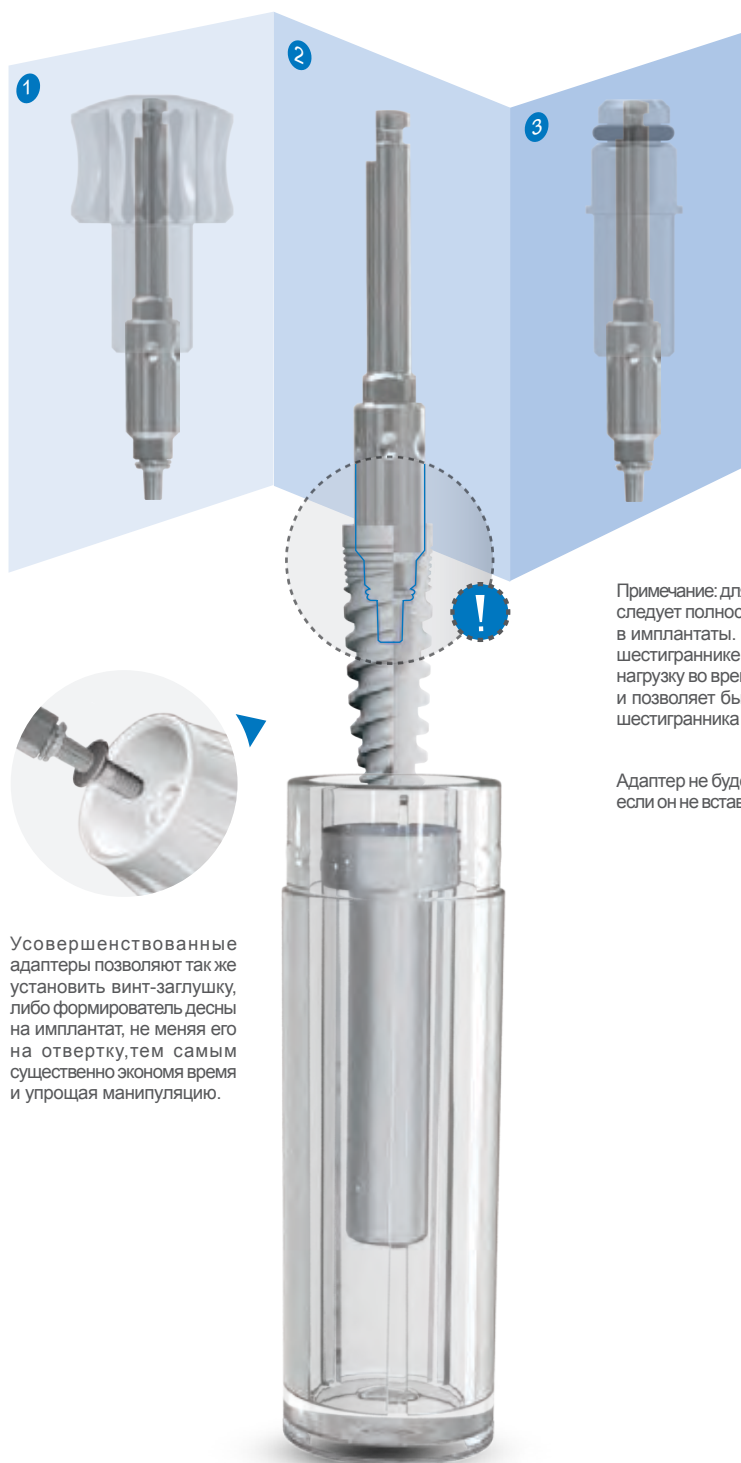

Усовершенствованные адаптеры позволяют также установить винт-заглушку, либо формирователь десны на имплантат, не меняя его на отвертку, тем самым существенно экономя время и упрощая манипуляцию.

Хирургический инструментарий разработан специально с целью сокращения времени проведения имплантации и повышения ее надежности. Уникальная система "3 в 1" сводит к минимуму количество необходимых инструментов и увеличивает гибкость их применения в различных клинических ситуациях.

- 1 Ручной ключ
- 2 Адаптер для микромотора
- 3 Адаптер для реверсивного ключа

Примечание: для эффективного проведения имплантации следует полностью, до упора устанавливать адаптеры в имплантаты. Правильное расположение адаптера в шестиграннике имплантата равномерно распределяет нагрузку во время введения имплантата в костное ложе и позволяет быстро отсоединить ключ от внутреннего шестигранника имплантата по завершению процедуры.

Адаптер не будет надежно зафиксирован в имплантате, если он не вставлен в шестигранник полностью, до конца.

Хирургические инструменты



MT-HLI10

Длинный адаптер для микромотора



MT-HSI10

Короткий адаптер для микромотора



MT-SRA10

Адаптер для реверсивного ключа



MT-SHA10
Ручной ключ

UNO

Ассортимент имплантатов
Одноэтапный
имплантат

Длина	10мм	11.50мм	13мм	16мм
Вид	MO1-10300	MO1-11300	MO1-13300	MO1-16300
Ø3 мм				
Ø3.50 мм	MO1-10350	MO1-11350	MO1-13350	MO1-16350
				

Хирургические инструменты



MT-HKS15

Короткий адаптер реверсивного ключа для имплантатов UNO



MT-HKL21

Длинный адаптер реверсивного ключа для имплантатов UNO




MT-HKO21

Ручной ключ для имплантатов UNO

UNO

Ø3mm
Цельный имплантат

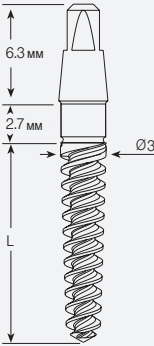
Номер по каталогу	Размеры	
MO1-10300	Ø3mm длина 10mm	
MO1-11300	Ø3mm длина 11.5	
MO1-13300	Ø3mm длина 13mm	
MO1-16300	Ø3mm длина 16mm	

Имплантат UNO

Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI
Пескоструйная обработка и кислотное травление резьбы имплантата

Ø3mm Хирургический протокол имплантации

Скорость препарирования (об./мин.)	1200- 1500	900- 1200		700- 900		15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2	Ø2.40	Ø2.4	Ø3

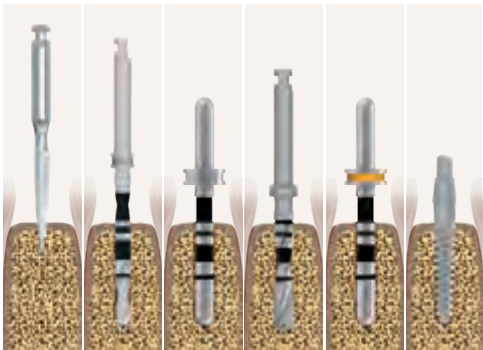

 Рекомендваемый протокол проведения процедуры имплантации не может служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.



UNO

Ø3.50mm
Цельный имплантат

Номер по каталогу	Размеры	
MO1-10350	Ø3.50mm длина 10mm	
MO1-11350	Ø3.50mm длина 11.5mm	
MO1-13350	Ø3.50mm длина 13mm	
MO1-16350	Ø3.50mm длина 16mm	


Имплантат UNO

Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI

Пескоструйная обработка и кислотное травление резьбы имплантата

Ø3.50mm Хирургический протокол имплантации

Скорость препарирования (об./мин.)	1200-1500	900-1200		700-900	500-700		15-25
Диаметр	Ø1.90	Ø2	Ø2	Ø2.40	Ø3	Ø3	Ø3.50

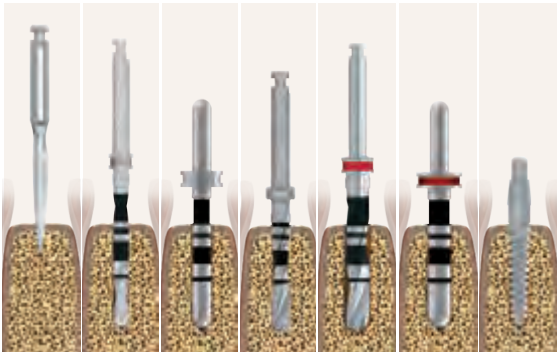

Рекомендуемый протокол проведения процедуры имплантации не может служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.


Имплантат UNO Ортопедические компоненты

Ортопедические компоненты для имплантатов UNO включают аналоги имплантатов и многоцелевые пластиковые колпачки, которые могут быть использованы в качестве точных слепочных трансферов, временных формирователей десны или служить основой для временной реставрации.




Слепочные трансферы.

Слепочные трансферы используются для снятия оттисков методом закрытой и открытой ложки, что позволяет получить точные рабочие модели и пассивную посадку реставраций.

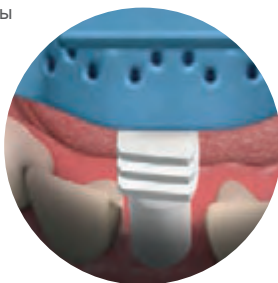

Временная реставрация.

Слепочные колпачки могут использоваться в качестве основы для временных реставраций при условии отрезания верхней части трансфера и создании шероховатой поверхности. Для фиксации реставрации рекомендуется применять цемент, не содержащий эвгенол.

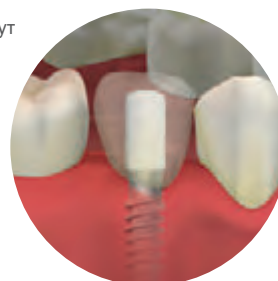

Формирователь десны.

При отрезании верхней части пластиковый колпачок может использоваться в качестве формирователя десны.



Mm-OUP01

Пластиковый колпачок для имплантата UNO



MO1-RSA10

Аналог имплантата UNO


LINK

Ассортимент имплантатов Ортодонтический имплантат

Длина	6мм	8мм	10мм	12мм
Вид	MG2-06160	MG2-08160	MG2-10160	MG2-12160
Ø1.60 мм				

Ортодонтический имплантат

Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI

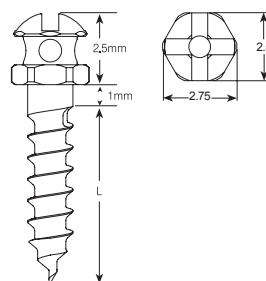

Инструменты для установки ортодонтических имплантатов

Специально разработанные инструменты позволяют быстро и просто устанавливать или удалять ортодонтические имплантаты. Установка и удаление имплантатов безопасно и эффективно производится как вручную, так и с использованием углового наконечника.



MT-TDO01 | Пилотная фреза диаметром 1мм



MT-SCD20 | Короткая крестообразная насадка



MT-LCD20 | Длинная крестообразная насадка



MT-MSD20 | Универсальная ручная отвертка

Упаковка

Инновационная упаковка имплантатов компании MIS специально разработана для простоты и удобства использования. Коробка каждого вида имплантата окрашена в определенные цвета, информация на них написана крупным шрифтом, данные на этикетке обозначены в незашифрованном виде, отрывной язычок обеспечивает быстрое вскрытие упаковки. Компактное исполнение квадратной коробки позволяет экономить рабочее пространство.

Компактное исполнение квадратной коробки позволяет экономить рабочее пространство.



Идентификационная маркировка имплантатов

Данные для идентификации диаметр имплантата, длина имплантата и платформа имплантата



Удобный отрывной язычок

Удобный отрывной язычок позволяет быстро и легко вскрыть упаковку во время хирургического вмешательства.



Цветовая маркировка имплантатов


- Светло-серый цвет | Ø3 Имплантат UNO
- Серый цвет | Ø3.50 Имплантат UNO


- Желтый | Ø3.30 Узкая платф. (SEVEN, M4)
- Красный | Ø3.75 Стандартная платф. (SEVEN, M4)
- Синий | Ø4.20 Стандартная платф. (SEVEN, M4)
- Зеленый | Ø5 Широкая платф. (SEVEN, M4)
- Белый | Ø6 Широкая платф. (SEVEN, M4)



Хирургические инструменты

Компания MIS предлагает широкий выбор хирургических наборов и инструментов, предназначенных для упрощения процедуры имплантации как для хирурга-имплантолога, так и для пациента.

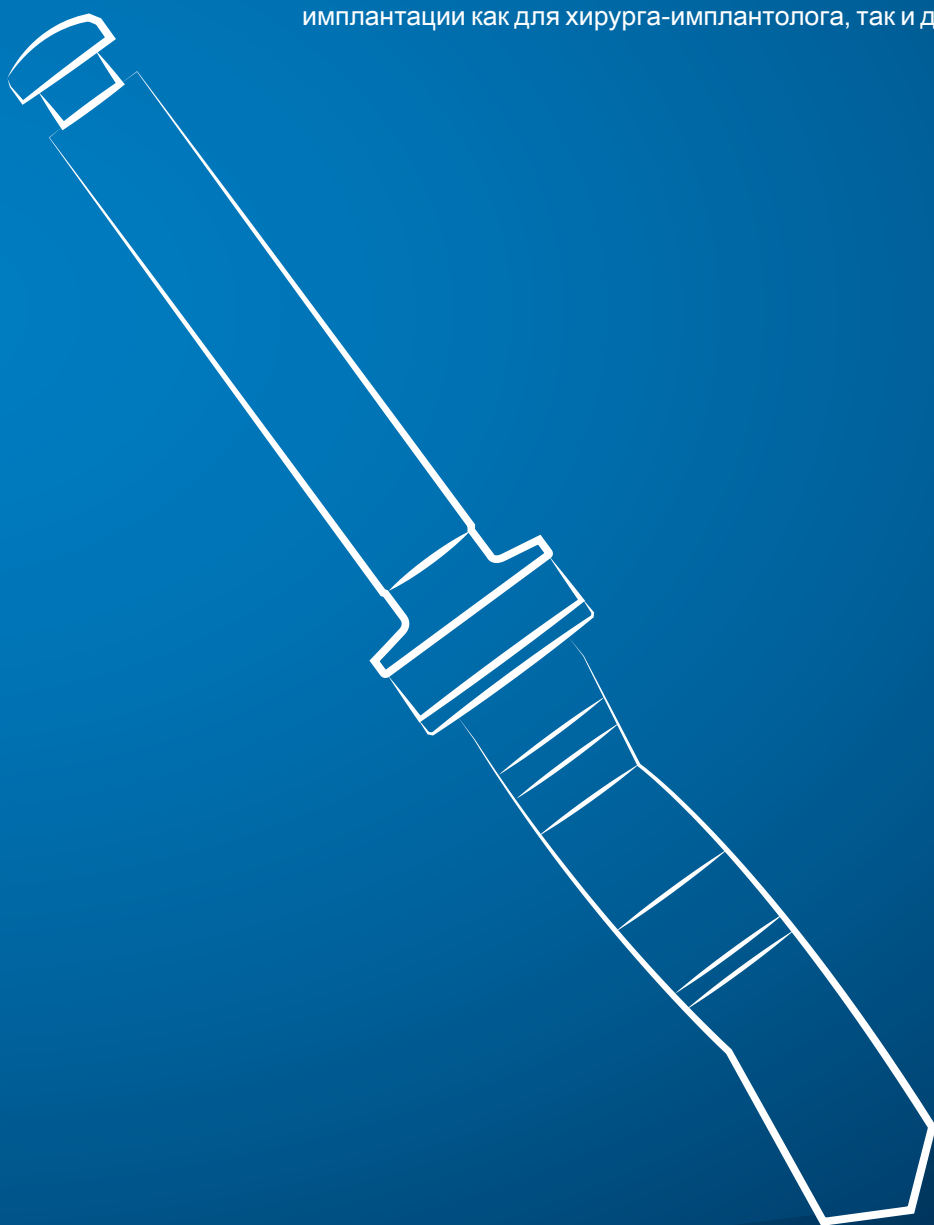

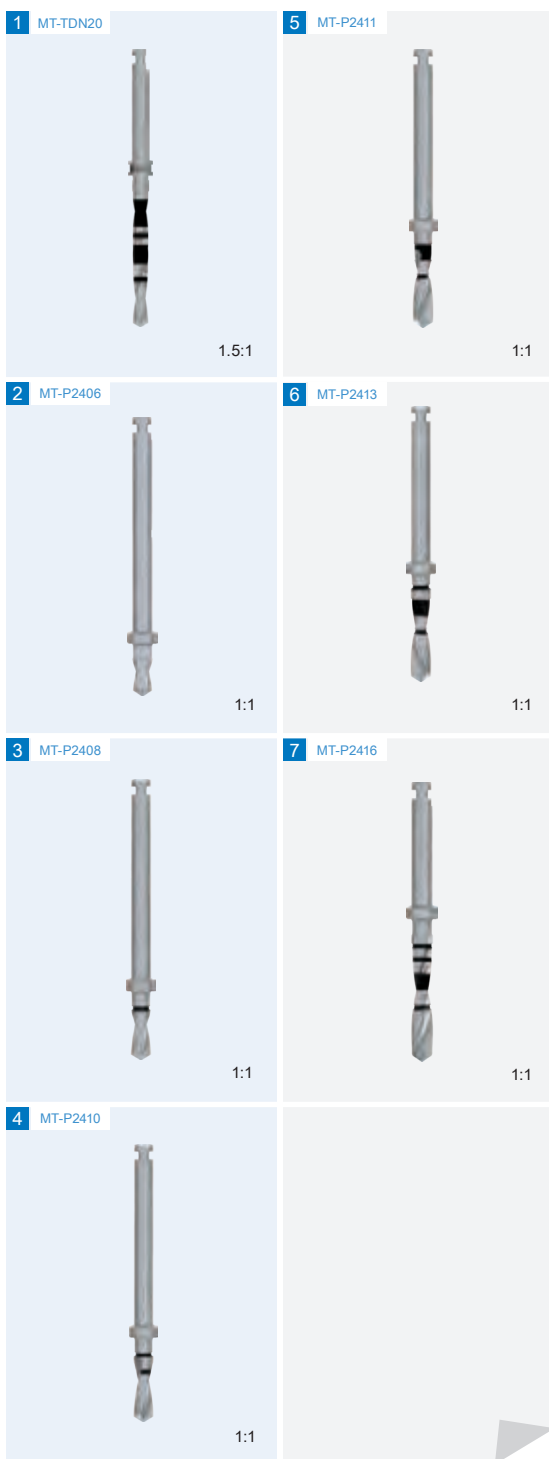

Фреза-пилот. Внешнее охлаждение

1 MT-TDN20

Фреза-пилот 2мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-37.3мм
Диаметр - 2мм

5 MT-P2411

Фреза-пилот диаметром
2.40мм, длина 11.5мм

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-31.8мм
Диаметр - 2.40мм

2 MT-P2406

Фреза-пилот диаметром
2.40мм, длина 6мм

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-31.8мм
Диаметр - 2.40мм

6 MT-P2413

Фреза-пилот диаметром
2.40мм, длина 13мм

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-31.8мм
Диаметр - 2.40мм

3 MT-P2408

Фреза-пилот диаметром
2.40мм, длина 8мм

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-31.8мм
Диаметр - 2.40мм

7 MT-P2416

Фреза-пилот диаметром
2.40мм, длина 16мм

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-31.8мм
Диаметр - 2.40мм


4 MT-P2410

Фреза-пилот диаметром
2.40мм, длина 10мм

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-31.8мм
Диаметр - 2.40мм

Пилотные фрезы
Внешнее охлаждение

Глубина 16мм
Глубина 13мм
Глубина 11.5мм
Глубина 10мм
Глубина 8мм
Глубина 6мм

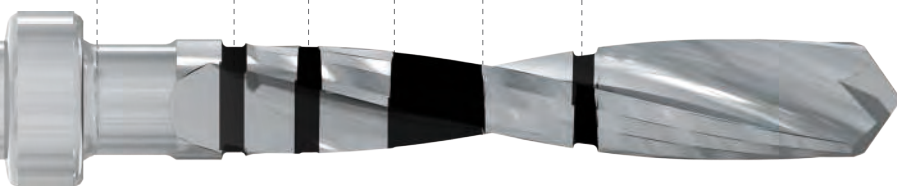

1 MT-TDT28



1:1

4 MT-TDT45



1:1

2 MT-TDT32



1:1

5 MT-TDT50



1:1

3 MT-TDT40



1:1

SEVEN

Формирующие фрезы. Внешнее охлаждение

1 MT-TDT28

Формирующая фреза 2.8мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-37.5мм
Диаметр - 2.80мм

4 MT-TDT45

Формирующая фреза 4.5мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-38.2мм
Диаметр - 4.50мм

2 MT-TDT32

Формирующая фреза 3.2мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-37.5мм
Диаметр - 3.20мм

5 MT-TDT50

Формирующая фреза 5мм,
внешнее охлаждение


Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-38.2мм
Диаметр - 5мм

3 MT-TDT40

Формирующая фреза 4мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-37.5мм
Диаметр - 4мм



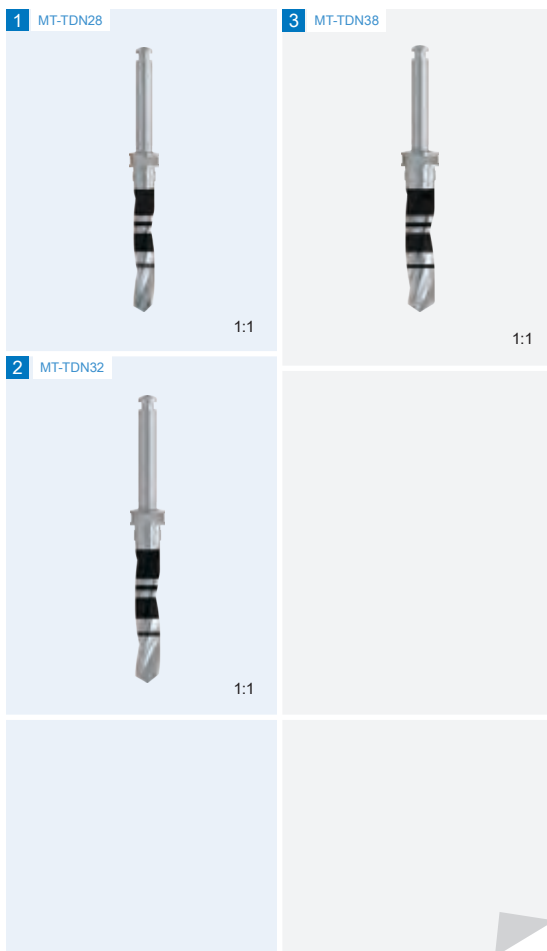

M4

Формирующие фрезы. Внешнее охлаждение

1 MT-TDN28

Формирующая фреза 2.8мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-37.5мм
Диаметр-2.8мм

3 MT-TDN38


Формирующая фреза 3.8мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-37.8мм
Диаметр-3.8мм

2 MT-TDN32

Формирующая фреза 3.2мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-37.6мм
Диаметр-3.2мм

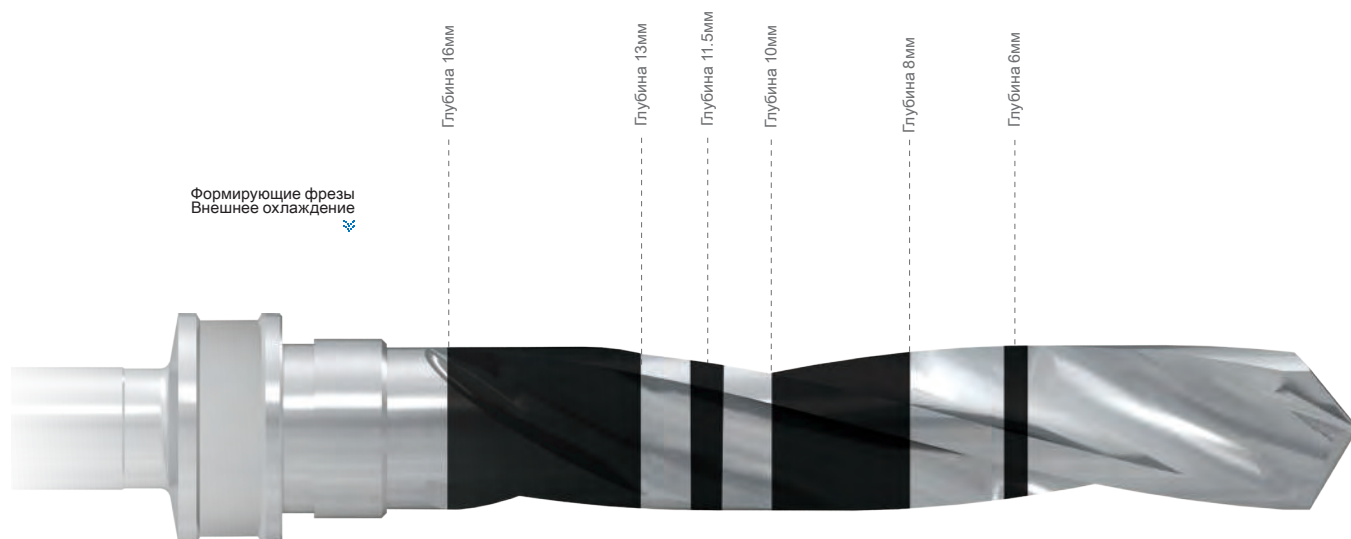

1 MT-TDN45



1:1

3 MT-TDN55



1:1

2 MT-TDN50



1:1

M4

Формирующие фрезы. Внешнее охлаждение

1 MT-TDN45

Формирующая фреза 4.5мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-38.2мм
Диаметр - 4.50мм

3 MT-TDN55

Формирующая фреза 5.5мм,
внешнее охлаждение


Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-38.2мм
Диаметр-5.5мм

2 MT-TDN50

Формирующая фреза 5мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-38.2мм
Диаметр - 5мм



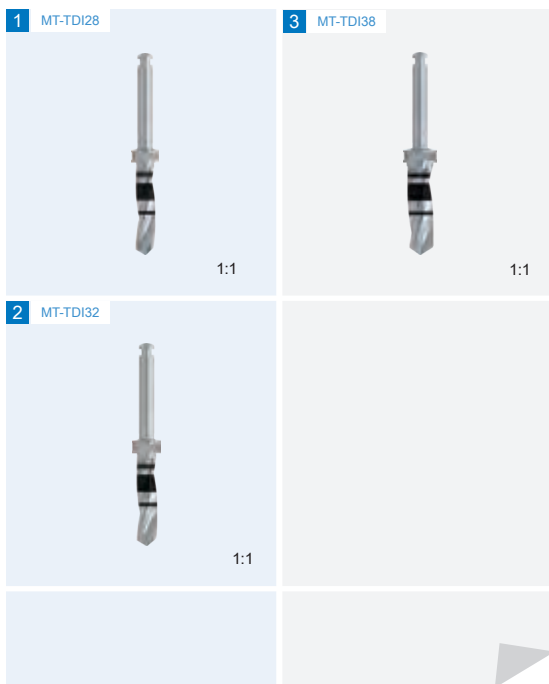

Короткие формирующие фрезы. Внешнее охлаждение

- 1 MT-TDI28**
Формирующая фреза
2.8мм, короткая

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-30мм
Диаметр - 2.80мм

- 3 MT-TDI38**
Формирующая фреза
3.8мм, короткая

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-30мм
Диаметр - 3.80мм

- 2 MT-TDI32**
Формирующая фреза
3.2мм, короткая

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-30мм
Диаметр - 3.20мм


Формирующие фрезы.
Внешнее охлаждение


Глубина 11.5мм

Глубина 10мм

Глубина 8мм

Глубина 6мм

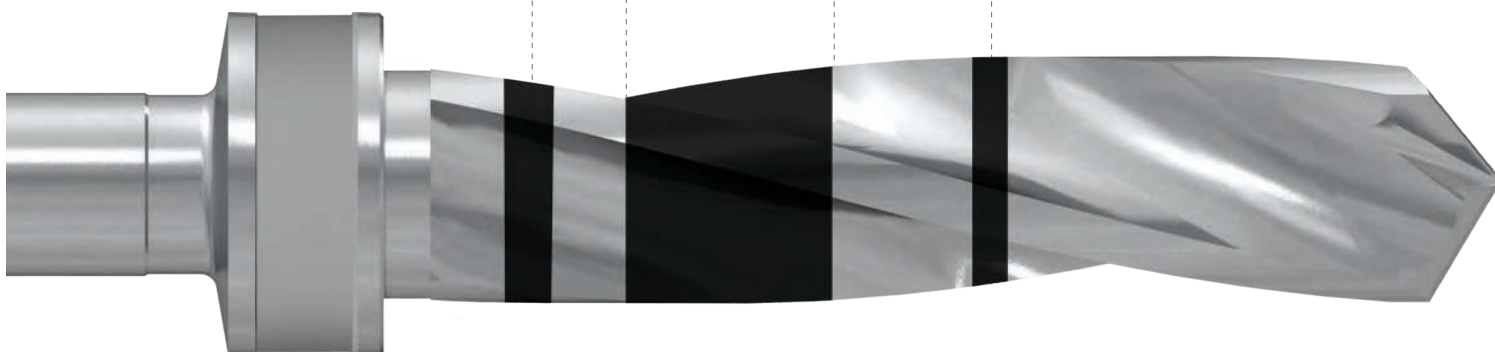

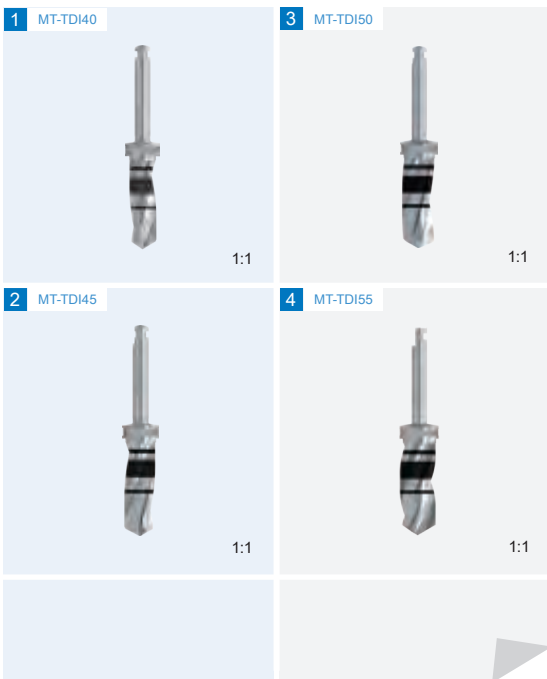

Короткие формирующие фрезы. Внешнее охлаждение

1 MT-TDI40

Формирующая фреза
4мм, короткая

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-30мм
Диаметр - 4.0мм

3 MT-TDI50

Формирующая фреза
5мм, короткая

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-30мм
Диаметр - 5.0мм

2 MT-TDI45

Формирующая фреза
4.5мм, короткая

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-30мм
Диаметр - 4.50мм

4 MT-TDI55

Формирующая фреза
5.5мм, короткая

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-30мм
Диаметр - 5.50мм





Формирующие фрезы. Внутреннее охлаждение

1 MT-TD280

Формирующая фреза 2.8мм,
внутреннее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-37,5мм
Диаметр-2,8мм

3 MT-TD380

Формирующая фреза 3.8мм,
внутреннее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-37,8мм
Диаметр-3,8мм

2 MT-TD320

Формирующая фреза 3.2мм,
внутреннее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-37,6мм
Диаметр-3,2мм

Формирующие фрезы.
Внешнее охлаждение

Глубина 16мм


Глубина 13мм

Глубина 11.5мм

Глубина 10мм

Глубина 8мм

Глубина 6мм

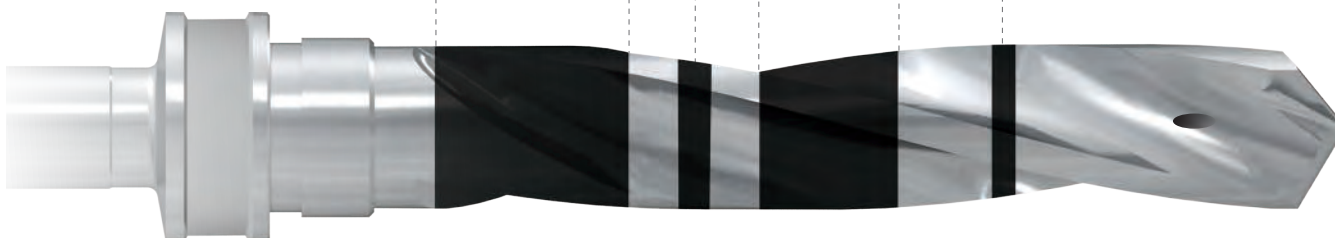

1 MT-TD400



1:1

3 MT-TD500



1:1

2 MT-TD450



1:1

4 MT-TD550



1:1

Формирующие фрезы. Внутреннее охлаждение

1 MT-TD400

Формирующая фреза 4мм,
внутреннее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-37.8мм
Диаметр - 4.0мм

3 MT-TD500

Формирующая фреза 5мм,
внутреннее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-38.2мм
Диаметр - 5.0мм

2 MT-TD450

Формирующая фреза 4.5мм,
внутреннее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-38.2мм
Диаметр - 4.50мм

4 MT-TD550

Формирующая фреза 5.5мм,
внутреннее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-38.2мм
Диаметр-5.5мм





Маркирующие и профильные фрезы

1 MT-TDN19

Маркирующая фреза 1.90мм,
внешнее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-34мм
Диаметр - 1.90мм

4 MT-CSN33

Фреза профильная
для узкой платформы,
внутреннее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-31мм
Ø3.30мм

2 MT-TD110

Маркирующая фреза 1.90мм,
внутреннее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-34мм
Диаметр - 1.90мм

5 MT-GDN33

Фреза профильная для
стандартной платформы,
внутреннее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-26мм
Ø3.75мм / Ø4.20мм

3 MT-SMD10

Маркирующая пикообразная
фреза, внешнее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-27.5мм


6 MT-GDN50

Фреза профильная для
широкой платформы,
внутреннее охлаждение

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-26.8мм
Ø5мм / Ø6мм

MT-GDN50

Фреза профильная для широкой
платформы, внутреннее охлаждение

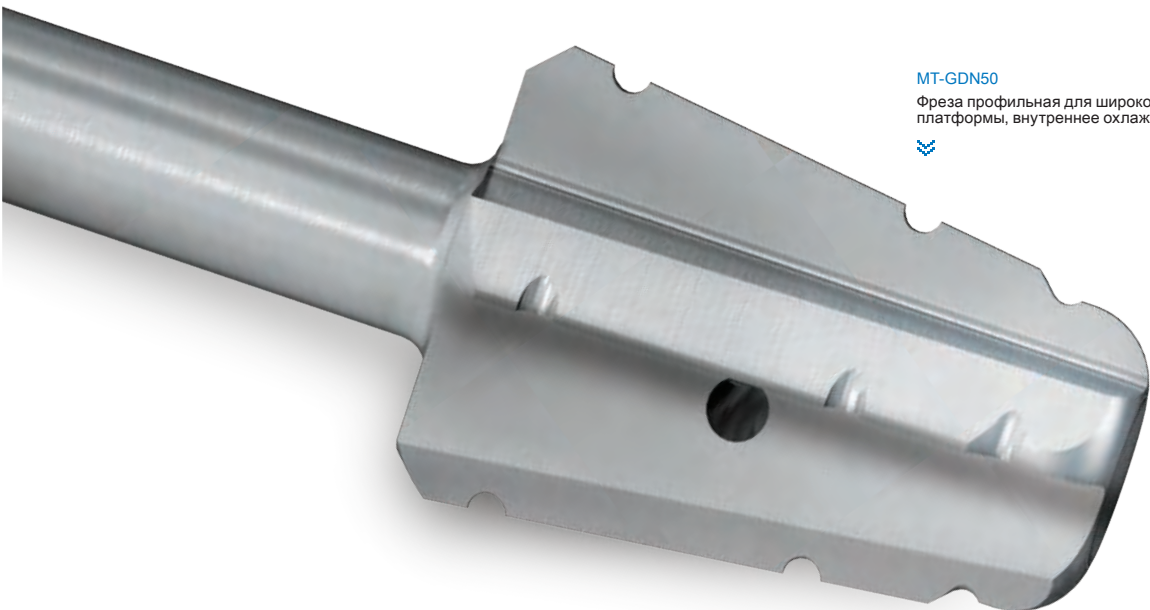

1 MT-00400



1:1

3 MT-00600



1:1

2 MT-00500



1:1

Трепаны

1 MT-00400

Трепан 4мм

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-37мм
Внутренний Ø 4мм
Внешний Ø 5мм

3 MT-00600

Трепан 6мм

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-37мм
Внутренний Ø 6мм
Внешний Ø 7мм

2 MT-00500

Трепан 5мм

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-37мм
Внутренний Ø 5мм
Внешний Ø 6мм

1 MT-CRD21



1:1

3 MT-CRD28



1:1

2 MT-CRD20



1:1

Керамические фрезы. Внешнее охлаждение

Керамические фрезы отличаются пониженной вибрацией, плавностью в работе и легким удалением остатков тканей с их поверхности. Керамические фрезы MIS изготавливаются из керамики на основе циркония (оксид циркония) и алюминия (оксид алюминия). Основными преимуществами являются: отсутствие металла, биосовместимость, стойкость к коррозии, износостойкость - используются для препарирования кости 50-100 раз, исключительное сопротивление изгибу по сравнению с керамическими фрезами других производителей, крутящий момент в два раза меньше крутящего момента фрез из нержавеющей стали.

1 MT-CRD21

Фреза-пилот короткая
диаметром 2.10мм

Материал: Цирконий
Размеры: Длина-28.5мм
Диаметр - 2.10мм

3 MT-CRD28

Формирующая фреза
диаметром 2.80мм

Материал: Цирконий
Размеры: Длина-35мм
Диаметр - 2.80мм

2 MT-CRD20

Фреза-пилот
диаметром 2мм

Материал: Цирконий
Размеры: Длина-33.5мм
Диаметр - 2мм



Хирургические инструменты для имплантатов UNO

1 MT-HKS15

Короткий адаптер для реверсивного ключа имплантата UNO

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-12мм

4 MT-UMS21

Короткий адаптер для микромотора для имплантата UNO

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-22мм

2 MT-HKL21

Длинный адаптер для реверсивного ключа имплантата UNO

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-17мм

5 MT-UML21

Длинный адаптер для микромотора для имплантата UNO

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-30мм


3 MT-HKO21

Ключ ручной для установки имплантата UNO

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-18.8мм

➤
MT-HKO21
Ключ ручной для установки имплантата UNO



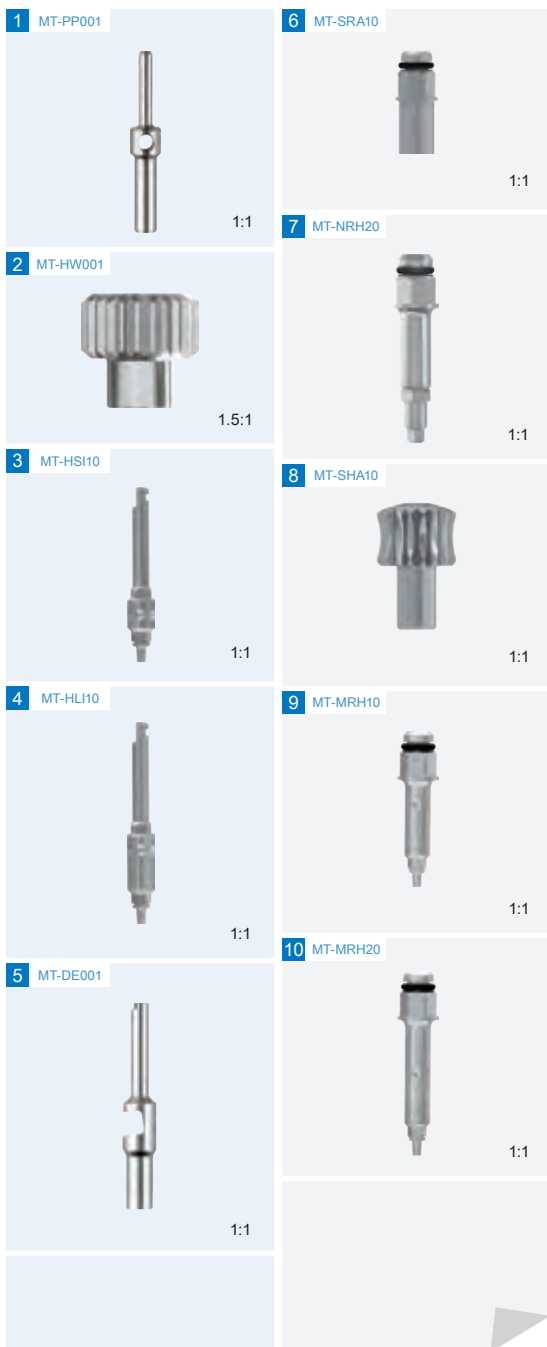

Хирургические инструменты

1 MT-PP001

Пин параллельности

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-24мм
Ø2мм / Ø3.20мм

6 MT-SRA10

Адаптер для реверсивного ключа

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-15.5мм

2 MT-HW001

Ручной ключ

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-13мм

7 MT-NRH20

Длинный адаптер для реверсивного ключа, узкая платформа

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-25мм

3 MT-HS10

Короткий адаптер для микромотора

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-24.4мм

8 MT-SHA10

Ручной ключ

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-15.6мм

4 MT-HL10

Длинный адаптер для микромотора

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-24.4мм

9 MT-MRH10

Короткий адаптер для реверсивного ключа

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина - 19мм

5 MT-DE001

Удлинитель фрезы

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-28.85мм


10 MT-MRH20

Длинный адаптер для реверсивного ключа

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-25мм

MT-SHA10
Ручной ключ




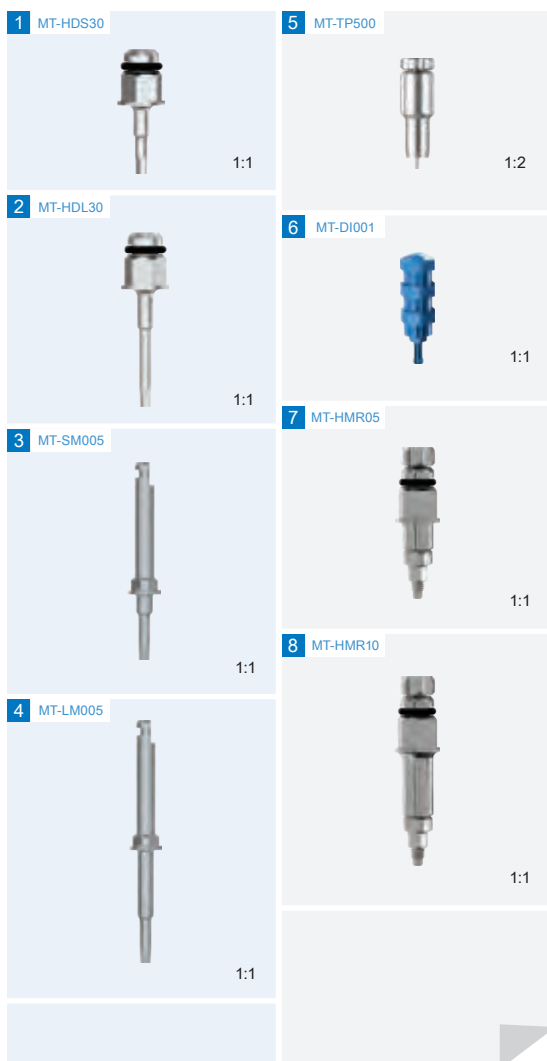

Хирургические инструменты

- | | |
|---|---|
| <p>1 MT-HDS30
Короткая шестигранная отвертка для реверсивного ключа 1,27мм
Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-16мм</p> | <p>5 MT-TP500
Мукотом
Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-28мм
Внутренний Ø 4.5мм</p> |
| <p>2 MT-HDL30
Короткая шестигранная отвертка для реверсивного ключа 1,27мм
Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-22мм</p> | <p>6 MT-DI001
Индикатор направления имплантата
Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-17мм</p> |
| <p>3 MT-SM005
Короткая шестигранная отвертка для микромотора 1,27мм
Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-24мм</p> | <p>7 MT-HMR05
Короткий адаптер для реверсивного ключа с фиксатором
Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-20.5мм</p> |
| <p>4 MT-LM005
Короткая шестигранная отвертка для микромотора 1,27мм
Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-30мм</p> | <p>8 MT-HMR10
Длинный адаптер для реверсивного ключа с фиксатором
Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-25мм</p> |



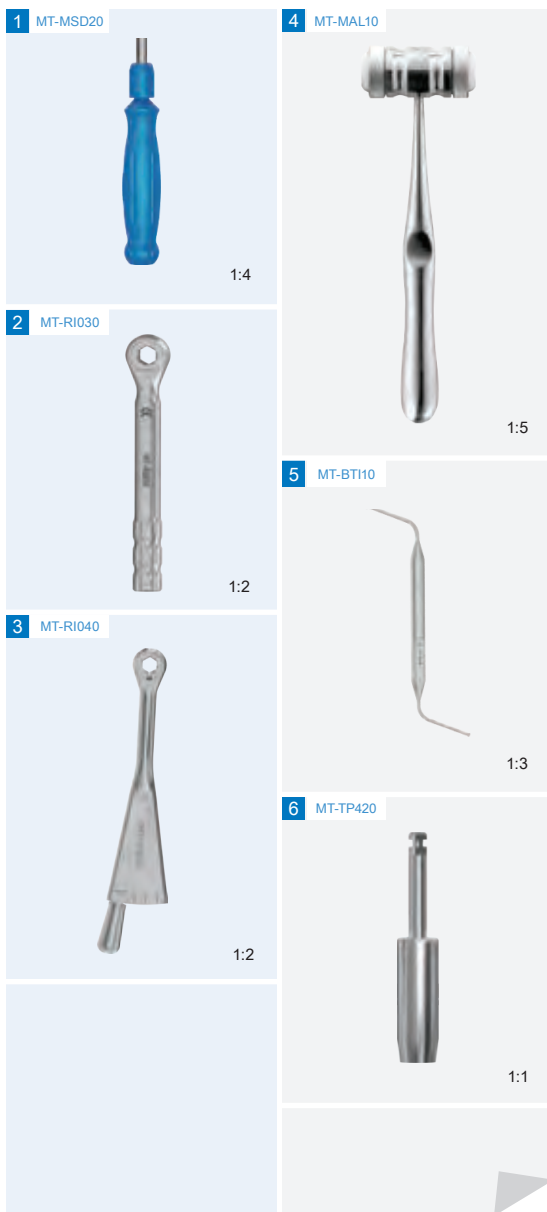

Хирургические инструменты

1 MT-MSD20

Универсальная хирургическая отвертка

Материал: Нержавеющая сталь, алюминий
Размеры: Длина-140мм

4 MT-MAL10

Хирургический молоток с вставками из пластика

Материал: Нержавеющая сталь

2 MT-RI030

Реверсивный ключ (ратчет)

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-75мм

5 MT-BT110

Глубиномер ручной 6/8/10/11.5/13/16мм

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-100мм
Ø1.80мм / Ø2.70мм

3 MT-RI040

Динамометрический ключ

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-108мм

6 MT-TP420

Мукотом

Материал: Нержавеющая сталь
Размеры: Длина-29.5мм
Внутренний Ø4.2мм



»
MT-RI040
Динамометрический ключ

Набор реверсивного ключа

MT-RI050


Компания MIS представляет Вашему вниманию новый премиум-набор реверсивного ключа. Новый реверсивный ключ оснащен удобной эргономичной ручкой и может использоваться со всеми ключами и адаптерами MIS. Ключ исключительно легко собирается и разбирается, что обеспечивает простоту ухода и эксплуатации.





Наборы.

Компания MIS посвятила многие годы сотрудничеству с практикующими имплантологами в целях создания наиболее совершенного хирургического набора, помогающего оптимизировать процедуру имплантации, упрощая стандартные ситуации и позволяя находить креативные решения при различных клинических случаях.

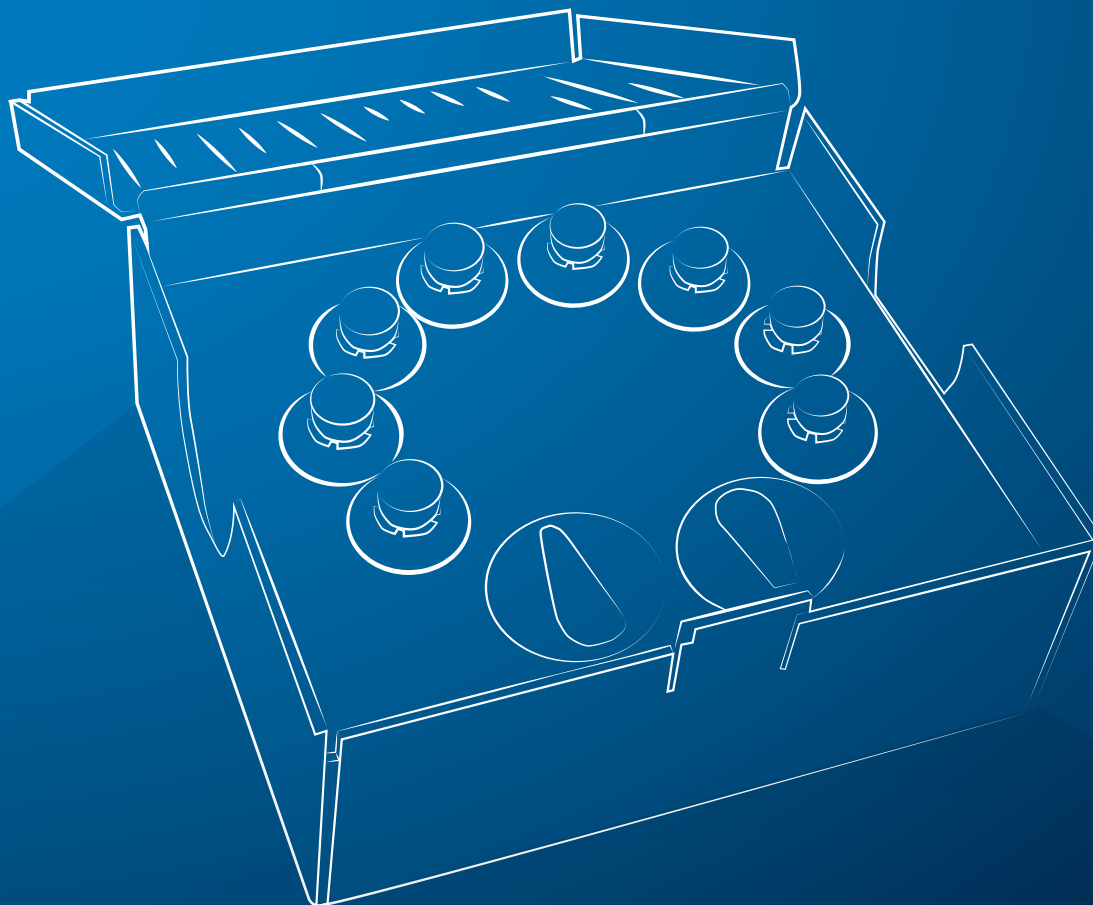

Расширенный набор инструментов для установки имплантатов SEVEN

МК-Е148

Инновационный хирургический набор включает весь необходимый инструментарий для установки имплантатов SEVEN, обеспечивая быстрое и безопасное проведение всех манипуляций. Новый эргономичный дизайн выполнен в соответствии с последовательностью действий при препарировании ложа под имплантат. В состав набора входят фрезы-пилоты различной длины, а также фрезы с цветовой маркировкой, позволяющей быстро визуально ориентироваться при выборе имплантата необходимого диаметра.



МК-Е148

Расширенный набор инструментов для установки имплантатов SEVEN с фрезами с внешним охлаждением.

Содержание набора


Хирургический набор инструментов для установки имплантатов SEVEN с фрезами с внешним охлаждением | **МК-Е148**

Состав набора:




Количество:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 |  | MT-SMD10
Маркирующая пикообразная фреза |
| 1 |  | MT-TDN19
Маркирующая фреза 1.90мм |
| 1 |  | MT-P2406
Фреза-пилот диаметром 2.4мм длиной 6мм |
| 1 |  | MT-P2408
Фреза-пилот диаметром 2.4мм длиной 8мм |
| 1 |  | MT-P2410
Фреза-пилот диаметром 2.4мм длиной 10мм |
| 1 |  | MT-P2411
Фреза-пилот диаметром 2.4мм длиной 11.5мм |
| 1 |  | MT-P2413
Фреза-пилот диаметром 2.4мм длиной 13мм |
| 1 |  | MT-P2416
Фреза-пилот диаметром 2.4мм длиной 16мм |
| 1 |  | MT-TDT28
Фреза формирующая 2.8мм с внешним охлаждением |





Количество:

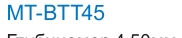- | | | |
|---|---|--|
| 1 |  | MT-TDT32
Фреза формирующая 3.2мм с внешним охлаждением |
| 1 |  | MT-TDT40
Фреза формирующая 4мм с внешним охлаждением |
| 1 |  | MT-TDT45
Фреза формирующая 4.5мм с внешним охлаждением |
| 1 |  | MT-TDT50
Фреза формирующая 5мм с внешним охлаждением |
| 1 |  | MT-BTT24
Глубиномер 2.40мм |
| 1 |  | MT-BTT28
Глубиномер 2.80мм |
| 1 |  | MT-BTT32
Глубиномер 3.20мм |
| 1 |  | MT-BTT40
Глубиномер 4мм |
| 1 |  | MT-BTT45
Глубиномер 4.50мм |

Количество:

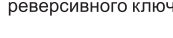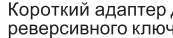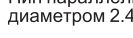- | | | |
|---|--|---|
| 1 |  | MT-BTT50
Глубиномер 5мм |
| 1 |  | MT-GDN33
Профильная фреза для стандартной платформы |
| 1 |  | MT-GDN50
Профильная фреза для широкой платформы |
| 1 |  | MT-NRH10
Длинный адаптер для реверсивного ключа узк. платф. |
| 1 |  | MT-LRH20
Длинный адаптер для реверсивного ключа |
| 1 |  | MT-SRH20
Короткий адаптер для реверсивного ключа |
| 1 |  | MT-PP240
Пин параллельности диаметром 2.40/3мм |
| 1 |  | MD-PF375
Индикатор направления имплантата |

Количество:

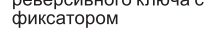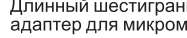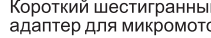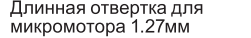- | | | |
|---|---|--|
| 1 |  | MN-PF330
Индикатор направления имплантата, узк. платф. |
| 1 |  | MT-RMR10
Длинный адаптер для реверсивного ключа с фиксатором |
| 1 |  | MT-HL10
Длинный шестигранный адаптер для микромотора |
| 1 |  | MT-HS10
Короткий шестигранный адаптер для микромотора |
| 1 |  | MT-DE001
Удлинитель фрезы |
| 1 |  | MT-RDL30
Длинная отвертка для реверсивного ключа 1.27мм |
| 1 |  | MT-LM005
Длинная отвертка для микромотора 1.27мм |
| 1 |  | MT-RI030
Реверсивный ключ |

Расширенный набор инструментов для установки имплантатов M4

МК-0016

Имплантаты M4 сочетают в себе преимущества цилиндрического и конического дизайна с целью достижения великолепной первичной стабильности при различных клинических ситуациях. Две основные характеристики M4, такие как самонарезание и V-образная резьба с тремя продольными спиральными каналами, обеспечивают легкую установку имплантата даже в кости 1 типа, а плоский агрессивный апекс— необходимое условие для процедуры немедленной имплантации.

МК-0016

Расширенный набор инструментов для установки имплантатов M4



Содержание набора


Расширенный набор инструментов для установки имплантатов M4 | **МК-0016**

Состав набора:

Количество:

- | | |
|---|---|
| 1 |  |
| | MT-SMD10
Маркирующая пикообразная фреза |
| 1 |  |
| | MT-TDN19
Маркирующая фреза 1.90мм |
| 1 |  |
| | MT-P2416
Фреза-пилот диаметром 2.4мм длиной 16мм |
| 1 |  |
| | MT-TDN28
Фреза формирующая 2.8мм с внешним охлаждением |
| 1 |  |
| | MT-TDN32
Фреза формирующая 3.2мм с внешним охлаждением |
| 1 |  |
| | MT-TDN38
Фреза формирующая 3.8мм с внешним охлаждением |
| 1 |  |
| | MT-TDN45
Фреза формирующая 4.5мм с внешним охлаждением |
| 1 |  |
| | MT-TDN50
Фреза формирующая 5мм с внешним охлаждением |
| 1 |  |
| | MT-TDN55
Фреза формирующая 5.5мм с внешним охлаждением |

Количество:

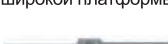- | | |
|---|---|
| 1 |  |
| | MT-DE001
Удлинитель фрезы |
| 1 |  |
| | MT-LRH20
Длинный адаптер для реверсивного ключа |
| 1 |  |
| | MT-SRH20
Короткий адаптер для реверсивного ключа |
| 1 |  |
| | MT-HSI10
Короткий адаптер для микромотора |
| 1 |  |
| | MT-HLI10
Длинный адаптер для микромотора |
| 1 |  |
| | MT-CSN33
Профильная фреза для узкой платформы |
| 1 |  |
| | MT-GDN33
Профильная фреза для стандартной платформы |
| 1 |  |
| | MT-GDN50
Профильная фреза для широкой платформы |
| 1 |  |
| | MT-PP240
Пин параллельности диаметром 2.40/3мм |

Количество:

- | | |
|---|---|
| 1 |  |
| | MT-RMR10
Длинный адаптер для реверсивного ключа с фиксатором |
| 1 |  |
| | MT-RDL30
Длинная отвертка для реверсивного ключа 1.27мм |
| 1 |  |
| | MT-LM005
Длинная отвертка для микромотора 1.27мм |
| 1 |  |
| | MT-RI030
Реверсивный ключ |

Набор фрез для имплантатов M4

МК-0014

В соответствии с принципом "сделай это просто" был создан набор формирующих фрез для имплантатов M4, который дополняет расширенный хирургический набор SEVEN. Комбинируя два этих набора, имплантолог получает весь спектр фрез и инструментов необходимых для работы с имплантатами Seven и M4.



«
МК-0014
Набор фрез для
имплантатов M4

Состав наборов:



MT-TDN28

Фреза формирующая 2.8мм с внешним охлаждением



MT-TDN32

Фреза формирующая 3.2мм с внешним охлаждением



MT-TDN38

Фреза формирующая 3.8мм с внешним охлаждением



MT-TDN45

Фреза формирующая 4.5мм с внешним охлаждением



MT-TDN50

Фреза формирующая 5мм с внешним охлаждением



MT-TDN55

Фреза формирующая 5.5мм с внешним охлаждением



MT-CSN33

Профильная фреза для узкой платформы



MT-GDN33

Профильная фреза для стандартной платформы




MT-GDN50

Профильная фреза для широкой платформы

Набор фрез для сбора кости

МК-BH26

Набор для сбора кости позволяет без усилий, легко и просто собирать костную ткань во время проведения хирургического вмешательства. В наборе представлена революционная система двойного действия для сбора кости во время препарирования костного ложа под имплантат. Собранная кость применяется по назначению, при этом фрезы могут быть использованы в качестве формирующих фрез.

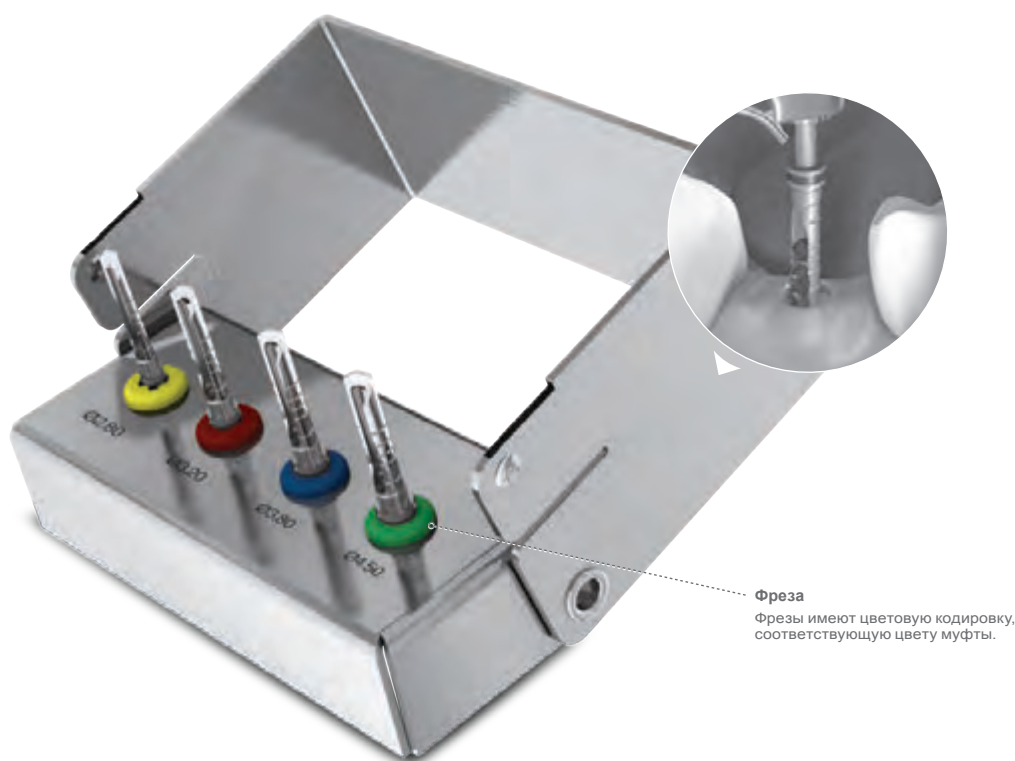

Просто.

Костный материал собирается во внутреннюю часть фрезы в процессе препарирования.

Легко.

Фрезы для сбора костного материала также могут быть использованы в качестве финальных фрез.

Безопасно.

Фрезы из набора для сбора кости могут использоваться со стоперами MIS, обеспечивающими безопасное препарирование костной ткани.

Содержание набора

Набор фрез для сбора кости содержит:

MT-BC280 Ø2.80мм	
MT-BC320 Ø3.20мм	
MT-BC380 Ø3.80мм	
MT-BC450 Ø4.50мм	


i Рекомендуемая скорость вращения: 20-50 об./мин.с минимальным охлаждением.

Во время препарирования костной ткани на погружаемую в нее фрезу оказывается легкое непрерывное давление. При извлечении фрезы из костного ложа ее вращение должно продолжаться для сохранения собранного костного материала внутри пазов. Фрезы не следует использовать более 30 раз.

Наборы стоперов для имплантатов SEVEN, стандартная платформа

MK-BS001

Набор стоперов для фрез, используемых для безопасной установки имплантатов SEVEN стандартной платформы, включает в себя стоперы длиной 8, 10, 11.5 и 13мм.

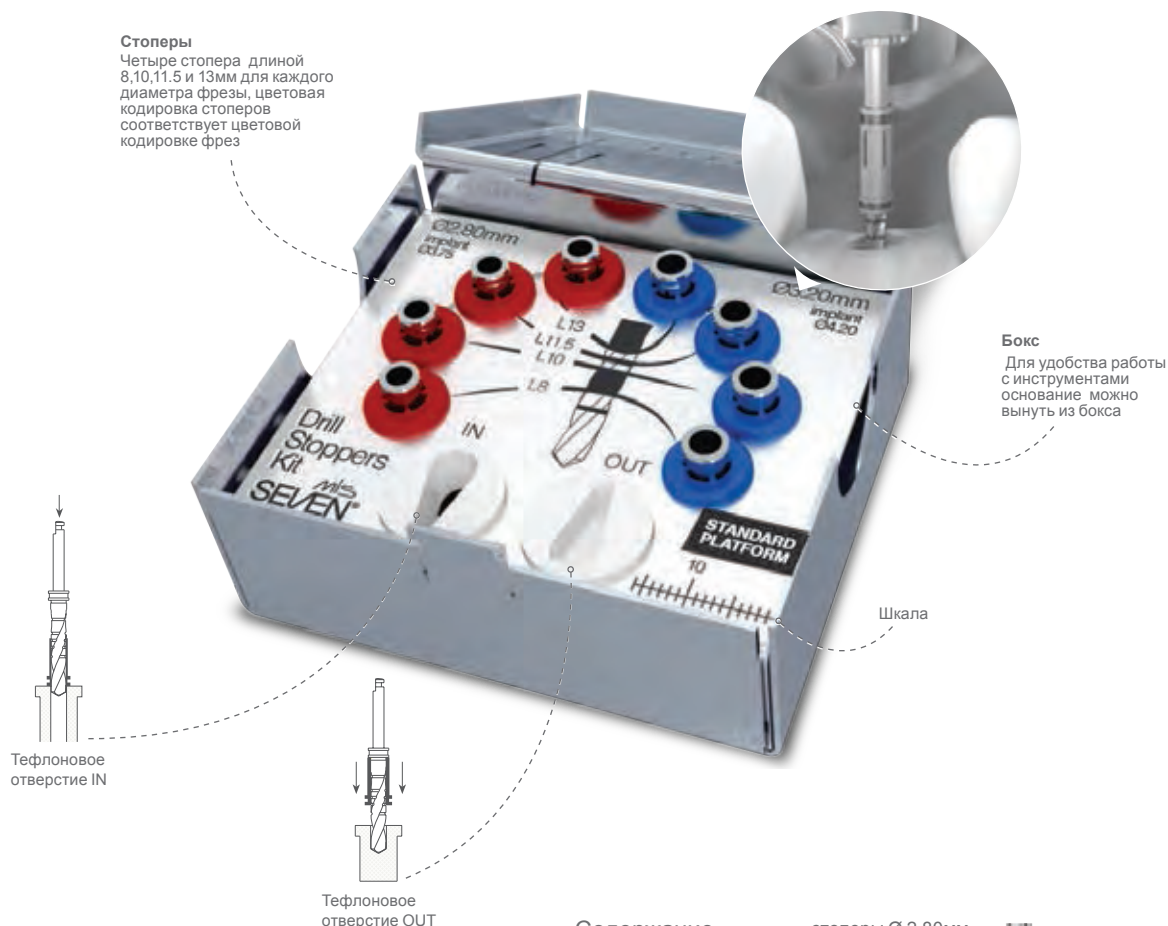

Просто.

Быстрая, легкая сборка

Легко.

Цветовая кодировка для быстрой идентификации диаметра стопера

Безопасно.

Безопасное препарирование костной ткани на желаемую глубину

Точно.

Четко упорядоченные стоперы длиной от 8 до 13мм для фрез диаметрами 2.8мм и 3.2мм.

Содержание набора

стоперы Ø 2.80мм
(для имплантатов Ø 3.75мм)



стоперы Ø 3.20мм
(для имплантатов Ø 4.20мм)



Наборы стоперов для фрез SEVEN (деление по глубине препарирования)

MK-SDS**

Наборы стоперов для фрез SEVEN соответствуют длинам имплантатов MIS, обеспечивая безопасное и простое препарирование костной ткани на желаемую глубину. Компания MIS предлагает 5 наборов стоперов для фрез длиной 6, 8, 10, 11.5 и 13мм.

Стоперы

Пять стоперов для фрез диаметрами 2.8, 3, 2.4, 4.5 и 5мм, цветовая кодировка стоперов соответствует цветовой кодировке фрез

Бокс

Для удобства работы с инструментами основание можно вынуть из бокса

Тефлоновое отверстие IN

Тефлоновое отверстие OUT

Шкала

Желаемая глубина
препарирования
костной ткани

Просто.

Быстрая, легкая сборка

Легко.

Цветовая кодировка для быстрой идентификации диаметра стопера

Безопасно.

Безопасное препарирование костной ткани на желаемую глубину

Точно.

Четко упорядоченные стоперы в соответствии с диаметрами фрез от 2.8мм до 5мм

Содержание набора


Для имплантатов длиной 6мм
MK-SDS06




Для имплантатов длиной 8мм
MK-SDS08



Для имплантатов длиной 10мм
MK-SDS10

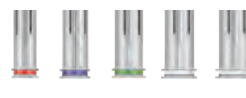

Для имплантатов длиной 11.5мм
MK-SDS11

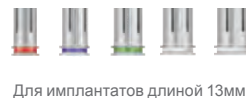

Для имплантатов длиной 13мм
MK-SDS13





Параллелометр Авраами

МК-0011

Параллелометр Авраами позволяет определить точное расстояние между будущими имплантатами, создать имплантологическое ложе для двух и более последовательно расположенных имплантатов, обеспечивая их оптимальное положение, наклон и параллельность. В стандартных клинических случаях набор Авраами может быть использован в качестве простой альтернативы хирургическому шаблону. Несмотря на то, что набор разработан для выполнения хирургических манипуляций, его также можно применять в качестве инструмента для планирования имплантации.

МК-0011
Параллелометр Авраами



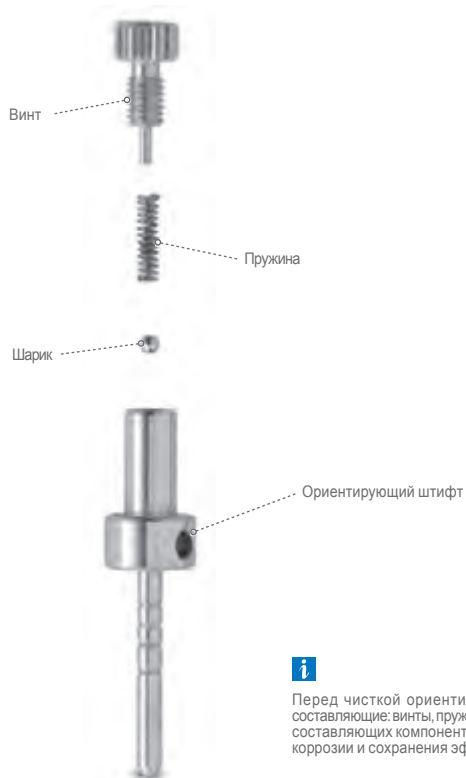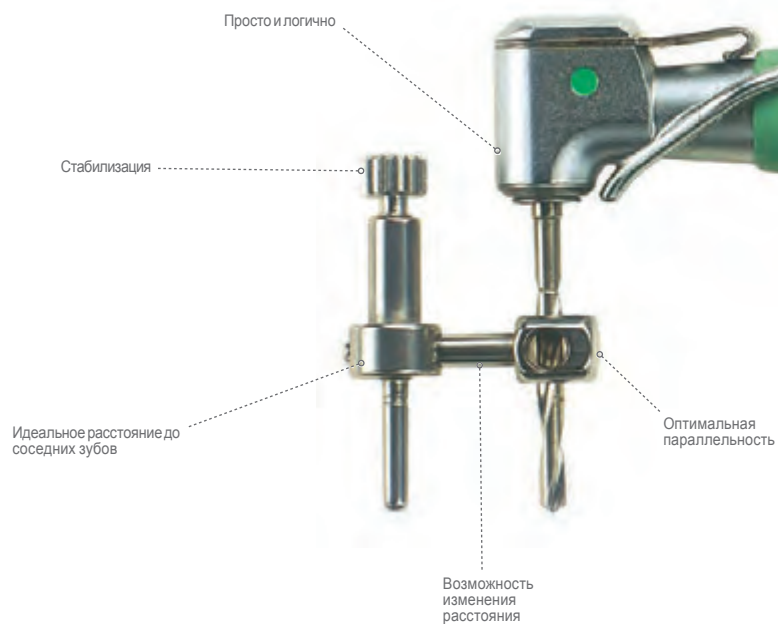

Ориентирующие штифты Ø 2мм



Ориентирующие штифты Ø 2.80мм



Горизонтальные плечи



Пин параллельности 20мм



Перед чисткой ориентирующие штифты следует разобрать на составляющие: винты, пружины, шарики и стержни. Чистка и высушивание составляющих компонентов необходима для исключения появления коррозии и сохранения эффективного функционирования системы.

Компрессионный набор

МК-0020

Компрессионный набор компании MIS предназначен для создания условий, улучшающих первичную стабильность имплантата в кости 3 и 4 типов.



«
МК-0020
Компрессионный
набор



Набор не рекомендован для расширения альвеолярного гребня

Содержание набора

Компрессионный набор | MK-0020

Состав наборов:

Количество:

1 

MT-SMD10
Маркирующая
пикообразная фреза

1 

MT-HS10
Короткий адаптер
для микромотора

1 

MT-HLI10
Длинный адаптер
для микромотора

1 

MT-SHA10
Ручной ключ

1 

MT-SRA10
Адаптер для
реверсивного ключа

1 

MT-RI030
Реверсивный ключ

Количество:

1 

MO-CO160
Выпуклая компрессионная
насадка Ø1.8-Ø2.9мм

1 

MO-CO200
Выпуклая компрессионная
насадка Ø2.3-Ø3.3мм

1 

MO-CO240
Выпуклая компрессионная
насадка Ø2.7-Ø3.7мм

1 

MO-CO280
Выпуклая компрессионная
насадка Ø3.1-Ø4.5мм

Количество:

1 


MO-SO300
Вогнутая насадка для
синус-лифтинга Ø3мм

1 

MO-SO350
Вогнутая насадка для
синус-лифтинга Ø3.5мм

1 

MO-SO400
Вогнутая насадка для
синус-лифтинга Ø4мм

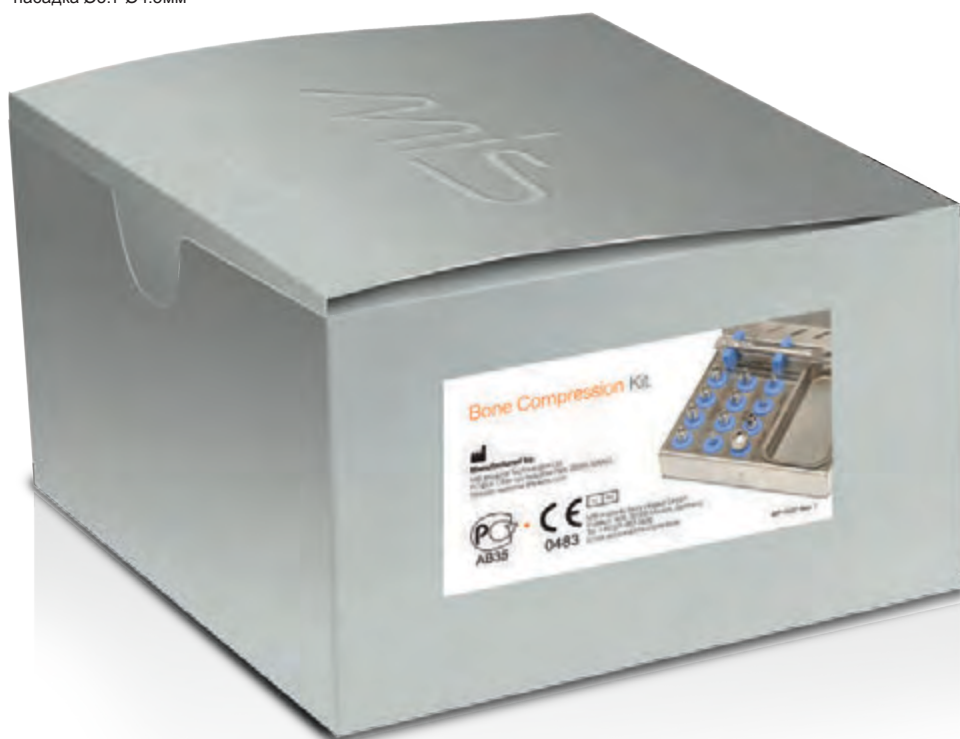

Хирургический набор для установки имплантатов UNO

МК-0036

Имплантаты UNO устанавливаются с помощью специально разработанных хирургических инструментов, соответствующих ортопедической части имплантата. Набор состоит из хирургических фрез, ключей для установки имплантатов и реверсивного ключа.



МК-0036
Хирургический набор для установки имплантатов UNO

Содержание набора

Хирургический набор для установки имплантатов UNO | MK-0036

Состав наборов:

Количество:

- | | |
|---|---|
| 1 |  |
| | MT-SMD10
Маркирующая
пикообразная фреза |
| 1 |  |
| | MT-TDN20
Фреза - пилот 2мм с
внешним охлаждением |
| 1 |  |
| | MT-P2416
Фреза-пилот 2.4мм с
внешним охлаждением |
| 1 |  |
| | MT-TDT30
Фреза формирующая 3мм
с внешним охлаждением |
| 1 |  |
| | MT-BTT20
Глубиномер 2мм |
| 1 |  |
| | MT-BTT24
Глубиномер 2.40мм |
| 1 |  |
| | MT-BTT30
Глубиномер 3мм |

Количество:

- | | |
|---|---|
| 1 |  |
| | MT-UML21
Длинный адаптер для
имплантата UNO под микромотор |
| 1 |  |
| | MT-PP001
Пин параллельности |
| 1 |  |
| | MT-HKL21
Длинный адаптер для
имплантата UNO |

Количество:

- | | |
|---|--|
| 1 |  |
| | MT-HKO21
Ключ для установки
имплантата UNO |
| 1 |  |
| | MT-RI030
Реверсивный ключ |



Ортопедический набор

МК-0039

Набор ортопедических инструментов MIS содержит инструменты, необходимые для проведения ортопедических манипуляций. В состав набора входят динамометрический ключ, ключ для системы Locator, различные шестигранные отвертки MIS и индикаторы направления имплантатов. Кроме того, набор включает усовершенствованную систему держателя абатмента, облегчающую обработку супраструктур.



«
МК-0039
Ортопедический набор

Содержание набора

Ортопедический набор | MK-0039

Состав наборов:

Количество:

- 1  **MM-LSD15**
Короткий адаптер для реверсивного ключа, система Locator
- 1  **MM-LSD21**
Длинный адаптер для реверсивного ключа, система Locator
- 1  **MT-NB225**
Ключ для шаровидного абатмента
- 1  **MT-MUK02**
Отвертка для многокомпонентного абатмента
- 1  **MT-HHR07**
Короткая ручная отвертка 1.27мм
- 1  **MT-HHR13**
Длинная ручная отвертка 1.27мм

Количество:

- 1  **MT-HDS30**
Короткая ответка для реверсивного ключа 1.27мм
- 1  **MT-HDL30**
Длинная ответка для реверсивного ключа 1.27мм
- 4  **MT-DI001**
Индикатор направления имплантата
- 1  **MT-SMK13**
Короткая ответка для микромотора 1.27мм
- 1  **MT-LMK13**
Длинная ответка для микромотора 1.27мм

Количество:

- 1  **MT-US002**
Насадка для держателя абатментов, стандартная платформа
- 1  **MT-UW002**
Насадка для держателя абатментов, широкая платформа
- 1  **MT-IE172**
Экстрактор абатмента с шестигранником
- 1  **MT-IT100**
Ключ для слепочного трансфера закрытой ложки

Количество:

- 1  **MT-RI040**
Динамометрический ключ
- 1  **MM-LCT10**
Универсальный ключ для системы Locator
- 1  **MT-MSD20**
Хирург. отвертка для ввинчивания имплантатов



Набор остеотомов для синус-лифтинга

МК-0023

Набор остеотомов для синус-лифтинга MIS используется для поднятия дна верхнечелюстной пазухи. Набор содержит четыре прямых и четыре изогнутых остеотома. Все инструменты имеют лазерную маркировку глубины 6мм, 11мм и 15мм, а также стоперы, предназначенные для удобства и безопасности проведения процедуры синус-лифтинга.



Состав
набора:

Количество

- | | |
|---|---|
| 1 | MO-SLS20
Прямой остеотом для синус-лифтинга со стопером диаметром 2мм |
| 1 | MO-SLS30
Прямой остеотом для синус-лифтинга со стопером диаметром 3мм |
| 1 | MO-SLS32
Прямой остеотом для синус-лифтинга со стопером диаметром 3.25мм |
| 1 | MO-SLS40
Прямой остеотом для синус-лифтинга со стопером диаметром 4мм |
| 1 | MO-SLA20
Изогнутый остеотом для синус-лифтинга со стопером диаметром 2мм |
| 1 | MO-SLA30
Изогнутый остеотом для синус-лифтинга со стопером диаметром 3мм |
| 1 | MO-SLA32
Изогнутый остеотом для синус-лифтинга со стопером диаметром 3.25мм |
| 1 | MO-SLA40
Изогнутый остеотом для синус-лифтинга со стопером диаметром 4мм |

«
МК-0023
Набор остеотомов для
синус-лифтинга

Набор остеотомов со стоперами

МК-0024

Набор остеотомов MIS со стоперами используется для создания имплантационного ложа с плотными стенками. Также он применим при процедуре закрытого синус-лифтинга. Набор содержит четыре прямых и четыре изогнутых остеотома. Все инструменты имеют лазерную маркировку глубины 6мм, 11мм и 15мм, а также стоперы, предназначенные для удобства и безопасности проведения процедур.



Состав
набора:


Количество

- | | |
|---|--|
| 1 | MO-CBS20
Изогнутый остеотом
диаметром 2мм со
стопером |
| 1 | MO-CBS30
Изогнутый остеотом
диаметром 3мм со
стопером |
| 1 | MO-CBS32
Изогнутый остеотом
диаметром 3.25мм со
стопером |
| 1 | MO-CBS40
Изогнутый остеотом
диаметром 4мм со
стопером |
| 1 | MO-CS200
Прямой остеотом
диаметром 2мм со
стопером |
| 1 | MO-CS300
Прямой остеотом
диаметром 3мм со
стопером |
| 1 | MO-CS325
Прямой остеотом
диаметром 3.25мм со
стопером |
| 1 | MO-CS400
Прямой остеотом
диаметром 4мм со
стопером |



Ортопедические ВОЗМОЖНОСТИ.

Супраструктуры компании MIS специально разработаны для проведения разнообразных ортопедических манипуляций. MIS производит широкий ассортимент абатментов различной длины, с разной высотой и формой уступа и разным углом наклона, предлагая решения для систем протезирования с цементной и винтовой фиксацией. Временные пластиковые абатменты MIS изготавливаются из полиэфирэфиркетона (PEEK), синтетического биосовместимого полимера, характеризующегося высокой механической прочностью и химической инертностью. Абатменты из материала PEEK прекрасно подходят для установки временных реставраций на период до 6 мес. Постоянно пополняя ассортимент супраструктур, компания MIS предлагает новые абатменты с титановой основой, пригодные для использования с системой CAD/CAM. Абатменты с титановой основой могут быть использованы для различных ортопедических решений, поскольку производятся на платформы всех типов, обеспечивая превосходную прочность, надежность и эстетический вид реставраций с опорой на имплантаты.

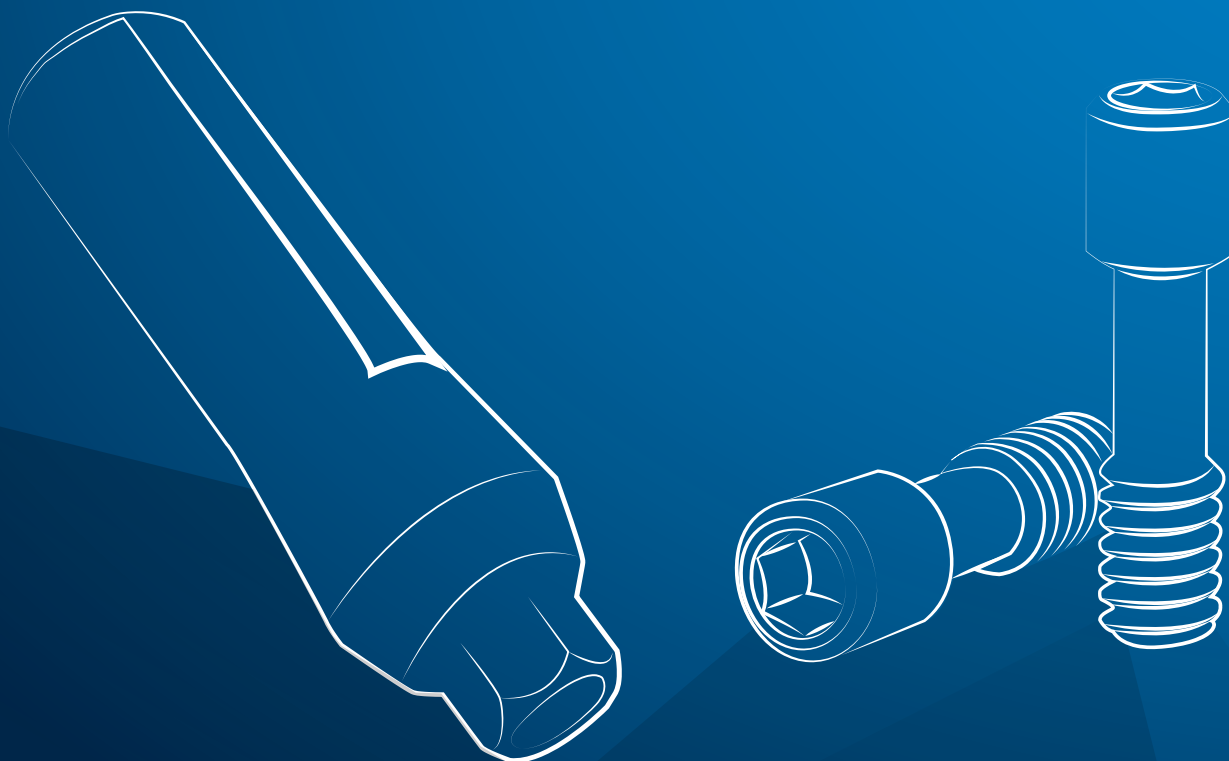



NARROW

Аналоги и слепочные трансферы

1 MN-RSM10

Аналог имплантата,
узкая платф.

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 12мм

5 MN-IT300

Слепочный трансфер для
закрытой ложки, узкая платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 7.8мм

2 MN-IT100

Слепочный трансфер для
закрытой ложки, узкая платф.

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Высота - 9мм

6 MN-I0330

Слепочный трансфер для
открытой ложки, узкая платф.

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Высота - 11мм

3 MN-GP100

Винт слепочного трансфера
для закрытой ложки,
узкая платф.

Материал: Титан
Размеры: Длина - 16.5мм

7 MN-G0160

Винт слепочного трансфера
для открытой ложки,
узкая платф.


Материал: Титан
Размеры: Длина - 21мм

4 MN-PF330

Слепочная головка,
узкая платф.

Материал: Титан
Размеры: Длина - 11мм

MN-IT300
Слепочный трансфер для
закрытой ложки, узкая платф.

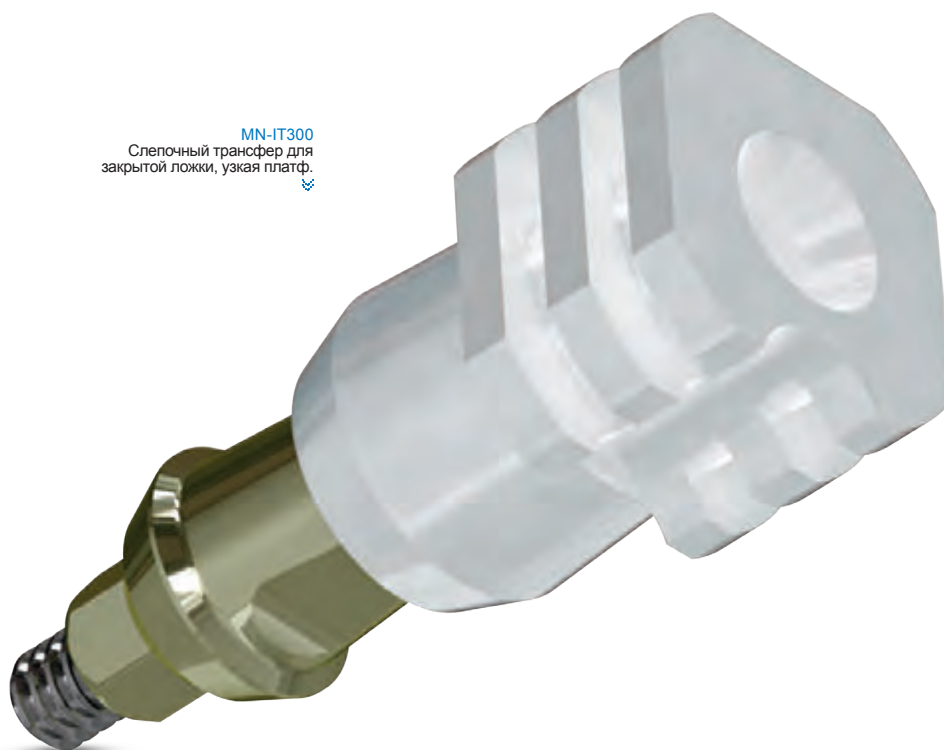



NARROW

NPK -
Ортопедический сет

МК-NPK61

1 MN-CPK61

Анатомический трансгингивальный абатмент, высота уступа 1мм, длина 6мм, узкая платф.

2 MN-RSM60

Аналог абатмента, длина 6мм, узкая платф.

3 MN-CHC60

Формирующий пластиковый колпачок, длина 6мм, узкая платф.

4 MN-IC600

Пластиковый колпачок слепочного трансфера закрытой ложки, узкая платф.

5 MN-IC040

Выжигаемый пластиковый колпачок, узкая платф.

6 MN-ICH40

Выжигаемый пластиковый колпачок с анти-ротационным компонентом, узкая платф.



МК-NPK61

Ортопедический сет,
высота уступа 1мм, длина
6мм, узк. платф.

NARROW

НРК - Ортопедический сет



C=4мм H=1, 2, 3, 4мм

C=6мм H=1, 2, 3, 4мм

Комплектация:

МК-НРК41

Ортопедический сет, высота уступа 1мм, длина абатмента 4мм, узкая платф.

МК-НРК42

Ортопедический сет, высота уступа 2мм, длина абатмента 4мм, узкая платф.

МК-НРК43

Ортопедический сет, высота уступа 3мм, длина абатмента 4мм, узкая платф.

МК-НРК44

Ортопедический сет, высота уступа 4мм, длина абатмента 4мм, узкая платф.

МК-НРК61

Ортопедический сет, высота уступа 1мм, длина абатмента 6мм, узкая платф.

МК-НРК62

Ортопедический сет, высота уступа 2мм, длина абатмента 6мм, узкая платф.

МК-НРК63

Ортопедический сет, высота уступа 3мм, длина абатмента 6мм, узкая платф.

МК-НРК64

Ортопедический сет, высота уступа 4мм, длина абатмента 6мм, узкая платф.

C=Длина абатмента

H=Высота уступа

« Трансгингивальный абатмент, узкая платф.

MN-CPK41*

MN-CPK42*

MN-CPK43*

MN-CPK44*

C=4мм
H=1, 2, 3, 4мм

MN-CPK61*

MN-CPK62*

MN-CPK63*

MN-CPK64*

C=6мм
H=1, 2, 3, 4мм



*Абатменты СРК можно приобрести отдельно. Все абатменты СРК поставляются с выжигаемым пластиковым колпачком с антиротационным компонентом MN-ICH40



NARROW

Прямая система протезирования с винтовой фиксацией

1 MN-CP013

Пластиковый абатмент без
шестигранника, узкая платф.

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: Высота - 11мм
Диаметр - 3.50мм

4 MN-S0160

Ортопедический винт,
узкая платф.

Материал: Титан
Размеры: Длина - 7.6мм
30 Нсм

2 MN-CPH13

Пластиковый абатмент с
шестигранником, узкая платф.

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: Высота - 11мм
Диаметр - 3.50мм

5 MN-GP010

Пластиковый абатмент
с основой из сплава без
шестигранника, узкая платф.

Материал: Выжигаемый пластик + сплав
Размеры: Высота - 15.5мм
Диаметр - 4.50мм

3 MN-TPA12

Временный пластиковый
абатмент с узким
профилем, узкая платф.

Материал: Пластик
Размеры: Высота - 11мм
Диаметр - 3.50мм

6 MN-GPC10

Пластиковый абатмент
с основой из сплава с
шестигранником, узкая платф.

Материал: Выжигаемый пластик + сплав
Размеры: Высота - 15.5мм
Диаметр - 4.50мм



"Функциональная высота" всех абатментов измеряется
от посадочной платформы и не включает в себя
высоту шестигранника.

Примечание: Абатменты из материала PEEK являются радиолоцентными!



NARROW

Система протезирования с цементной фиксацией

- 1 MN-MAC10**
Стандартный абатмент,
узкая платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 11мм

- 3 MN-S0160**
Ортопедический винт,
узкая платф.

Материал: Титан
Размеры: Длина - 7.6мм
30 Нсм

- 2 MN-AN020**
Угловой абатмент 20°,
узкая платф.


Материал: Титан
Размеры: Высота - 8мм

- 4 MN-TPA10**
Временный пластиковый
абатмент, узкая платф.

Материал: Пластик
Размеры: Высота - 11мм
Диаметр - 4мм



»
MN-TPA10
Временный пластиковый
абатмент, узкая платф.

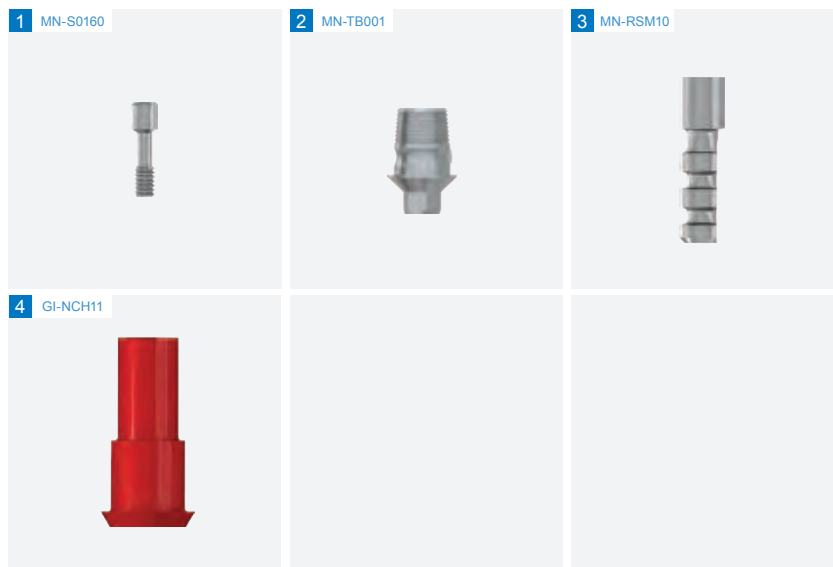

NARROW

Набор TI-BASE для CAD/CAM систем

С шестигранником
в основании | **МК-TBN4**
(с антиротационным
компонентом)

1 MN-S0160
Ортопедический винт, узкая платф.

2 MN-TB001
Титановая платформа для
CAD/CAM систем, узкая платф.

3 MN-RSM10
Аналог имплантата, узкая платф.

4 GI-NCH11
Выдвигаемый пластиковый колпачок с
антиротационным компонентом для
титановой платформы.



«
МК-TBN4
Комплект титановой
платформы для CAD/CAM
систем, узкая платф.

Сканируемый
абатмент




MN-SP001
Абатмент для сканирования,
узкая платф.



MN-S0160
Ортопедический винт, узкая платф.



Только для
лабораторного
использования!

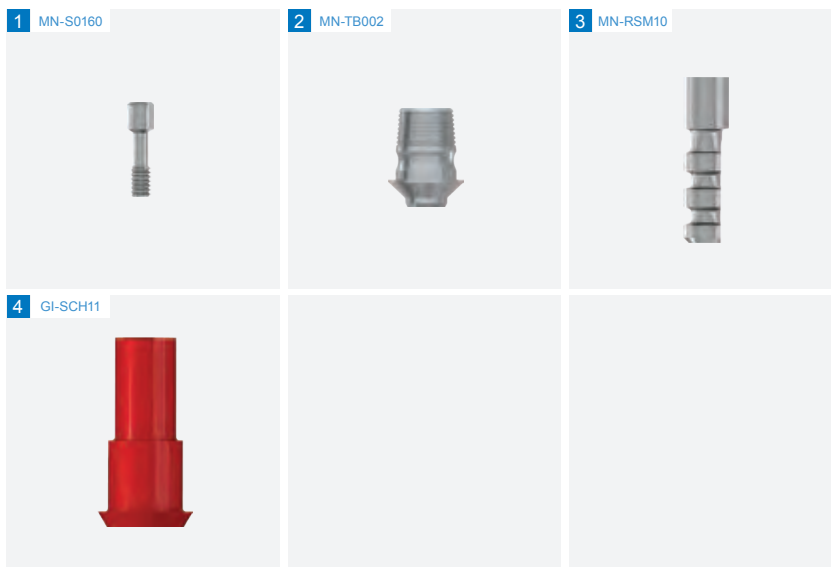

NARROW

Набор TI-BASE для CAD/CAM систем

Без шестигранника | **МК-MUN4**
в основании
(без антиротационного
компонента)

- 1 **MN-S0160**
Ортопедический винт,
узкая платф.
- 2 **MN-TB002**
Титановая платформа для
CAD/CAM систем , узкая платф.
- 3 **MN-RSM10**
Аналог имплантата,
узкая платф.
- 4 **GI-SCH11**
Выжигаемый пластиковый колпачок с
антиротационным компонентом для
титановой платформы.



« **МК-MUN4**
Комплект титановой
платформы для CAD/CAM
систем , узкая платф.

Сканируемый
абатмент



MN-SP001
Абатмент для сканирования,
узкая платф.



MN-S0160
Ортопедический винт, узкая платф.



Только для
лабораторного
использования!



NARROW

Система многокомпонентного абатмента

1 MU-IT480

Слепочный трансфер для закрытой ложки для системы многокомпонентного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 8мм

4 MT-NB225

Ключ для прямого многокомпонентного абатмента и шаровидного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 22мм

2 MU-I0480

Слепочный трансфер для открытой ложки для системы многокомпонентного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 22мм

5 MT-NMK02

Ключ для углового многокомпонентного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 22мм

3 MU-RSM48

Аналог многокомпонентного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 12мм



MT-NMK02

Ключ для углового многокомпонентного абатмента



NARROW

Система многокомпонентного абатмента

- | | |
|---|--|
| <p>1 MA-N1480
Многокомпонентный абатмент, высота 1мм, узкая платф.</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Высота - 1мм
30-35 Нсм</p> | <p>8 MU-CP048
Пластиковый цилиндр для системы многокомпонентного абатмента</p> <p>Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: Длина - 10мм</p> |
| <p>2 MA-N2480
Многокомпонентный абатмент, высота 2мм, узкая платф.</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Высота - 2мм
30-35 Нсм</p> | <p>9 MU-T0480
Временный титановый цилиндр для системы многокомпонентного абатмента</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Длина - 10мм</p> |
| <p>3 MA-N3480
Многокомпонентный абатмент, высота 3мм, узкая платф.</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Высота - 3мм
30-35 Нсм</p> | <p>10 MU-MG480
Пластиковый цилиндр с основой из сплава для многокомпонентного абатмента</p> <p>Материал: Выжигаемый пластик + сплав
Размеры: Длина - 14.5мм</p> |
| <p>4 MA-N4480
Многокомпонентный абатмент, высота 4мм, узкая платф.</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Высота - 4мм
30-35 Нсм</p> | <p>11 MU-BGC48
Основа из сплава для многокомпонентного абатмента</p> <p>Материал: Сплав
Размеры: Длина - 3.3мм</p> |
| <p>5 MU-H4480
Формирователь десны для системы многокомпонентного абатмента</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Длина - 3.3мм</p> | <p>12 MU-S0220
Ортопедический винт для системы многокомпонентного абатмента</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Длина - 3.8мм
25 Нсм</p> |
| <p>6 MU-CC480
Титановое основание для CAD/CAM системы многокомпонентного абатмента</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Длина - 3.3мм</p> | <p>13 MU-G0220
Ортопедический винт для системы многокомпонентного абатмента</p> <p>Материал: Сплав
Размеры: Длина - 3.8мм
20 Нсм</p> |
| <p>7 MU-SP001
Сканируемый абатмент для системы многокомпонентного абатмента</p> <p>Материал: Пластик
Размеры: Длина - 10мм</p> | |

1 MN-S0160



2 MN-IN060



3 MM-SIZW6



NARROW

Циркониевые абатменты

Набор индивидуального углового циркониевого абатмента 15° для резца, узкая платф. | MK-NIZ6

1 MN-S0160


Ортопедический винт стандартный

2 MN-IN060

Эстетический Ti абатмент для резца, узкая платф.

3 MM-SIZW6

Циркониевый колпачок, стандартная/узкая платформы

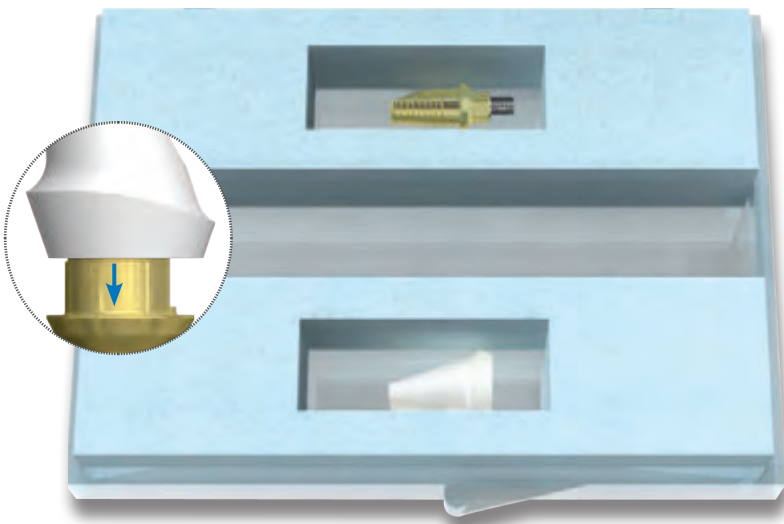

1 MN-S0160



2 MN-CIZ60



NARROW

Циркониевые абатменты


Набор индивидуального углового вклеенного циркониевого абатмента 15° для резца, узкая платф. | MK-NIC6

1 MN-S0160

Ортопедический винт стандартный

2 MN-CIZ60

Абатмент TiZi для резца, узкая платф.

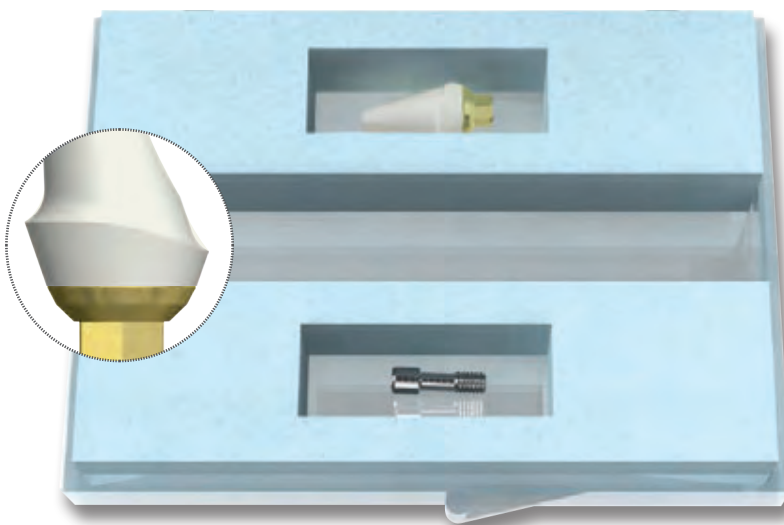

NARROW

Наборы циркониевых абатментов



» Набор углового циркониевого абатмента 15° для резца, узкая платф.

« Набор углового вклеенного циркониевого абатмента 15° для резца, узкая платф.


Комплектация:

МК-NIZ6

Набор углового циркониевого абатмента 15° для резца, узкая платф.

МК-NIC6

Набор углового вклеенного циркониевого абатмента 15° для резца, узкая платф.

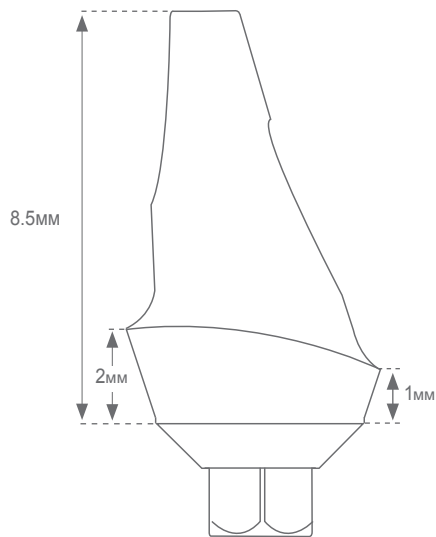

Все циркониевые абатменты поставляются вместе со стандартным ортопедическим винтом(MN-S0160).



NARROW

Система шаровидного абатмента

- 1 MB-N2330**
Шаровидный абатмент, высота уступа 2мм, узкая платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 2мм

- 9 MB-PR010**
Пластиковая втулка
- Материал: Пластик
Размеры: Длина - 2мм
Диаметр - 3.8мм

- 2 MB-N3330**
Шаровидный абатмент, высота 3мм, узкая платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 3мм

- 10 MB-TBS10**
Стандартная пружинка для титановой матрицы

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Диаметр - 2.5мм

- 3 MB-N4330**
Шаровидный абатмент, высота 4мм, узкая платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 4мм

- 11 MB-TBS20**
Мягкая пружинка для титановой матрицы
- Материал: Нерж. сталь
Размеры: Диаметр - 2.6мм

- 4 MT-NB225**
Ключ для шаровидного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 22мм

- 12 MT-TSD10**
Отвертка для титановой матрицы

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 60мм

- 5 MB-RS375**
Аналог шаровидного абатмента
- Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 15.1мм

- 13 MB-DMH10**
Двойной комплект матриц

- 6 MB-SF200**
Пластиковая матрица

Материал: Пластик
Размеры: Длина - 3.5мм

- 14 MB-PPC10**
Мягкая пластиковая втулка для металлической матрицы

Материал: Пластик
Размеры: Длина - 2.6мм
Сила удержания 1200-1300 г

- 7 MB-GPS10**
Матрица из сплава
- Материал: Сплав
Размеры: Длина - 2.4мм

- 15 MB-PPR10**
Стандартная пластиковая втулка для металлической матрицы
- Материал: Пластик
Размеры: Длина - 2.6мм
Сила удержания 800-950 г

- 8 MB-TTP10**
Титановая матрица
- Материал: Титан
Размеры: Длина - 3.1мм

- 16 MB-DB235**
Пластиковое защитное кольцо для шаровидного абатмента
- Материал: Пластик
Размеры: Диаметр - 15мм



«
MB-N2330
Шаровидный абатмент, высота уступа 2мм, узкая платф.



Шаровидный абатмент подходит ко всем имплантатам MIS с внутр. шестигр. и узкой платформой



NARROW

Система абатментов Locator

1 MB-NZL00

Locator абатмент, высота 0мм, узкая платф.

Материал: Титан/ Нитрид титана
Размеры: Высота - 0мм

8 MM-LCT10

Универсальный ключ для системы Locator

Материал: Нерж. сталь/ Титан/ Нитрид титана

2 MB-NZL01

Locator абатмент, высота 1.0мм, узкая платф.

Материал: Титан/ Нитрид титана
Размеры: Высота - 1мм

9 MM-LMP02

Комплект матриц для системы Locator

Материал: Нерж. сталь/ Нейлон
Размеры: Длина - 1.80мм

3 MB-NZL02

Locator абатмент, высота 2.0мм, узкая платф.

Материал: Титан/ Нитрид титана
Размеры: Высота - 2мм

10 MM-LIC10

Слепочный трансфер для системы Locator

Материал: Алюминий/Полиэтилен
Размеры: Длина - 4.50мм
Диаметр - 4.70мм

4 MB-NZL03

Locator абатмент, высота 3.0мм, узкая платф.

Материал: Титан/ Нитрид титана
Размеры: Высота - 3мм

11 MM-LFA40

Аналог диаметром 4мм для системы Locator

Материал: Алюминий
Размеры: Длина - 10.40мм
Диаметр - 4мм

5 MB-NZL04

Locator абатмент, высота 4.0мм, узкая платф.

Материал: Титан/ Нитрид титана
Размеры: Высота - 4мм

6 MB-NZL05


Locator абатмент, высота 5.0мм, узкая платф.

Материал: Титан/ Нитрид титана
Размеры: Высота - 5мм

7 MB-NZL06

Locator абатмент, высота 6.0мм, узкая платф.


Материал: Титан/ Нитрид титана
Размеры: Высота - 6мм

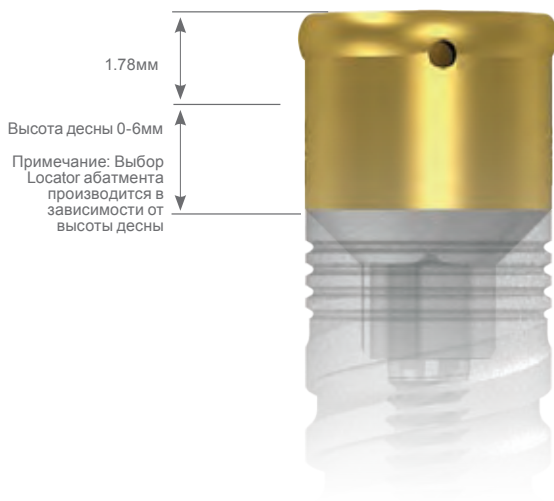

MB-NZL03
Locator абатмент высота 3.0мм, узкая платф.



Locator абатмент подходит ко всем имплантатам с внутр. шестигр. и узкой платформой.

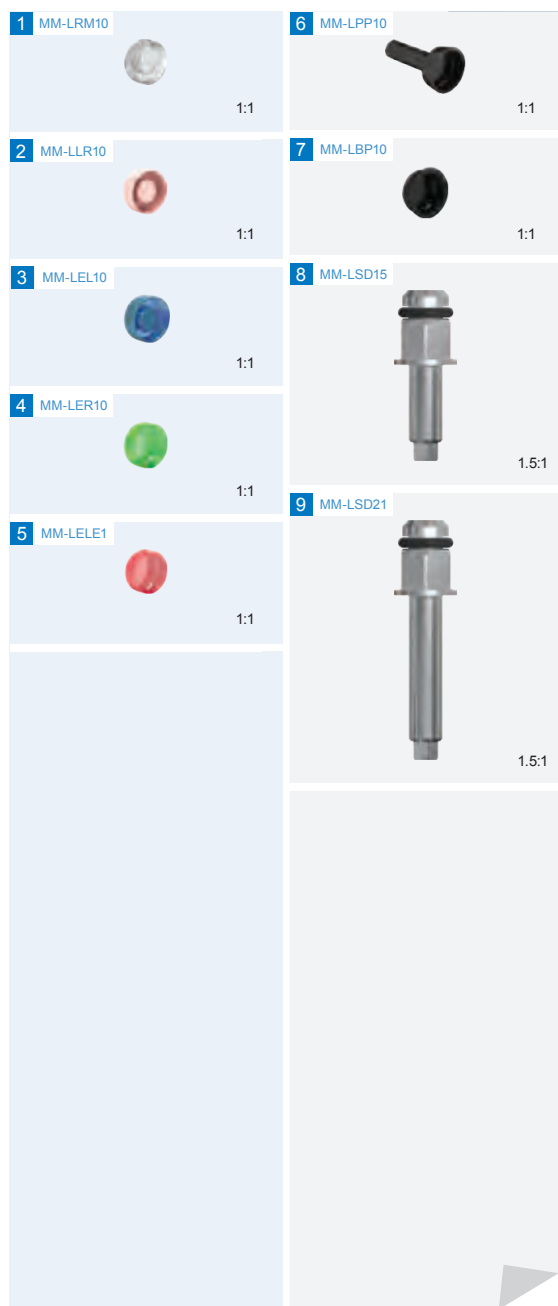

NARROW

Система аттачментов Locator

1 MM-LRM10

Прозрачная матрица
Locator 0°-10°, 2.27 кг**

Материал: Нейлон
Размеры: Длина - 1.80мм
Диаметр - 4.70мм

6 MM-LPP10

Пин параллельности
к системе Locator

Материал: Черный полиэтилен
Размеры: Длина - 15мм
Диаметр - 4.60мм

2 MM-LLR10

Розовая матрица
Locator light 0°-10°, 1.36 кг**

Материал: Розовый нейлон
Размеры: Длина - 1.80мм
Диаметр - 4.70мм

7 MM-LBP10

Черная техническая матрица

Материал: Черный полиэтилен
Размеры: Длина - 1.80мм
Диаметр - 4.60мм

3 MM-LEL10

Синяя матрица
Locator 0°-10°, 0.68 кг**

Материал: Синий нейлон
Размеры: Длина - 1.80мм
Диаметр - 4.70мм

8 MM-LSD15

Короткий адаптер для
реверсивного ключа к
системе Locator

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 15мм

4 MM-LER10

Зеленая матрица
Locator 10°-20°, 1.36-1.82 кг**

Материал: Зеленый нейлон
Размеры: Длина - 1.80мм
Диаметр - 4.70мм

9 MM-LSD21

Длинный адаптер для
реверсивного ключа к
системе Locator

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 21мм

5 MM-LELE1

Красная матрица
Locator 10°-20°, 0.68 кг**


Материал: Красный нейлон
Размеры: Длина - 1.80мм
Диаметр - 4.70мм



* Угол отклонения имплантата от вертикальной оси

**Сила удержания



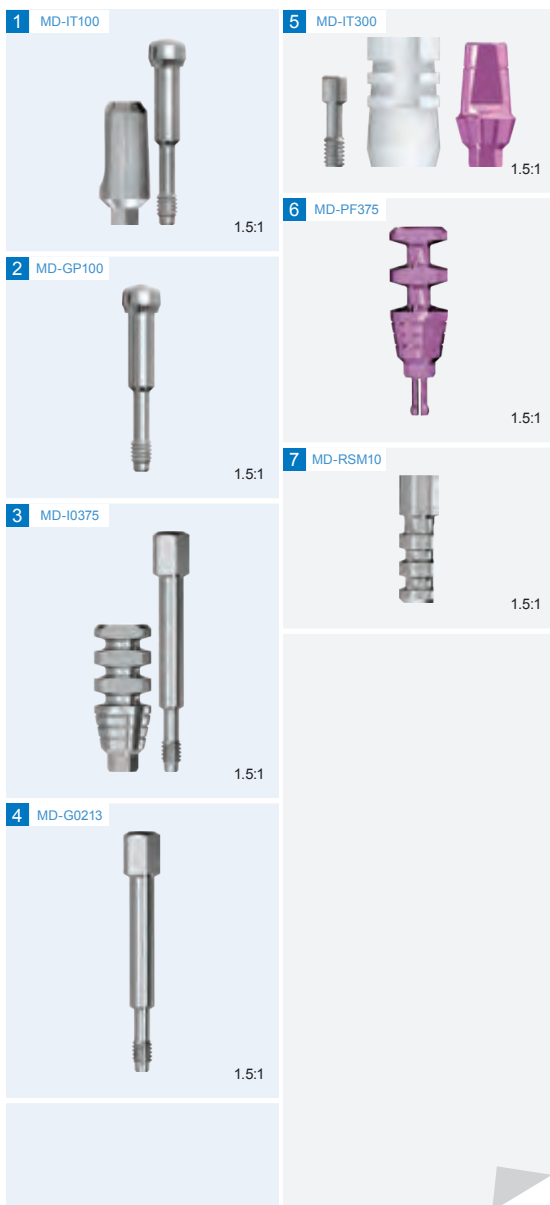

STANDARD

Аналоги и слепочные трансферы

- 1 MD-IT100**
Слепочный трансфер для закрытой ложки, станд. платф.

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Высота - 9мм

- 5 MD-IT300**
Слепочный трансфер для закрытой ложки, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 8мм

- 2 MD-GP100**
Винт слепочного трансфера для закрытой ложки

Материал: Титан
Размеры: Длина - 16.5мм

- 6 MD-PF375**
Слепочная головка, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 11мм

- 3 MD-I0375**
Слепочный трансфер для открытой ложки, станд. платф.


Материал: Нерж. сталь
Размеры: Высота - 11мм

- 7 MD-RSM10**
Аналог имплантата, станд. платф.

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 12мм

- 4 MD-G0213**
Винт слепочного трансфера для открытой ложки

Материал: Титан
Размеры: Длина - 21.3мм

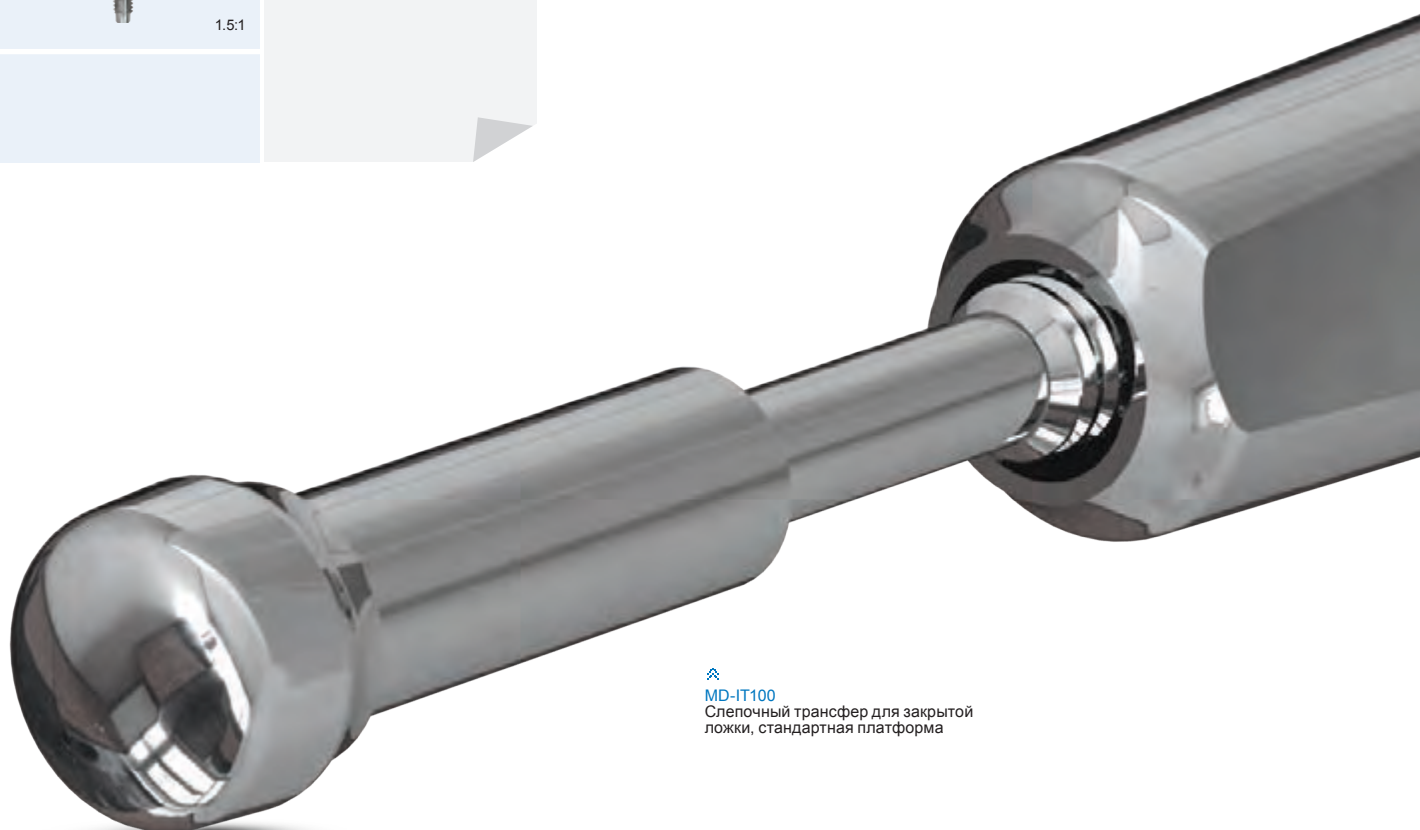

MD-IT100
Слепочный трансфер для закрытой ложки, стандартная платформа



STANDARD

CPK -
Ортопедический сет

МК-CPK61



1 **MD-CPK61**
Анатомический трансгингивальный абатмент, высота уступа 1мм, длина 6мм, станд. платф.

2 **MD-RSM60**
Аналог абатмента, длина 6мм, станд. платф.

3 **MM-CHC60**
Пластиковый формирующий колпачок, длина 6мм, станд. платф.

4 **MD-IC800**
Слепочный колпачок трансфера закрытой ложки, длина 8мм, станд. платф.

5 **MD-IC040**
Выжигаемый пластиковый колпачок без антиротационного компонента, станд. платф.

6 **MD-ICH40**
Выжигаемый пластиковый колпачок с антиротационным компонентом, станд. платф.



МК-CPK61
Ортопедический сет, высота уступа 1мм, длина 6мм, стандартная платформа

STANDARD

СРК - Ортопедический сет

Комплектация:



- | | |
|----------------------|--|
| C=4мм H=1, 2, 3, 4мм | МК-СРК41
Ортопедический сет, высота уступа 2мм, длина абатмента 4мм, станд. платф. |
| | МК-СРК42
Ортопедический сет, высота уступа 2мм, длина абатмента 4мм, станд. платф. |
| | МК-СРК43
Ортопедический сет, высота уступа 3мм, длина абатмента 4мм, станд. платф. |
| | МК-СРК44
Ортопедический сет, высота уступа 4мм, длина абатмента 4мм, станд. платф. |
| C=6мм H=1, 2, 3, 4мм | МК-СРК61
Ортопедический сет, высота уступа 1мм, длина абатмента 6мм, станд. платф. |
| | МК-СРК62
Ортопедический сет, высота уступа 2мм, длина абатмента 6мм, станд. платф. |
| | МК-СРК63
Ортопедический сет, высота уступа 3мм, длина абатмента 6мм, станд. платф. |
| | МК-СРК64
Ортопедический сет, высота уступа 4мм, длина абатмента 6мм, станд. платф. |
| C=8мм H=1, 2, 3, 4мм | МК-СРК81
Ортопедический сет, высота уступа 1мм, длина абатмента 8мм, станд. платф. |
| | МК-СРК82
Ортопедический сет, высота уступа 2мм, длина абатмента 8мм, станд. платф. |
| | МК-СРК83
Ортопедический сет, высота уступа 3мм, длина абатмента 8мм, станд. платф. |
| | МК-СРК84
Ортопедический сет, высота уступа 4мм, длина абатмента 8мм, станд. платф. |

C=Длина абатмента
H=Высота уступа

« Анатомический транспингивальный абатмент, станд. платф.

MD-СРК41*
MD-СРК42*
MD-СРК43*
MD-СРК44*


C=4мм
H=1, 2, 3, 4мм

MD-СРК61*
MD-СРК62*
MD-СРК63*
MD-СРК64*

C=6мм
H=1, 2, 3, 4мм

MD-СРК81*
MD-СРК82*
MD-СРК83*
MD-СРК84*

C=8мм
H=1, 2, 3, 4мм

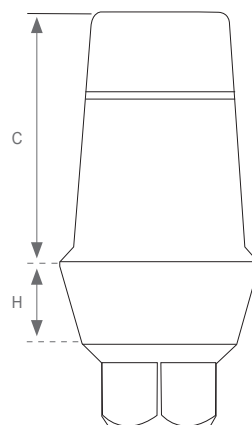

Все абатменты СРК можно приобрести отдельно. Все они поставляются с выдвигаемым пластиковым колпачком с антиротационным компонентом MD-ICF40



STANDARD

Прямая система протезирования
с винтовой фиксацией

1 MD-TCH13 Временный титановый абатмент, станд. платф. Материал: Титан Размеры: Высота - 11мм	8 MD-GPC10 Пластиковый абатмент с основой из сплава с шестигранником, станд. платф. Материал: Выжигаемый пластик + сплав Размеры: Высота - 15мм Диаметр - 5.0мм
2 MD-TPH50 Временный пластиковый абатмент, станд. платф. Материал: Пластик Размеры: Высота - 12мм Диаметр - 5мм	9 MD-TPA12 Временный пластиковый абатмент с узким профилем, станд. платф. Материал: Пластик Размеры: Высота - 11мм Диаметр - 3.75мм
3 MD-CP013 Пластиковый абатмент без шестигр., станд. платф. Материал: Выжигаемый пластик Размеры: Высота - 11мм Диаметр - 3.75мм	10 MD-G0220 Ортопедический винт из сплава Материал: Сплав Размеры: Длина - 7.70мм 20 Нсм
4 MD-CP050 Широкий пластиковый абатмент без шестигр., станд. платф. Материал: Выжигаемый пластик Размеры: Высота - 11мм Диаметр - 5мм	11 MD-S0200 Ортопедический винт мини Материал: Титан Размеры: Длина - 6.90мм 30 Нсм
5 MD-CPH13 Пластиковый абатмент с шестигранником, станд. платф. Материал: Выжигаемый пластик Размеры: Высота - 11мм Диаметр - 3.75мм	12 MD-S0220 Ортопедический винт стандартный Материал: Титан Размеры: Длина - 7.60мм 30 Нсм
6 MD-CPH50 Широкий пластиковый абатмент с шестигранником, станд. платф. Материал: Выжигаемый пластик Размеры: Высота - 11мм Диаметр - 5мм	13 MD-S0222 Ортопедический винт средний Материал: Титан Размеры: Длина - 12мм 30 Нсм
7 MD-GP010 Пластиковый абатмент с основой из сплава без шестигр., станд. платф. Материал: Выжигаемый пластик + сплав Размеры: Высота - 15мм Диаметр - 5мм	14 MD-S0224 Ортопедический винт длинный Материал: Титан Размеры: Длина - 14мм 30 Нсм



"Функциональная высота" всех абатментов измеряется от посадочной платформы и не включает в себя высоту шестигранника.

Примечание: Абатменты из материала PEEK являются радиолюцентными!



STANDARD

Система протезирования с цементной фиксацией

1 MD-A0010

Эстетический абатмент, высота уступа 1мм, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 9мм

5 MD-MACF1

Титановый абатмент фрикционного типа с переключением платформ, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 11мм
Диаметр - 4.80мм

2 MD-P0030

Эстетический абатмент, высота уступа 3мм, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 11мм

6 MD-MAC10

Стандартный абатмент, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 11мм
Диаметр - 4.75мм

3 MD-CTP10

Конический абатмент, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 8.5мм
Диаметр - 3.75мм

7 MD-WMAC1

Широкий титановый абатмент, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 11мм
Диаметр - 5.50мм

4 MD-TPA10

Временный пластиковый абатмент, станд. платф.

Материал: Пластик
Размеры: Высота - 11мм
Диаметр - 4.75мм



MD-TPA10

Временный пластиковый абатмент, стандартная платформа



STANDARD

Прямая система протезирования
с цементной фиксацией

1 MD-A1510

Эстетический угловой
абатмент 15°, высота
уступа 1мм, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 9мм

7 MD-G0220

Ортопедический винт
из сплава

Материал: Сплав
Размеры: Длина - 7.70мм
20 Нсм

2 MD-A2510

Эстетический угловой
абатмент 25°, высота
уступа 1мм, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 9мм

8 MD-S0200

Ортопедический
винт мини

Материал: Титан
Размеры: Длина - 6.90мм
30 Нсм

3 MD-AN151

Угловой абатмент 15°
стандартный, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 9мм

9 MD-S0220

Ортопедический винт
стандартный

Материал: Титан
Размеры: Длина - 7.60мм
30 Нсм

4 MD-AN251

Угловой абатмент 25°
стандартный, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 8.5мм

10 MD-S0222

Ортопедический
винт средний

Материал: Титан
Размеры: Длина - 12мм
30 Нсм

5 MD-P1530

Эстетический угловой
абатмент 15°, высота
уступа 3мм, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 11мм

11 MD-S0224

Ортопедический
винт длинный

Материал: Титан
Размеры: Длина - 14мм
30 Нсм

6 MD-P2530

Эстетический угловой
абатмент 25°, высота уступа
3мм, станд. платф.


Материал: Титан
Размеры: Высота - 11мм



"Функциональная высота" всех абатментов измеряется от посадочной платформы и не включает в себя высоту шестигранника.



Эстетические
прямые абатменты

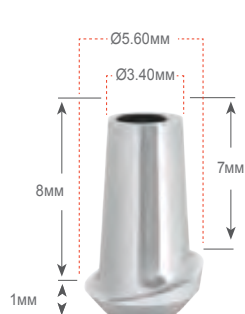


MD-A0010




MD-P0030

Эстетические угловые
абатменты 15°

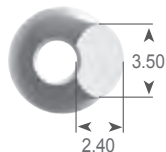


MD-A1510

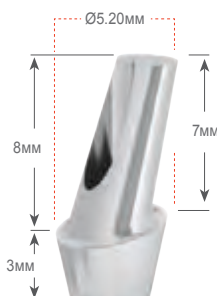


MD-P1530

Угловые абатменты 15°

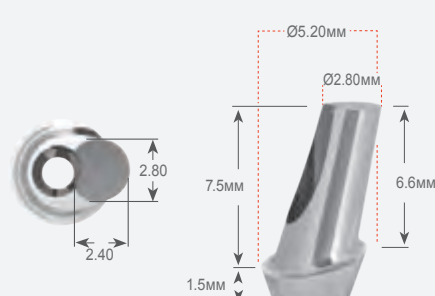


MD-AN151

Эстетические угловые
абатменты 25°

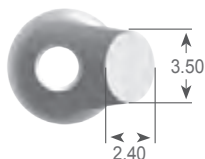


MD-A2510

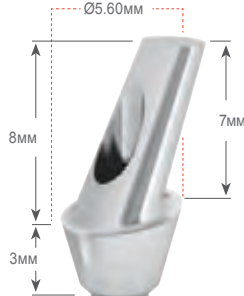


MD-P2530

Угловые абатменты 25°

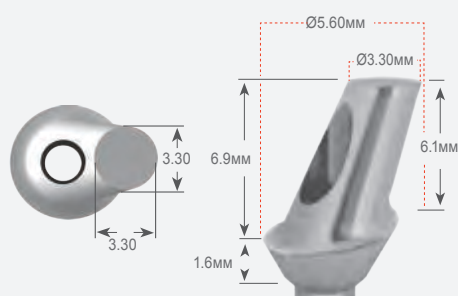

MD-AN251


Стандартные абатменты

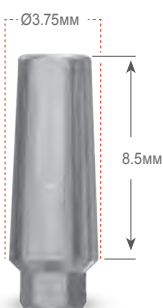

MD-CTP10




MD-MAC10

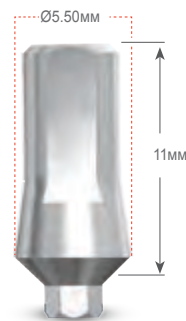

MD-WMAC1



MD-MACF1

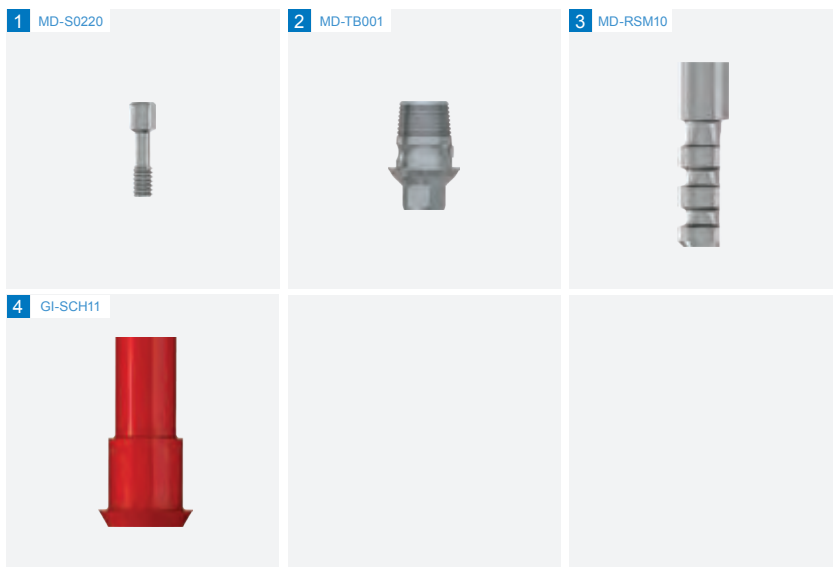

STANDARD

Набор TI-BASE
для CAD/CAM
систем

С шестигранником
в основании | MK-TBS4
(с антиротационного
компонентом)

- 1 **MD-S0220**
Ортопедический винт
стандартный
- 2 **MD-TB001**
Титановая платформа с шестигр. для систем
CAD/CAM, станд. платф.
- 3 **MD-RSM10**
Аналог имплантата, станд. платф.
- 4 **GI-SCH11**
Выжигаемый пластиковый колпачок с
антиротационным компонентом для
титановой платформы.



«
MK-TBS4
Набор титановой платформы для
CAD/CAM систем для одиночных
реставраций, станд. платф.

Сканируемый
абатмент



MD-SP001
Абатмент для сканирования,
станд. платф.



MD-S0220
Ортопедический винт
стандартный



Только для
лабораторного
использования!

1 MD-S0220



2 MD-TB002



3 MD-RSM10



4 GI-SCH11



STANDARD

Набор TI-BASE для CAD/CAM систем

Без шестигранника
в основании | MK-MUS4

(без антиротационного
компонента)

1 MD-S0220

Ортопедический винт
стандартный

2 MD-TB002

Титановая платформа с шестигранником,
станд. платф.

3 MD-RSM10

Аналог имплантата, станд. платф.

4 GI-SCH11

Выжигаемый пластиковый колпачок с
антиротационным компонентом для
титановой платформы.



Без шестигр.

«
MK-MUS4

Набор титановой платформы
для CAD/CAM систем
для многокомпонентной
реставрации, станд. платф.

Сканируемый
абатмент



MD-SP001

Абатмент для сканирования,
станд. платф.



MD-S0220

Ортопедический винт
стандартный



Только для
лабораторного
использования!

Наборы OT Equator

Лабораторное применение:

Матрица

OT Equator колпачок черный

Клиническое применение:

Матрица

Экстра мягкая ретенция (желтая)
Матрица OT Equator(0.6 кг)
OE-RCY01

Мягкая ретенция (розовая)
Матрица OT Equator(1.2 кг)
OE-RCP01

Мягкая ретенция (белая)
Матрица OT Equator(1.8 кг)
OE-RCW01

Высокая ретенция (фиолетовая)
Матрица OT Equator(2.7 кг)
OE-RCV01

Комплектация:

MK-SOE1

OT Equator комплект, высота 1мм,
станд. платф.

MK-SOE2

OT Equator комплект, высота
2мм, станд. платф.

MK-SOE3

OT Equator комплект, высота 3мм,
станд. платф.

MK-SOE4

OT Equator комплект, высота
4мм, станд. платф.

MK-SOE5

OT Equator комплект, высота
5мм, станд. платф.

H=1, 2, 3, 4, 5мм



Каждая матрица системы
Equator может быть приобретена
отдельно.



Инструменты для OT Equator

MT-LM005

Длинная шестигранная отвертка 1,27мм для микромотора



MT-SM005

Короткая шестигранная отвертка 1,27мм для микромотора



MT-SRA10

Адаптер для ратчета



MT-SHA10

Ручной ключ



OE-RSM60

Аналог OT Equator



OE-IC001

Колпачок слепочного трансфера OT Equator




OE-IC002

Слепочный трансфер OT Equator








ET-IT001

Ручной ключ для OT Equator

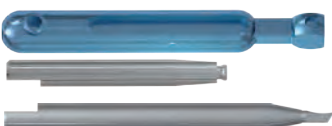

OT Equator абатменты

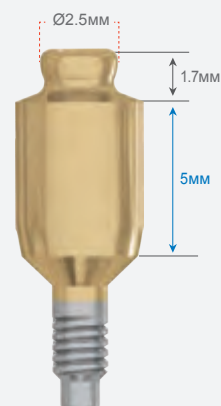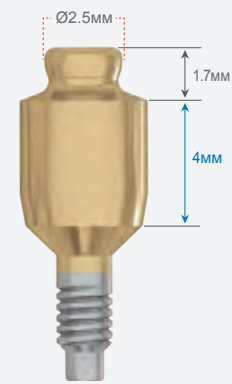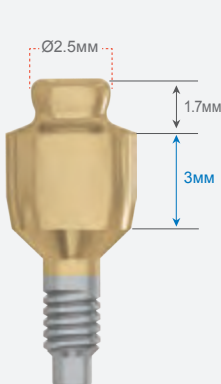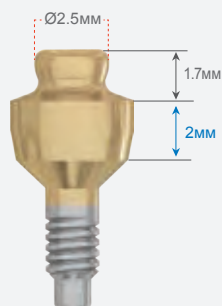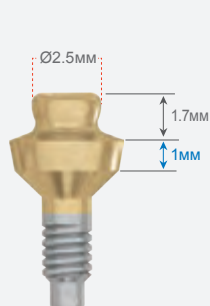

1 MD-S0220



2 MD-IN060



3 MM-SIZW6



STANDARD

Циркониевые абатменты

Набор индивидуального углового циркониевого абатмента 15° для резца, станд. платф. | MK-SIZ6

1 MD-S0220


Ортопедический винт стандартный

2 MD-IN060

Эстетический Ti абатмент для резца, станд. платф.

3 MM-SIZW6

Циркониевый колпачок для резца, стандартная/узкая платформы

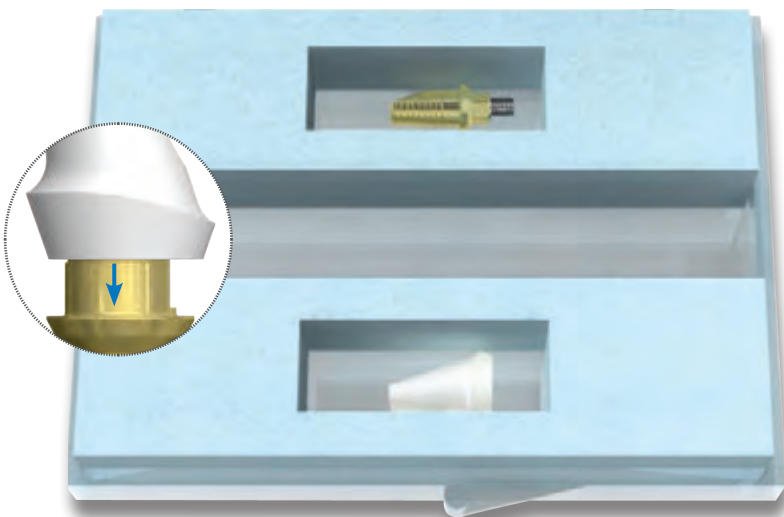

1 MD-S0220



2 MD-CIZ60



STANDARD

Циркониевые абатменты


Набор индивидуального углового клеенного циркониевого абатмента 15° для резца, станд. платф. | MK-SIC6

1 MD-S0220

Ортопедический винт стандартный

2 MD-CIZ60

Абатмент TiZr для резца, станд. платф.

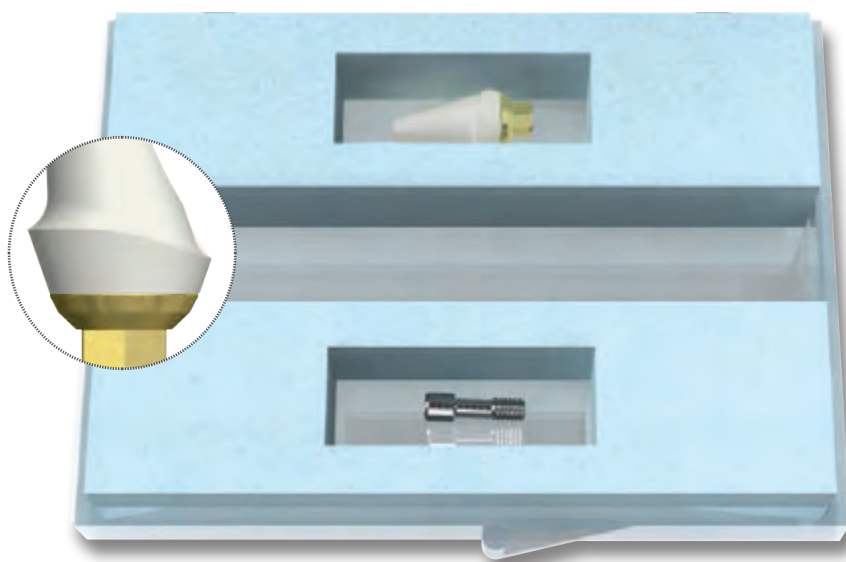

STANDARD

Наборы циркониевых абатментов



Комплектация:

MK-SIC6


Набор индивидуального
углового вклеенного
циркониевого абатмента 15°
для резца, станд. платф.

MK-SIZ6

Набор индивидуального углового
циркониевого абатмента 15° для
резца, станд. платф.

«
Набор индивидуального углового
вклеенного циркониевого абатмента
15° для резца, станд. платф.

»
Набор
индивидуального
углового циркониевого
абатмента 15° для
резца, станд. платф.

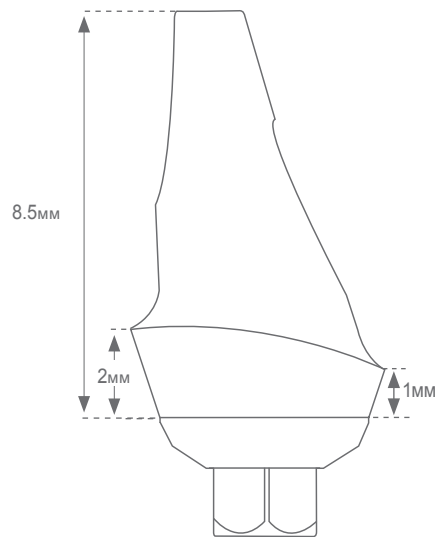

Все циркониевые абатменты поставляются вместе со стандартным ортопедическим винтом(MD-S0220).

1 MD-S0220



2 MD-PM040




3 MM-SPZW4



STANDARD

Циркониевые абатменты

Набор индивидуального циркониевого абатмента для премоляра, станд. платф. | MK-SPZ4

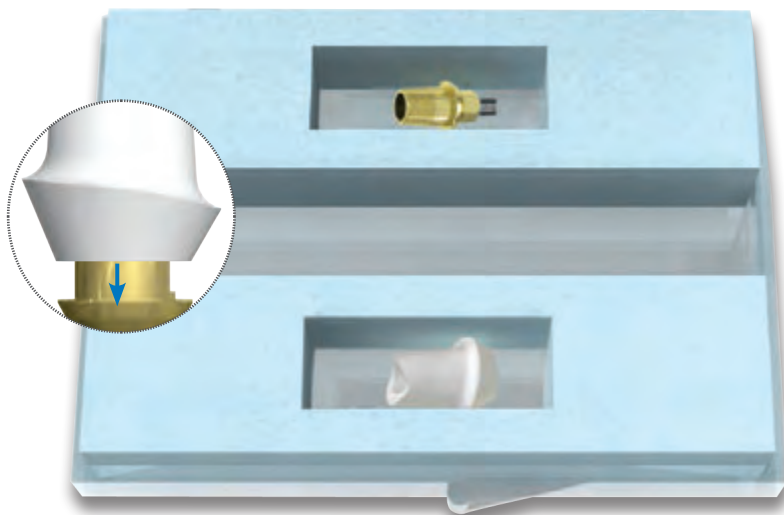

1 MD-S0220

Ортопедический винт стандартный

2 MD-PM040

Эстетический Ti абатмент для премоляра, станд. платф.

3 MM-SPZW4

Циркониевый колпачок титанового абатмента для премоляра, станд. платф.

1 MD-S0220



2 MD-CPZ40



STANDARD

Циркониевые абатменты

Набор индивидуального вклеенного циркониевого абатмента для премоляра, станд. платф. | MK-SPC4



1 MD-S0220

Ортопедический винт стандартный

2 MD-CPZ40

Абатмент TiZi для премоляра, станд. платф.

STANDARD

Наборы циркониевых абатментов

Комплектация:

МК-SPZ4


Набор индивидуального циркониевого абатмента для премоляра, станд. платф.

МК-SPC4

Набор индивидуального вклеенного циркониевого абатмента для премоляра, станд. платф.

« Набор индивидуального вклеенного циркониевого абатмента для премоляра, станд. платф.

» Набор индивидуального циркониевого абатмента для премоляра, станд. платф.

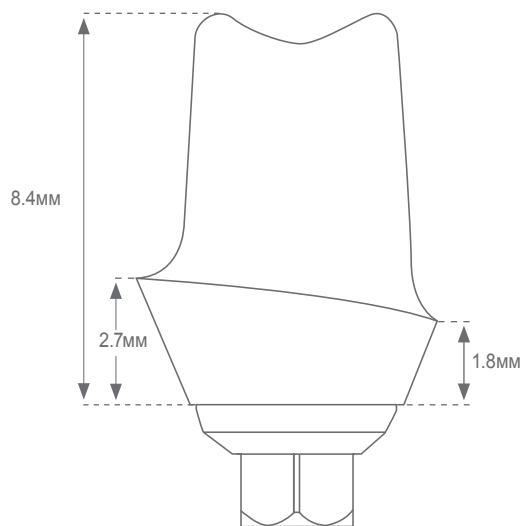

Все циркониевые абатменты поставляются вместе со стандартным ортопедическим винтом (MD-S0220).



STANDARD

Система многокомпонентного абатмента

1 MU-IT480

Слепочный трансфер для закрытой ложки для системы многокомпонентного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 8мм

4 MT-NB225

Ключ для прямого многокомпонентного абатмента и шаровидного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 22мм

2 MU-I0480

Слепочный трансфер для открытой ложки для системы многокомпонентного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 22мм

5 MT-NMK02

Ключ для углового многокомпонентного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 22мм

3 MU-RSM48

Аналог многокомпонентного абатмента

Материал: Нерж. сталь

« **MT-NB225**

Ключ для прямого многокомпонентного абатмента и шаровидного абатмента



STANDARD

Система многокомпонентного абатмента

1 MA-S1480

Многокомпонентный абатмент, высота 1мм, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 1мм
30-35 Нсм

9 MU-CP048

Пластиковый цилиндр для системы многокомпонентного абатмента

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: Длина - 10мм

2 MA-S2480

Многокомпонентный абатмент, высота 2мм, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 2мм
30-35 Нсм

10 MU-T0480

Временный титановый цилиндр для системы многокомпонентного абатмента

Материал: Титан
Размеры: Длина - 10мм

3 MA-S3480

Многокомпонентный абатмент, высота 3мм, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 3мм
30-35 Нсм

11 MU-MG480

Пластиковый цилиндр с основой из сплава для многокомпонентного абатмента

Материал: Выжигаемый пластик + сплав
Размеры: Длина - 14.5мм

4 MA-S4480

Многокомпонентный абатмент, высота 4мм, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 4мм
30-35 Нсм

12 MU-BGC48

Основа из сплава для многокомпонентного абатмента

Материал: Сплав
Размеры: Длина - 3.3мм

5 MA-S5480

Многокомпонентный абатмент, высота 5мм, станд. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 5мм
30-35 Нсм

13 MU-S0220

Ортопедический винт для системы многокомпонентного абатмента

Материал: Титан
Размеры: Длина - 3.8мм
25 Нсм

6 MA-SA171

Многокомпонентный угловой абатмент 17° с шестигранником станд. платф.

Материал: Титан

14 MU-G0220

Ортопедический винт для системы многокомпонентного абатмента

Материал: Сплав
Размеры: Длина - 3.8мм
20 Нсм

7 MA-SA301

Многокомпонентный угловой абатмент 30° с шестигранником станд. платф.

Материал: Титан

15 MU-CC480

Титановое основание для CAD/CAM системы многокомпонентного абатмента

Материал: Титан
Размеры: Длина - 3.3мм

8 MU-H4480

Формирователь десны для системы многокомпонентного абатмента

Материал: Титан
Размеры: Длина - 3.3мм

16 MU-SP001

Сканируемый абатмент для системы многокомпонентного абатмента


Материал: Пластик
Размеры: Длина - 10 мм




MA-SA171

Многокомпонентный угловой абатмент 17° с шестигранником


Многокомпонентный абатмент

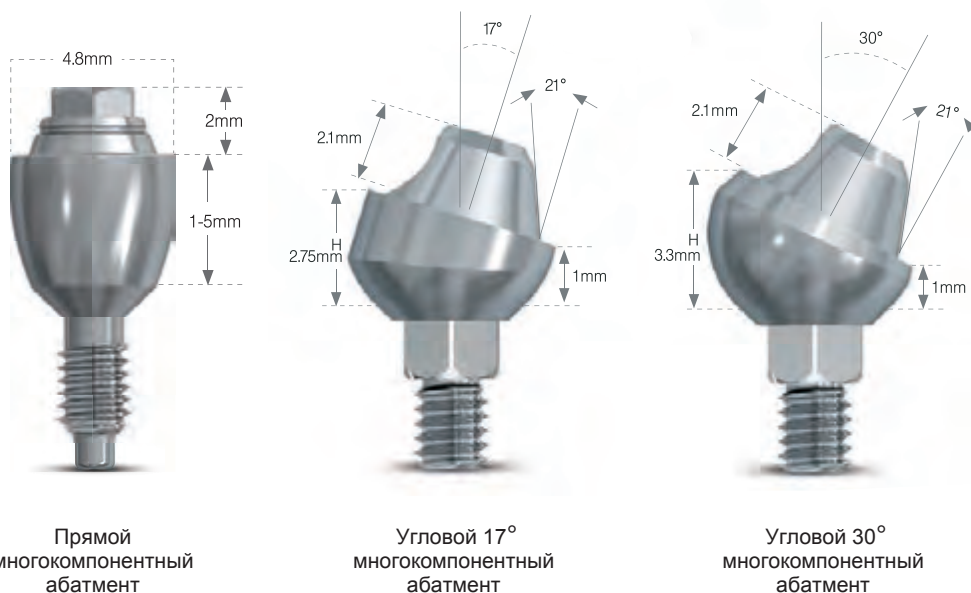


Возможности системы компенсировать углы расхождения между имплантатами

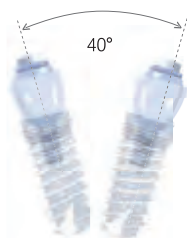

Прямой многокомпонентный абатмент позволяет компенсировать угол расхождения между имплантатами максимум до 40°.

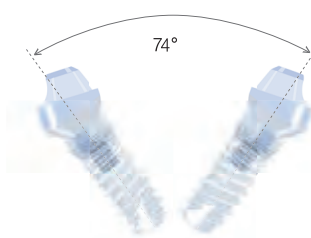

Многокомпонентный абатмент 17° позволяет компенсировать угол расхождения между имплантатами максимум до 74°.

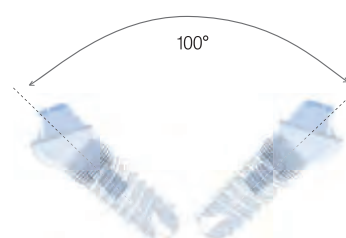

Многокомпонентный абатмент 30° позволяет компенсировать расхождение между имплантатами максимум до 100°.

Процедура

Прямой многокомпонентный абатмент

Установите прямой многокомпонентный абатмент на имплантат с помощью пластикового держателя. Зафиксируйте абатмент специальным ключом (MT-NB225). Рекомендуемое усилие при закручивании 30 Нсм.

Угловой многокомпонентный абатмент

Установите угловой многокомпонентный абатмент (17°/30°) на имплантат с помощью металлического держателя. Зафиксируйте абатмент в нужном положении специальным ключом (MT-NMK02) при помощи ортопедического винта через отверстие в пластиковом держателе. Рекомендуемое усилие при закручивании 30 Нсм.






STANDARD

Шаровидные абатменты

- | | |
|---|--|
| <p>1 MB-N1375
Шаровидный абатмент высота 1мм, станд. платф.</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Высота - 1мм</p> | <p>6 MB-AN152
Угловой шаровидный абатмент 15°</p> <p>Материал: Титан</p> |
| <p>2 MB-N2375
Шаровидный абатмент высота 2мм, станд. платф.</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Высота - 2мм</p> | <p>7 MB-AN252
Угловой шаровидный абатмент 25°</p> <p>Материал: Титан</p> |
| <p>3 MB-N3375
Шаровидный абатмент высота 3мм, станд. платф.</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Высота - 3мм</p> | <p>8 MB-RS375
Аналог шаровидного абатмента</p> <p>Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 15.1мм</p> |
| <p>4 MB-N4375
Шаровидный абатмент высота 4мм, станд. платф.</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Высота - 4мм</p> | <p>9 MT-NB225
Ключ для шаровидного абатмента</p> <p>Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 22мм</p> |
| <p>5 MB-N5375
Шаровидный абатмент высота 5мм, станд. платф.</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Высота - 5мм</p> | |

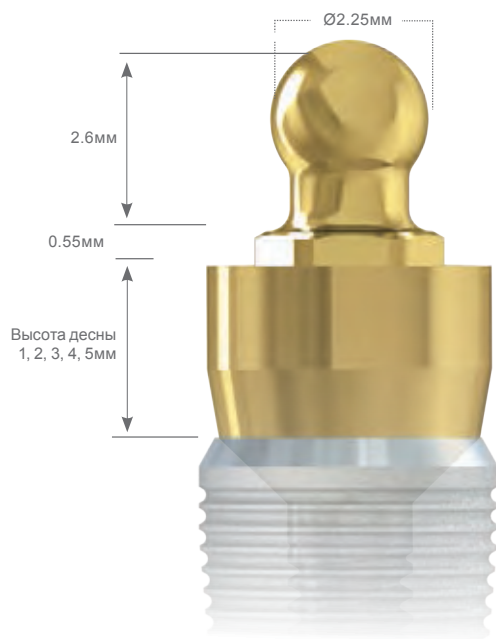

«
MB-N3375
Шаровидный абатмент , высота 3мм

i Шаровидный абатмент подходит ко всем имплантатам MIS с внутр. шестигр. и стандартной платформой.



STANDARD

Угловые шаровидные абатменты

1 MB-SF200

Пластиковая матрица

Материал: Пластик
Размеры: Длина - 3.5мм

7 MT-TSD10

Отвертка для титановой матрицы

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 60мм

2 MB-GPS10

Матрица из сплава

Материал: Сплав
Размеры: Длина - 2.4мм

8 MB-DMH10

Двойной комплект матриц

3 MB-TTP10

Титановая матрица

Материал: Титан
Размеры: Длина - 3.1мм

9 MB-PPC10

Мягкая пластиковая втулка для металлической матрицы

Материал: Пластик
Размеры: Длина - 2.6мм
Сила удержания 1200-1300 г

4 MB-PR010

Пластиковая втулка

Материал: Пластик
Размеры: Длина - 2мм
Диаметр - 3.8мм

10 MB-PPR10

Стандартная пластиковая втулка для металлической матрицы

Материал: Пластик
Размеры: Длина - 2.6мм
Сила удержания 800-950 г

5 MB-TBS10

Стандартная пружинка для титановой матрицы

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Диаметр - 2.50мм

11 MB-DB235

Пластиковое защитное кольцо для шаровидного абатмента

Материал: Пластик
Размеры: Диаметр - 15мм

6 MB-TBS20

Мягкая пружинка для титановой матрицы



Материал: Нерж. сталь
Размеры: Диаметр - 2.60мм




« MB-DB235

Пластиковое защитное кольцо для шаровидного абатмента


Угловые шаровидные абатменты

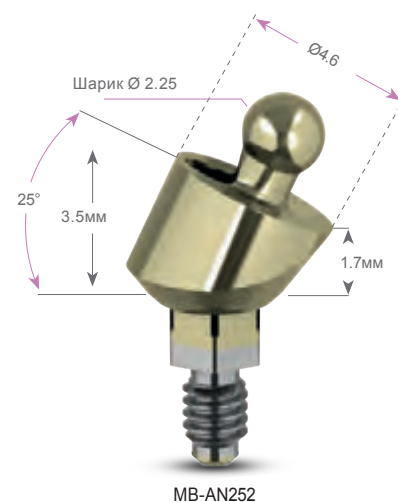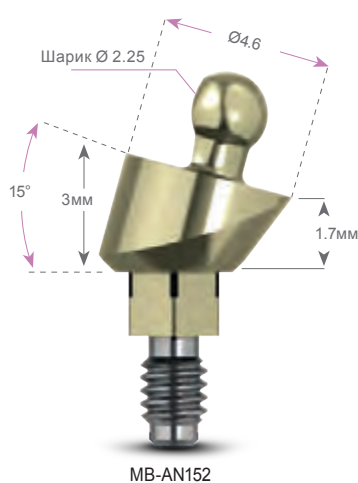

Возможности системы компенсировать углы расхождения между имплантатами

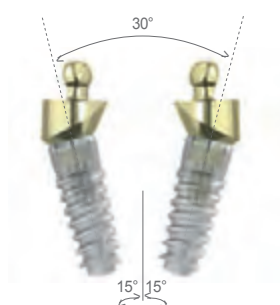

Шаровидный абатмент 15° позволяет компенсировать угол расхождения между имплантатами максимум до 30°

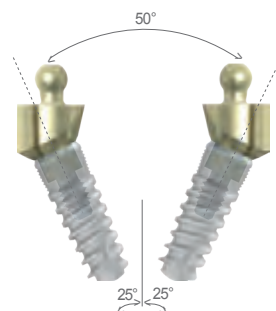

Шаровидный абатмент 25° позволяет компенсировать угол расхождения между имплантатами максимум до 50°.

Процедура

Установите угловой шаровидный абатмент (15°/25°) на имплантат с помощью пластикового держателя. Специальной ручной шестигранной отверткой (MT-HHR13) зафиксируйте абатмент ортопедическим винтом через отверстие в пластиковом держателе. Рекомендуемое усилие при закручивании 30 Нсм.






STANDARD


Система абатментов Locator

1 MB-SZL00 Locator абатмент, высота 0мм, станд. платф. Материал: Титан/ Нитрид титана Размеры: Высота - 0мм	8 MM-LCT10 Универсальный ключ для системы Locator Материал: Нерж. сталь Титан/ Нитрид титана
2 MB-SZL01 Locator абатмент, высота 1мм, станд. платф. Материал: Титан/ Нитрид титана Размеры: Высота - 1мм	9 MM-LMP02 Комплект матриц для системы Locator Материал: Нерж. сталь/ Нейлон Размеры: Длина - 1.80мм Титан/ Нитрид титана
3 MB-SZL02 Locator абатмент, высота 2мм, станд. платф. Материал: Титан/ Нитрид титана Размеры: Высота - 2мм	10 MM-LIC10 Слепочный трансфер для системы Locator Материал: Алюминий/Полиэтилен Размеры: Длина - 4.50мм Диаметр - 4.70мм
4 MB-SZL03 Locator абатмент, высота 3мм, станд. платф. Материал: Титан/ Нитрид титана Размеры: Высота - 3мм	11 MM-LFA40 Аналог диаметром 4мм для системы Locator Материал: Алюминий/Полиэтилен Размеры: Длина - 10.40мм Диаметр - 4мм
5 MB-SZL04 Locator абатмент, высота 4мм, станд. платф. Материал: Титан/ Нитрид титана Размеры: Высота - 4мм	
6 MB-SZL05 Locator абатмент, высота 5мм, станд. платф. Материал: Титан/ Нитрид титана Размеры: Высота - 5мм	
7 MB-SZL06 Locator абатмент, высота 6мм, станд. платф. Материал: Титан/ Нитрид титана Размеры: Высота - 6мм	

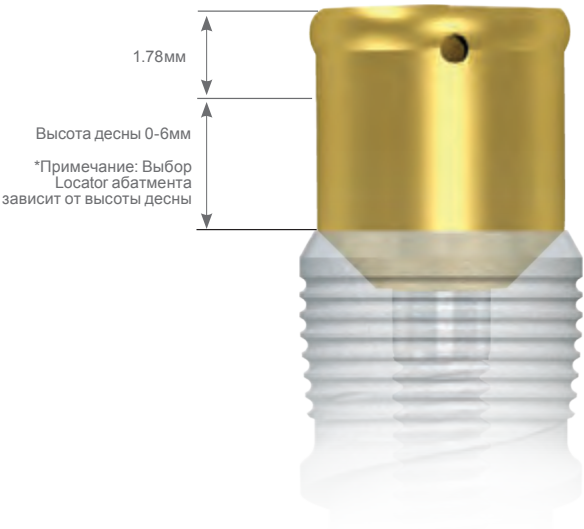

« MB-SZL03
Locator абатмент, высота 3мм,
станд. платф.

i Locator абатмент подходит ко всем имплантатам MIS с внутр. шестигр. и стандартной платформой.

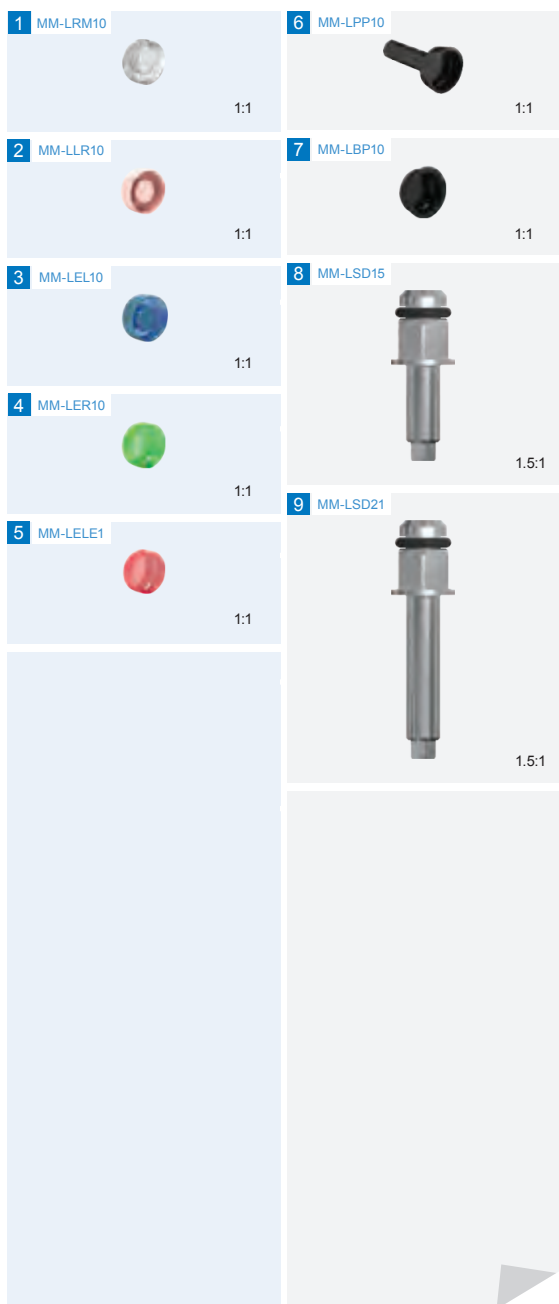

STANDARD

Система абатментов Locator

1 MM-LRM10

Прозрачная матрица
Locator 0°-10°*, 2.27 кг**

Материал: Нейлон
Размеры: Длина - 1.80мм
Диаметр - 4.70мм

6 MM-LPP10

Пин параллельности
к системе Locator

Материал: Черный полиэтилен
Размеры: Длина - 15мм
Диаметр - 4.60мм

2 MM-LLR10

Розовая матрица
Locator light 0°-10°*, 1.36 кг**

Материал: Розовый нейлон
Размеры: Длина - 1.80мм
Диаметр - 4.70мм

7 MM-LBP10

Черная техническая матрица

Материал: Черный полиэтилен
Размеры: Длина - 1.80мм
Диаметр - 4.60мм

3 MM-LEL10

Синяя матрица
Locator 0°-10°*, 0.68 кг**

Материал: Синий нейлон
Размеры: Длина - 1.80мм
Диаметр - 4.70мм

8 MM-LSD15

Короткий адаптер для
реверсивного ключа к
системе Locator

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 15мм

4 MM-LER10

Зелёная матрица
Locator 10°-20°*, 1.36-1.82 кг**

Материал: Зеленый нейлон
Размеры: Длина - 1.80мм
Диаметр - 4.70мм

9 MM-LSD21

Длинный адаптер для
реверсивного ключа к
системе Locator

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 21мм

5 MM-LELE1

Красная матрица
Locator 10°-20°*, 0.68 кг**

Материал: Красный нейлон
Размеры: Длина - 1.80мм
Диаметр - 4.70мм



*Угол отклонения имплантата от вертикальной оси


**Сила удержания





MW-IT300

Слепочный трансфер для
закрытой ложки, широк. платф.

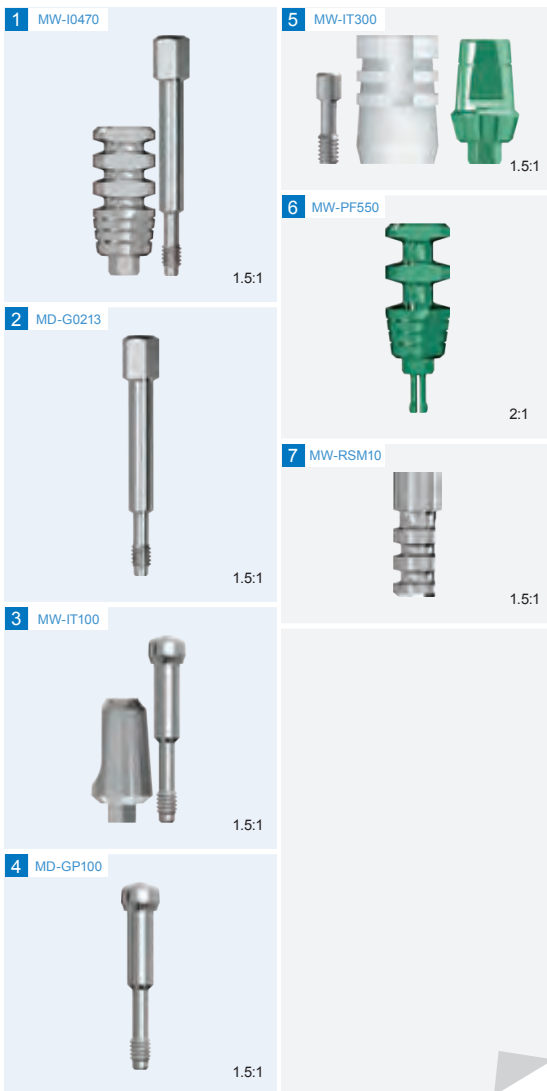

WIDE

Аналоги и слепочные трансферы

- | | |
|---|--|
| <p>1 MW-I0470
Слепочный трансфер для открытой ложки, широк. платф.</p> <p>Материал: Нерж. сталь
Размеры: Высота - 11мм</p> | <p>5 MW-IT300
Слепочный трансфер для закрытой ложки, широк. платф.</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Высота - 8мм</p> |
| <p>2 MD-G0213
Винт слепочного трансфера для открытой ложки</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Длина - 21.3мм</p> | <p>6 MW-PF550
Слепочная головка, широк. платф.</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Высота - 11мм</p> |
| <p>3 MW-IT100
Слепочный трансфер для закрытой ложки, широк. платф.</p> <p>Материал: Нерж. сталь
Размеры: Высота - 9мм</p> | <p>7 MW-RSM10
Аналог имплантата, широк. платф.</p> <p>Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 12мм</p> |
| <p>4 MD-GP100
Винт слепочного трансфера для закрытой ложки</p> <p>Материал: Титан
Размеры: Длина - 16.5мм</p> | |

MW-I0470
Слепочный трансфер для открытой ложки, широкая платформа.



1 MW-CPK61



2 MW-RSM60



3 MW-CHC60



4 MW-IC800



5 MW-IC040



6 MW-ICH40



WIDE

CPK - Ортопедический сет

MK-WPK61

1 MW-CPK61

Анатомический трансгингивальный абатмент, высота уступа 1мм, длина 6мм, широк. платф.

2 MW-RSM60

Аналог имплантата, длина 6мм, широк. платф.

3 MW-CHC60

Пластиковый формирующий колпачок, длина 6мм, широк. платф.

4 MW-IC800

Слепочный колпачок для трансфера открытой ложки, длина 8мм, широк. платф.

5 MW-IC040

Выжигаемый пластиковый колпачок без антиротационного компонента, широк. платф.

6 MW-ICH40

Выжигаемый пластиковый колпачок с антиротационным компонентом, широк. платф.



МК-WPK61

Ортопедический сет, высота уступа 1мм, длина 6мм, широк. платф.

WIDE

CPK - Ортопедический сет



C=4мм
H=1, 2, 3, 4мм

C=6мм
H=1, 2, 3, 4мм

C=8мм
H=1, 2, 3, 4мм

Комплектация:

МК-WPK41

Ортопедический сет, высота уступа 1мм, длина абатмента 4мм, широк. платф.

МК-WPK42

Ортопедический сет, высота уступа 2мм, длина абатмента 4мм, широк. платф.

МК-WPK43

Ортопедический сет, высота уступа 3мм, длина абатмента 4мм, широк. платф.

МК-WPK44

Ортопедический сет, высота уступа 4мм, длина абатмента 4мм, широк. платф.

МК-WPK61

Ортопедический сет, высота уступа 1мм, длина 6мм, широк. платф.

МК-WPK62

Ортопедический сет, высота уступа 2мм, длина абатмента 6мм, широк. платф.

МК-WPK63

Ортопедический сет, высота уступа 3мм, длина абатмента 6мм, широк. платф.

МК-WPK64

Ортопедический сет, высота уступа 4мм, длина абатмента 6мм, широк. платф.

МК-WPK81

Ортопедический сет, высота уступа 1мм, длина абатмента 8мм, широк. платф.

МК-WPK82

Ортопедический сет, высота уступа 2мм, длина абатмента 8мм, широкая платформ

МК-WPK83

Ортопедический сет, высота уступа 3мм, длина абатмента 8мм, широк. платф.

МК-WPK84

Ортопедический сет, высота уступа 4мм, длина абатмента 8мм, широк. платф.

C=Длина абатмента
H=Высота уступа

✦ Анатомический трансгингивальный абатмент, широк. платф.

MW-CPK41*

C=4мм
H=1, 2, 3, 4мм

MW-CPK42*

MW-CPK43*

MW-CPK44*

MW-CPK61*

C=6мм
H=1, 2, 3, 4мм

MW-CPK62*

MW-CPK63*

MW-CPK64*


MW-CPK81*

C=8мм
H=1, 2, 3, 4мм

MW-CPK82*

MW-CPK83*

MW-CPK84*

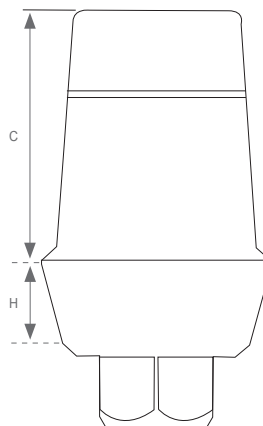

Все абатменты CPK можно приобрести отдельно. Все они поставляются с выдвигаемым пластиковым колпачком с антиротационным компонентом MW-ICH40.



WIDE

Прямая система протезирования с винтовой фиксацией

- | | |
|--|---|
| 1 MW-CPH13
Пластиковый абатмент с антиротационным компонентом, широк. платф.
Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: Высота - 11мм
Диаметр - 4.50мм | 8 MW-TPA12
Временный пластиковый абатмент, широк. платф.
Материал: Пластик
Размеры: Высота - 11мм
Диаметр - 4.50мм |
| 2 MW-CP013
Пластиковый абатмент без антиротационного компонента, широк. платф.
Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: Высота - 11мм
Диаметр - 4.50мм | 9 MD-G0220
Ортопедический винт из сплава
Материал: Сплав
Размеры: Длина - 7.7мм
30 Нсм |
| 3 MW-CPH60
Широкий пластиковый абатмент с антиротационным компонентом, широк. платф.
Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: Высота - 11мм
Диаметр - 6.50мм | 10 MD-S0200
Ортопедический винт мини
Материал: Титан
Размеры: Длина - 6.9мм
30 Нсм |
| 4 MW-CP060
Широкий пластиковый абатмент без антиротационного компонента, широк. платф.
Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: Высота - 11мм
Диаметр - 6.50мм | 11 MD-S0220
Ортопедический винт стандартный
Материал: Титан
Размеры: Длина - 7.6мм
30 Нсм |
| 5 MW-TPH50
Временный пластиковый абатмент, широк. платф.
Материал: Пластик
Размеры: Высота - 12мм
Диаметр - 5.50мм | 12 MD-S0222
Ортопедический винт средний
Материал: Титан
Размеры: Длина - 11.7мм
30 Нсм |
| 6 MW-GPC10
Пластиковый абатмент с основой из сплава с антиротационным компонентом, широк. платф.
Материал: Выжигаемый пластик+сплав
Размеры: Высота - 15мм
Диаметр - 5.50мм | 13 MD-S0224
Ортопедический винт длинный
Материал: Титан
Размеры: Длина - 13.8мм
30 Нсм |
| 7 MW-GP010
Пластиковый абатмент с основой из сплава без антиротационного компонента, широк. платф.
Материал: Выжигаемый пластик + сплав
Размеры: Высота - 15мм
Диаметр - 5.50мм | |



"Функциональная высота" всех абатментов измеряется от посадочной платформы и не включает в себя высоту шестигр.

Примечание: Временные абатменты из материала PEEK являются радиолюцентными!



WIDE

Система протезирования с цементной фиксацией

1 MW-MAC10

Стандартный абатмент, широк. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 11мм
Диаметр - 5.5мм

3 MW-WMAC1

Широкий стандартный абатмент, широк. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 11мм
Диаметр - 6.5мм

2 MW-CTP10

Конический абатмент, широк. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 8.5мм
Диаметр - 5.5мм

4 MW-TPA10

Временный пластиковый абатмент, широк. платф.

Материал: Пластик
Размеры: Высота - 11мм
Диаметр - 5.5мм



MW-MAC10
Стандартный абатмент, широк. платф.



WIDE

Прямая система протезирования с цементной фиксацией

1 MW-AN151

Угловой абатмент 15°, широк. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 9мм

5 MD-S0200

Ортопедический
винт мини

Материал: Титан
Размеры: Длина - 6.90мм
30 Нсм

2 MW-P0010

Эстетический абатмент, высота
уступа 1мм, широк. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 9мм

6 MD-S0220

Ортопедический винт
стандартный

Материал: Титан
Размеры: Длина - 7.60мм
30 Нсм

3 MW-P1510

Угловой абатмент 15°, высота
уступа 1мм, широк. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 9мм

7 MD-S0222

Ортопедический винт
средний

Материал: Титан
Размеры: Длина - 11.7мм
30 Нсм

4 MD-G0220

Ортопедический винт из
сплава

Материал: Сплав
Размеры: Длина - 7.70мм
20 Нсм

8 MD-S0224

Ортопедический винт
длинный

Материал: Титан
Размеры: Длина - 13.8мм
30 Нсм




«

MW-P1510


Угловой абатмент 15° высота
уступа 1мм, широк. платф.

Эстетические прямые абатменты

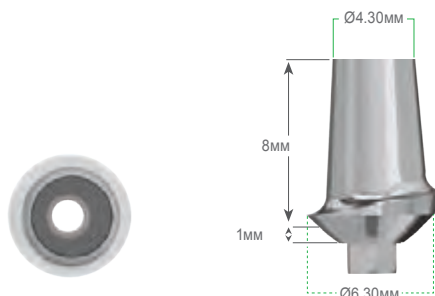


MW-P0010

Эстетические угловые абатменты 15°

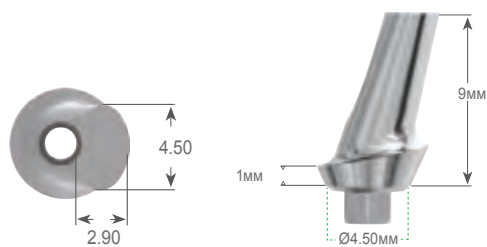

MW-P1510

Угловые абатменты 15°

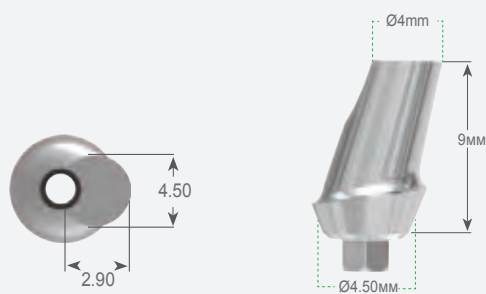


MW-AN151

Стандартные абатменты




MW-CTP10

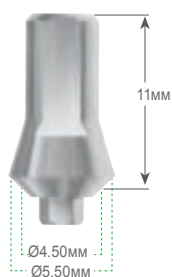

MW-MAC10



MW-WMAC1

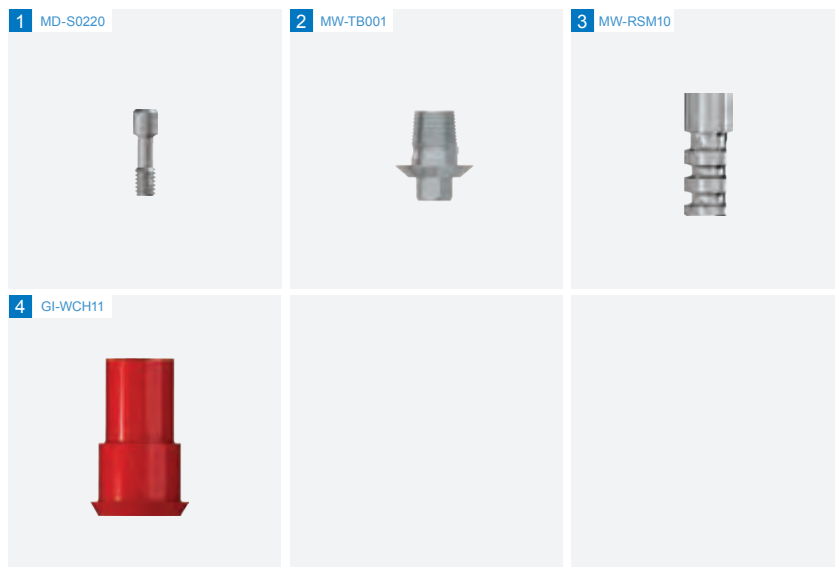

WIDE

Набор TI-BASE для CAD/CAM систем

С шестигранником | MK-TBW4

(с антиротационного
компонентом)

- 1 **MD-S0220**
Ортопедический винт
стандартный
- 2 **MW-TB001**
Титановая платформа с внутр. шестигр.
для систем CAD/CAM, широк. платф.
- 3 **MW-RSM10**
Аналог имплантата, широк.
платф.
- 4 **GI-WCH11**
Выжигаемый пластиковый колпачок с
антиротационным компонентом для
титановой платформы, широк. платф.



«
MK-TBW4

Набор титановой платформы для
CAD/CAM систем для одиночных
реставраций, широк. платф.

Сканируемый
абатмент



MW-SP001
Абатмент для сканирования,
широк. платф.



MD-S0220
Ортопедический винт
стандартный



Только для
лабораторного
использования!

1 MD-S0220



2 MW-TB002



3 MW-RSM10



4 GI-WCH11



WIDE

Набор TI-BASE для CAD/CAM систем

Без шестигранника | MK-MUW4

(без антиторсионного
компонента)

1 MD-S0220

Ортопедический винт
стандартный

2 MW-TB002

Титановая платформа с
шестигранником, широк. платф.

3 MW-RSM10

Аналог имплантата, широк.
платф.

4 GI-WCH11

Выжигаемый пластиковый колпачок с
антиторсионным компонентом для
титановой платформы, широк. платф.



Без шестигр.

« MK-MUW4

Набор титановой платформы для CAD/CAM
систем для многокомпонентной реставрации,
широк. платф.

Сканируемый
абатмент



MW-SP001

Абатмент для сканирования,
широк. платф.



MD-S0220

Ортопедический винт
стандартный



Только для
лабораторного
использования!

Наборы OT Equator

Лабораторное применение:

Матрица

OT Equator колпачок черная

Клиническое применение:

Матрица

Экстра мягкая ретенция (желтая)
Матрица OT Equator(0.6 кг)

OE-RCY01

Мягкая ретенция (розовая)
Матрица OT Equator(1.2 кг)

OE-RCP01

Мягкая ретенция (белая)
Матрица OT Equator(1.8 кг)

OE-RCW01

Высокая ретенция (фиолетовая)
Матрица OT Equator(2.7 кг)

OE-RCV01


Комплектация:

MK-WOE1OT Equator комплект, высота
1мм, широк. платф.**MK-WOE3**OT Equator комплект, высота
3мм, широк. платф.**MK-WOE5**OT Equator комплект, высота
5мм, широк. платф.

H=1, 3, 5мм



Каждая матрица системы Equator может быть приобретена отдельно.

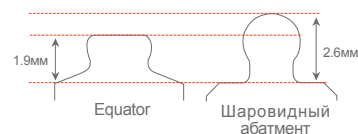

Инструменты для OT Equator

MT-LM005

Длинная шестигранная отвертка 1,27мм для микромотора



MT-SM005

Короткая шестигранная отвертка 1,27мм для микромотора



MT-SRA10

Адаптер для ратчета



MT-SHA10

Ручной ключ



OE-RSM60

Аналог OT Equator



OE-IC001

Колпачок слепочного трансфера OT Equator




OE-IC002

Слепочный трансфер OT Equator






ET-IT001

Ручной ключ для OT Equator

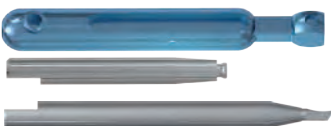

OT Equator абатменты

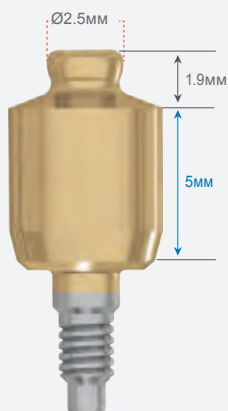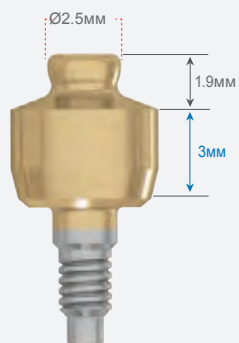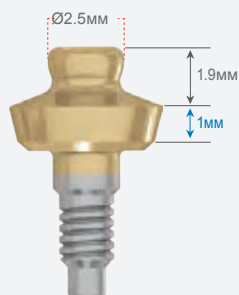

1 MD-S0220



2 MW-PM040



3 MM-WPZW4



WIDE

Циркониевые абатменты

Набор индивидуального циркониевого абатмента для премоляра, широк. платф. | MK-WPZ4

1 MD-S0220


Ортопедический винт стандартный

2 MW-PM040

Эстетический Ti абатмент для премоляра, широк. платф.

3 MM-WPZW4

Циркониевый колпачок титанового абатмента для премоляра, широк. платф.

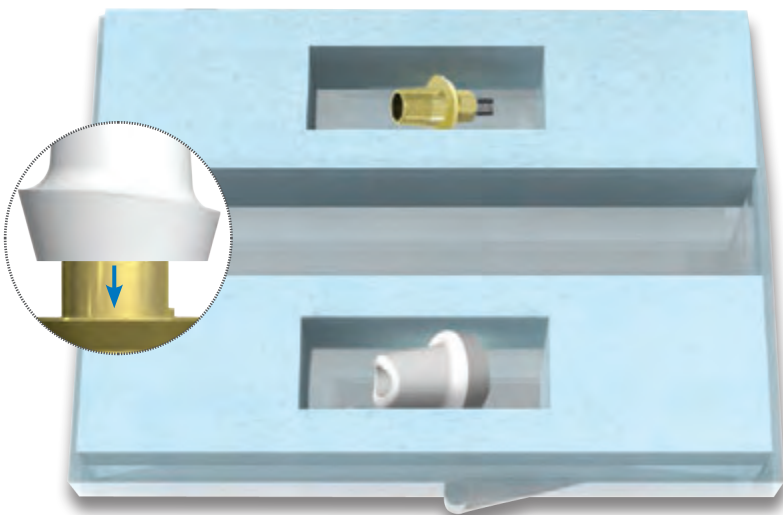

1 MD-S0220



2 MW-CPZ40



WIDE

Циркониевые абатменты


Набор индивидуального вклеенного циркониевого абатмента для премоляра, широк. платф. | MK-WPC4

1 MD-S0220

Ортопедический винт стандартный

2 MW-CPZ40

Абатмент TiZi для премоляра, широк. платф.

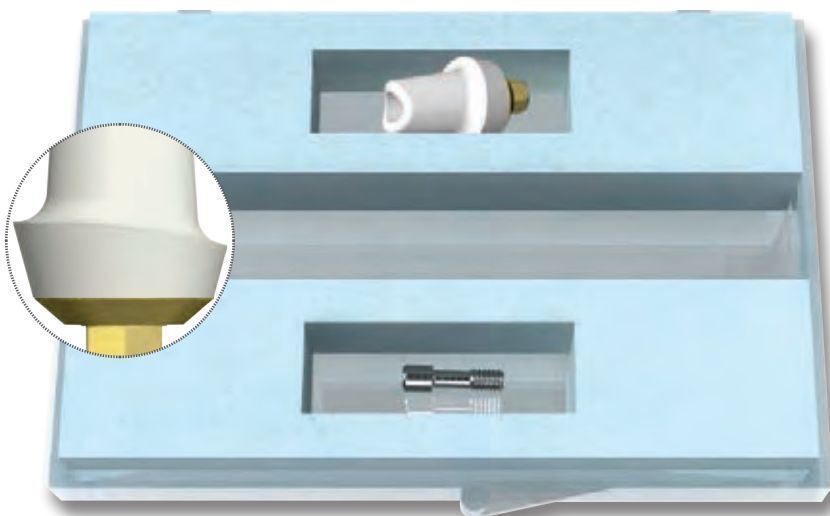

WIDE

Наборы циркониевых абатментов



Набор индивидуального циркониевого абатмента для премоляра, широк. платф.

Набор индивидуального клеенного циркониевого абатмента для премоляра, станд. платф.


Комплектация:

МК-WPZ4

Набор индивидуального циркониевого абатмента для премоляра, широк. платф.

МК-WPC4

Набор индивидуального клеенного циркониевого абатмента для премоляра, широк. платф.

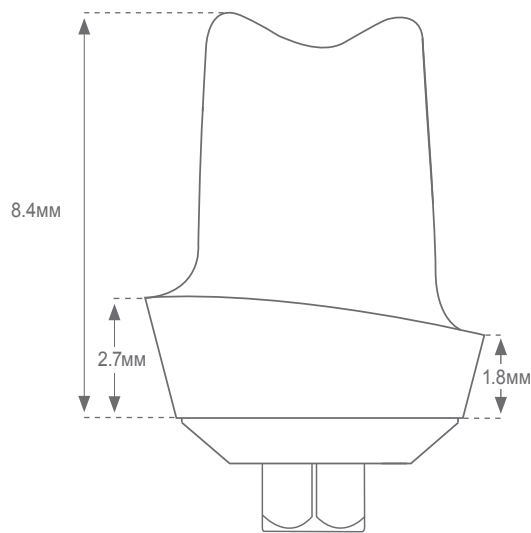

Все циркониевые абатменты поставляются вместе со стандартным ортопедическим винтом (MD-S0220).



WIDE

Система многокомпонентного абатмента

1 MU-IT480

Слепочный трансфер для закрытой ложки для системы многокомпонентного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 8мм

6 MA-W5480

Многокомпонентный абатмент, высота 5мм, широк. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 5мм
30-35 Нсм

2 MU-I0480

Слепочный трансфер для открытой ложки для системы многокомпонентного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 22мм

7 MA-WA171

Многокомпонентный угловой абатмент 17° с шестигранником широк. платф.

Материал: Титан

3 MU-RSM48

Аналог многокомпонентного абатмента

Материал: Нерж. сталь

8 MA-WA301

Многокомпонентный угловой абатмент 30° с шестигранником широк. платф.

Материал: Титан

4 MA-W1480

Многокомпонентный абатмент, высота 1мм, широк. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 1мм
30-35 Нсм

9 MU-T0480

Временный титановый цилиндр для многокомпонентного абатмента

Материал: Титан
Размеры: Длина - 10мм

5 MA-W3480

Многокомпонентный абатмент, высота 3мм, широк. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 3мм
30-35 Нсм

10 MU-H4480

Формирователь десны для системы многокомпонентного абатмента

Материал: Титан
Размеры: Длина - 3.3мм

»
MU-T0480
Временный титановый цилиндр для многокомпонентного абатмента





WIDE

Система многокомпонентного абатмента

1 MU-CP048

Пластиковый цилиндр для системы многокомпонентного абатмента

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: Длина - 10мм

6 MU-MG480

Пластиковый цилиндр с основой из сплава для многокомпонентного абатмента

Материал: Выжигаемый пластик + сплав
Размеры: Длина - 14.5мм

2 MU-MG480

Пластиковый цилиндр с основой из сплава для многокомпонентного абатмента

Материал: Выжигаемый пластик + сплав
Размеры: Длина - 14.5мм

7 MU-BGC48

Основа из сплава для многокомпонентного абатмента

Материал: Сплав
Размеры: Длина - 3.3мм

3 MU-BGC48

Основа из сплава для многокомпонентного абатмента

Материал: Сплав
Размеры: Длина - 3.3мм

8 MT-NMK02

Ключ для углового многокомпонентного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 22мм

4 MU-CC480

Титановое основание для CAD/CAM системы многокомпонентного абатмента

Материал: Титан
Размеры: Длина - 3.3мм

9 MT-NB225

Ключ для прямого многокомпонентного абатмента и шаровидного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 22мм

5 MU-SP001

Сканируемый абатмент для системы многокомпонентного абатмента

Материал: Пластик
Размеры: Длина - 10 мм



«
MU-MG480
Пластиковый цилиндр с основой из сплава для многокомпонентного абатмента



WIDE

Система шаровидного абатмента

- 1 MW-B1500**
Шаровидный абатмент, высота 1мм, широк. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 1мм

- 4 MT-NB225**
Ключ для шаровидного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 22мм

- 2 MW-B3500**
Шаровидный абатмент, высота 3мм, широк. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 3мм

- 5 MB-RS375**
Аналог шаровидного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 15.1мм

- 3 MW-B5500**
Шаровидный абатмент, высота 5мм, широк. платф.

Материал: Титан
Размеры: Высота - 5мм



«
MW-B3500
Шаровидный абатмент, высота 3мм, широк. платф.

i Шаровидный абатмент подходит ко всем имплантатам MIS с внутр. шестигр. и широкой платформой.



WIDE

Система шаровидного абатмента

1 MB-SF200

Пластиковая матрица

Материал: Пластик
Размеры: Длина - 3.5мм

7 MT-TSD10

Отвертка для титановой матрицы

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 60мм

2 MB-GPS10

Матрица из сплава

Материал: Сплав
Размеры: Длина - 2.4мм

8 MB-DMH10

Двойной комплект матриц

3 MB-TTP10

Титановая матрица

Материал: Титан
Размеры: Длина - 3.1мм

9 MB-PPC10

Мягкая пластиковая втулка для металлической матрицы

Материал: Пластик
Размеры: Длина - 2.6мм
Сила удержания 1200-1300 г

4 MB-PR010

Пластиковая втулка

Материал: Пластик
Размеры: Длина - 2мм

10 MB-PPR10

Стандартная пластиковая втулка для металлической матрицы

Материал: Пластик
Размеры: Длина - 2.6мм
Сила удержания 800-950 г

5 MB-TBS10

Стандартная пружинка для титановой матрицы

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Диаметр - 2.5мм

11 MB-DB235

Пластиковое защитное кольцо для шаровидного абатмента

Материал: Пластик
Размеры: Диаметр - 15мм


6 MB-TBS20

Мягкая пружинка для титановой матрицы

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Диаметр - 2.6мм



« MB-SF200
Пластиковая матрица

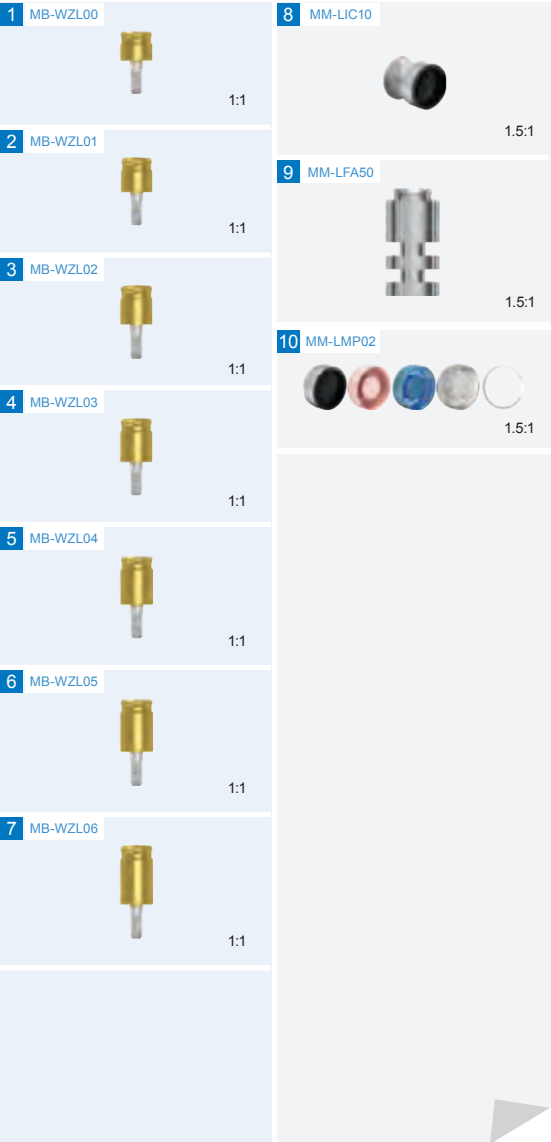

WIDE

Система абатмента Locator

- | | |
|---|---|
| 1 MB-WZL00
Locator абатмент, высота 0мм, широк. платф.

Материал: Титан/ Нитрид титана
Размеры: Высота - 0мм | 8 MM-LIC10
Слепочный трансфер для системы Locator

Материал: Алюминий/Полиэтилен
Размеры: Длина - 4.50мм |
| 2 MB-WZL01
Locator абатмент, высота 1мм, широк. платф.

Материал: Титан/ Нитрид титана
Размеры: Высота - 1мм | 9 MM-LFA50
Аналог абатмента системы Locator, широк. платф.

Материал: Алюминий
Размеры: Высота - 10.4 м
Диаметр - 5мм |
| 3 MB-WZL02
Locator абатмент, высота 2мм, широк. платф.

Материал: Титан/ Нитрид титана
Размеры: Высота - 2мм | 10 MM-LMP02
Комплект матриц для системы Locator


Материал: Нерж. сталь/ Нейлон
Размеры: Длина - 1.80мм |
| 4 MB-WZL03
Locator абатмент, высота 3мм, широк. платф.

Материал: Титан/ Нитрид титана
Размеры: Высота - 3мм | |
| 5 MB-WZL04
Locator абатмент, высота 4мм, широк. платф.

Материал: Титан/ Нитрид титана
Размеры: Высота - 4мм | |
| 6 MB-WZL05
Locator абатмент, высота 5мм, широк. платф.

Материал: Титан/ Нитрид титана
Размеры: Высота - 5мм | |
| 7 MB-WZL06
Locator абатмент, высота 6мм, широк. платф.

Материал: Титан/ Нитрид титана
Размеры: Высота - 6мм | |

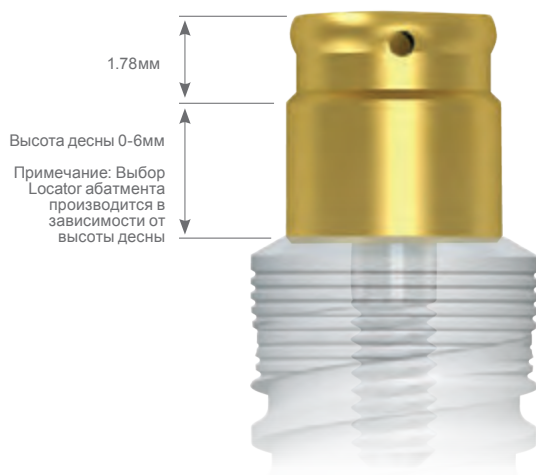

« MB-WZL02
Locator абатмент, высота 2мм,
широк. платф.

i Locator абатмент подходит ко всем имплантатам MIS с внутр. шестигр. и широкой платформой.



WIDE

Система абатментов Locator

1 MM-LRM10
Прозрачная матрица
Locator 0°-10°, 2.27 кг**

Материал: Нейлон
Размеры: Длина - 1.80мм
Диаметр - 4.70мм

6 MM-LPP10
Пин параллельности
к системе Locator

Материал: Черный полиэтилен
Размеры: Длина - 15мм
Диаметр - 4.60мм

2 MM-LLR10
Розовая матрица
Locator light 0°-10°, 1.36 кг**

Материал: Розовый нейлон
Размеры: Длина - 1.8мм
Диаметр - 4.70мм

7 MM-LBP10
Черная техническая матрица

Материал: Черный полиэтилен
Размеры: Длина - 1.80мм
Диаметр - 4.60мм

3 MM-LEL10
Синяя матрица
Locator 0°-10°, 0.68 кг**

Материал: Синий нейлон
Размеры: Длина - 1.8мм
Диаметр - 4.70мм

8 MM-LSD15
Короткий адаптер для
реверсивного ключа к
системе Locator

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 15мм

4 MM-LER10
Зелёная матрица
Locator 10°-20°, 1.36-1.82 кг**

Материал: Зеленый нейлон
Размеры: Длина - 1.8мм
Диаметр - 4.70мм

9 MM-LSD21
Длинный адаптер для
реверсивного ключа к
системе Locator

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 21мм

5 MM-LELE1
Красная матрица
Locator 10°-20°, 0.68 кг**

Материал: Красный нейлон
Размеры: Длина - 1.8мм
Диаметр - 4.70мм



*Для корректировки расхождения осей имплантатов
**Сила удержания



»
MM-LSD21
Длинный адаптер для
реверсивного ключа к
системе Locator



Балочная система

1 MM-TRU10

Титановая балка,
овальное сечение

Материал: Титан
Размеры: Длина - 50мм
Высота - 2.9мм

5 MM-TC100

Балка из сплава,
круглое сечение

Материал: Сплав
Размеры: Длина - 3.5мм
Высота - 2.5мм

2 MM-GRU10

Балка из сплава,
овальное сечение

Материал: Сплав
Размеры: Длина - 50мм
Высота - 2.8мм

6 MM-PC100

Пластиковый бар,
круглое сечение

Материал: Выжигаемый пластик
Размеры: Длина - 85мм
Диаметр - 2мм

3 MM-PBU10

Пластиковый бар,
овальное сечение

Материал: Пластик
Размеры: Длина - 80мм
Высота - 2.3мм

7 MM-GB100


Бар из сплава,
круглое сечение

Материал: Сплав
Размеры: Длина - 50мм
Диаметр - 1.90мм

4 MM-GBU10

Бар из сплава,
овальное сечение


Материал: Сплав
Размеры: Длина - 50мм
Высота - 2.3мм

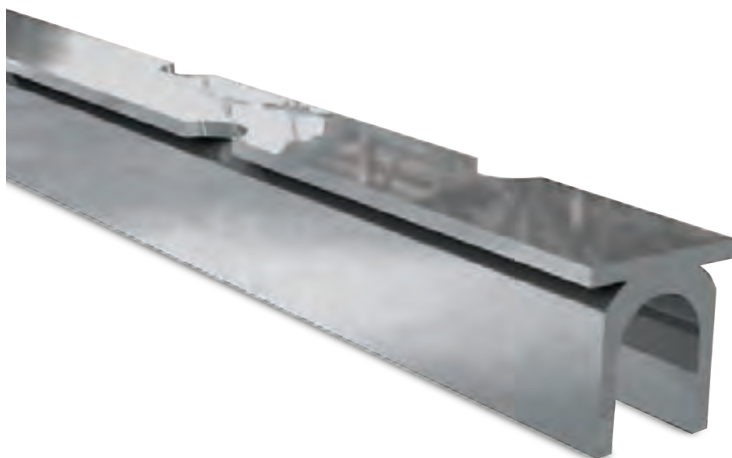



Аксессуары.

Компания MIS предлагает широкий ассортимент инновационных устройств и инструментов, предоставляя простые, но эффективные решения стоматологам и зубным техникам.

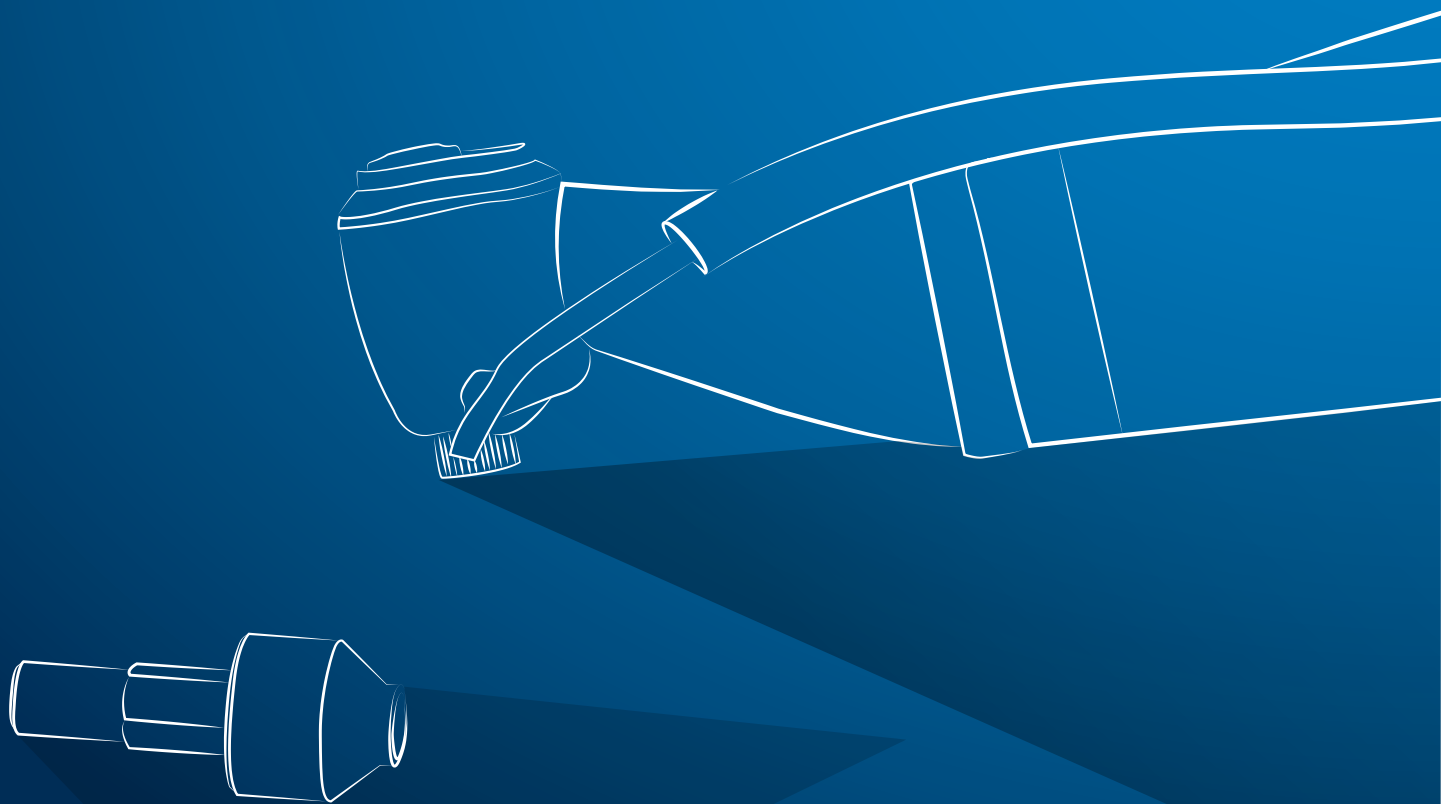



Ортопедические инструменты

1 MT-AL005

Аллен ключ 0.05"

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина 72мм

4 MT-SM005

Короткая шестигранная отвертка для микромотора 1,27мм

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина 24мм

2 MT-TSD10

Отвертка для титановой матрицы

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 50мм

5 MT-LM005

Длинная шестигранная отвертка для микромотора 1,27мм

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 33мм

3 MT-IT100

Ключ для слепочного трансфера закрытой ложки

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 16.5мм


6 MT-NB225

Ключ для шаровидного абатмента

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 22мм



«
MT-NB225
Ключ для шаровидного абатмента

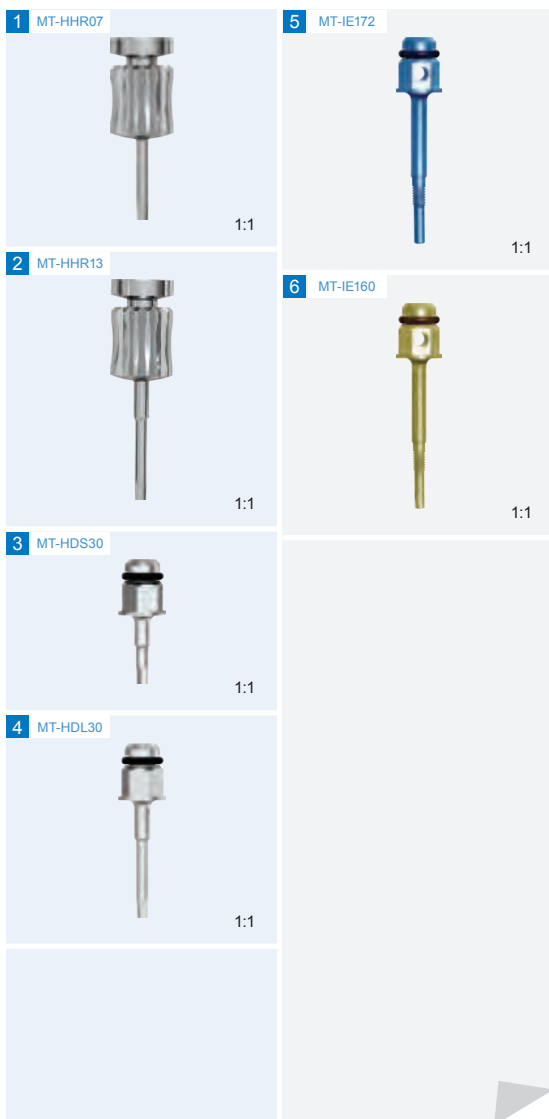

Ортопедические инструменты

1 MT-HHR07

Короткая ручная шестигранная отвертка для шестигранника 1,27мм

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 22мм

5 MT-IE172

Экстрактор абатмента с шестигранником

Материал: Титан
Размеры: Длина - 27мм

2 MT-HHR13

Длинная ручная шестигранная отвертка для шестигранника 1,27мм

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 29мм

6 MT-IE160

Экстрактор абатмента с шестигранником, узкая платф.

Материал: Титан
Размеры: Длина - 27мм

3 MT-HDS30


Короткая шестигранная отвертка для ратчета 1,27мм


Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 16мм

4 MT-HDL30

Длинная шестигранная отвертка для ратчета 1,27мм

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 22мм

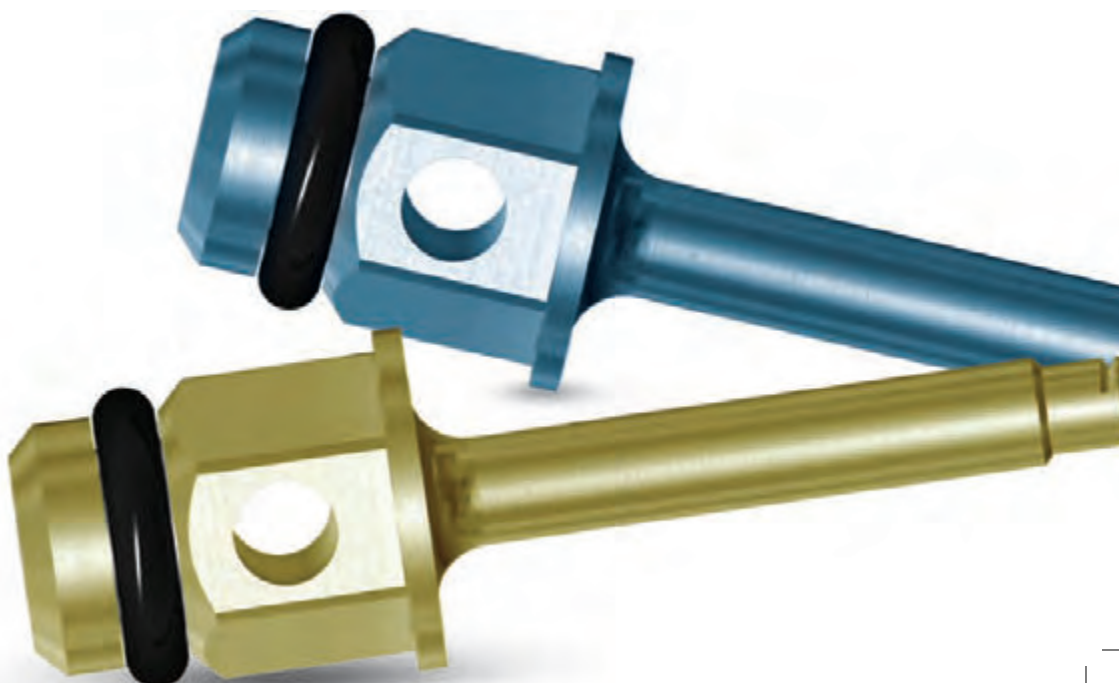

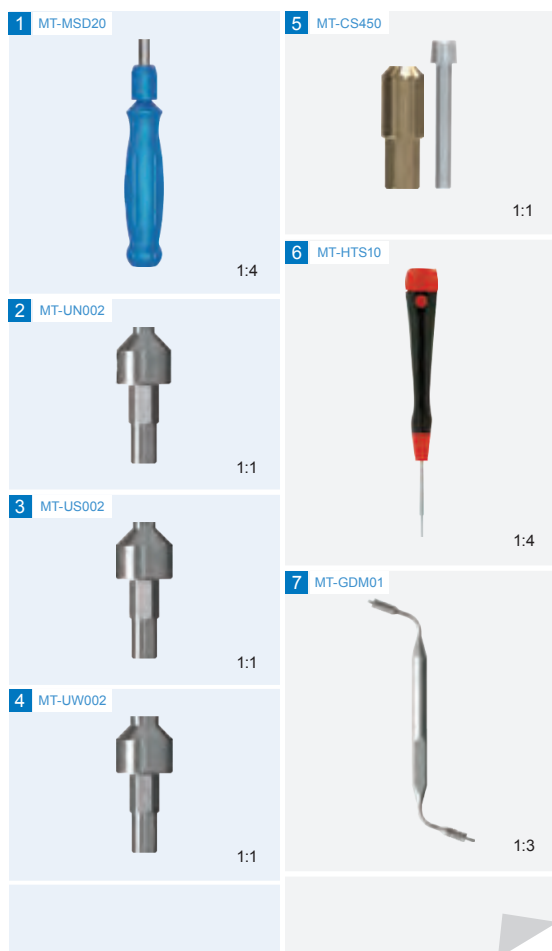

Ортопедические инструменты

1 MT-MSD20

Универсальная ручная отвертка

Материал: Нерж. сталь + Алюминий
Размеры: Длина 120мм

5 MT-CS450

Ример для реставраций на основе абатментов СРК

Материал: Нерж. сталь

2 MT-UN002

Насадка шестигранная для универсальной ручной отвертки, узкая платформа

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина 24мм

6 MT-HTS10

Техническая шестигранная отвертка

Материал: Нерж. сталь + Пластик
Размеры: Длина - 142.5мм

3 MT-US002

Насадка шестигранная для универсальной ручной отвертки, стандартная платформа

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина 24мм

7 MT-GDM01

Измеритель высоты десны 2/4/6/8мм


Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина - 100мм

4 MT-UW002

Насадка шестигранная для универсальной ручной отвертки, широкая платформа

Материал: Нерж. сталь
Размеры: Длина 24мм

MT-MSD20
Универсальная ручная отвертка

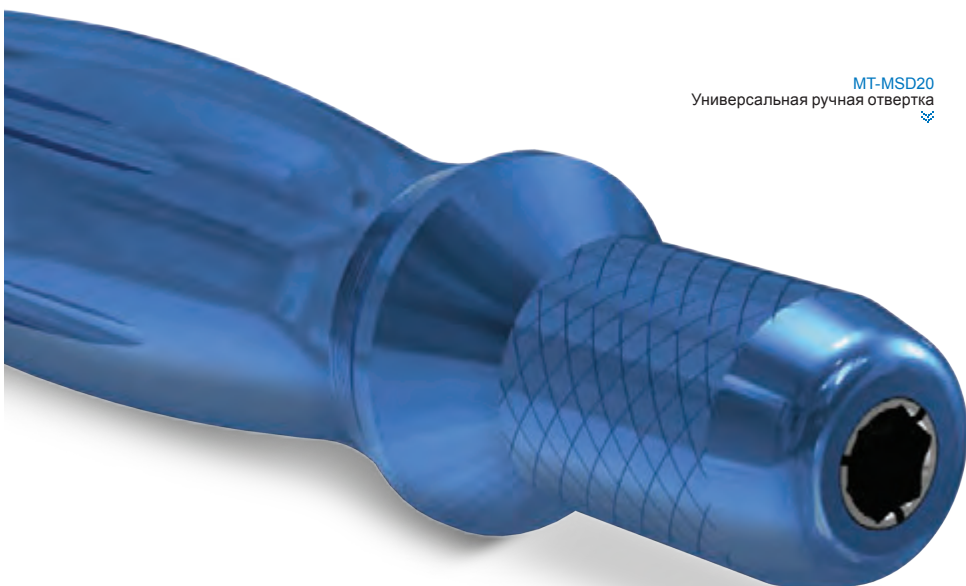

1 MT-A4022



2 MT-B4018



3 MT-C3125



4 MT-F2121



5 MT-K2023



Набор фрез для обработки циркония

МК-DB01

Набор состоит из алмазных фрез,
применяемых для обработки
циркониевых абатментов.

1 MT-A4022
Фреза алмазная, 2.20мм

2 MT-B4018
Фреза алмазная, 1.80мм

3 MT-C3125
Фреза алмазная, 2.50мм

4 MT-F2121
Фреза алмазная, 2.10мм

5 MT-K2023
Фреза алмазная, 2.30мм



«
МК-DB01
Набор алмазных фрез, предназначенных
для обработки циркония

Содержимое набора

Кол-во:

- 1 **MD-CPK81-1**
Примерочный
трансгингивальный абатмент,
высота уступа 1мм, длина
8мм, стандартная платформа
- 1 **MD-CPK82-2**
Примерочный
трансгингивальный абатмент,
высота уступа 2мм, длина
8мм, стандартная платформа
- 1 **MD-CPK83-3**
Примерочный
трансгингивальный абатмент,
высота уступа 3мм, длина
8мм, стандартная платформа
- 1 **MD-CPK84-4**
Примерочный
трансгингивальный абатмент,
высота уступа 4мм, длина
8мм, стандартная платформа
- 1 **MD-CTP10-5**
Примерочный
конический абатмент
- 1 **MD-MAC10-6**
Примерочный
стандартный абатмент
- 1 **MD-P2530-14**
Примерочный эстетический
угловой абатмент 25°,
высота уступа 3мм

Кол-во:

- 1 **MD-P0030-7**
Примерочный эстетический
абатмент, высота уступа 3мм
- 1 **MD-A0010-8**
Примерочный эстетический
абатмент, высота уступа 1мм
- 1 **MD-AN151-9**
Примерочный угловой
абатмент 15°
- 1 **MD-AN251-10**
Примерочный угловой
абатмент 25°
- 1 **MD-A1510-11**
Примерочный эстетический
угловой абатмент 15°,
высота уступа 1мм
- 1 **MD-A2510-12**
Примерочный эстетический
угловой абатмент 25°,
высота уступа 1мм
- 1 **MD-P1530-13**
Примерочный эстетический
угловой абатмент 15°,
высота уступа 3мм

Кол-во:

- 1 **MW-CPK81-15**
Примерочный
трансгингивальный абатмент,
высота уступа 1мм, длина
8мм, широкая платформа
- 1 **MW-CPK82-16**
Примерочный
трансгингивальный абатмент,
высота уступа 2мм, длина
8мм, широкая платформа
- 1 **MW-CPK83-17**
Примерочный
трансгингивальный абатмент,
высота уступа 3мм, длина
8мм, широкая платформа
- 1 **MW-CPK84-18**
Примерочный
трансгингивальный абатмент,
высота уступа 4мм, длина
8мм, широкая платформа
- 1 **MW-CTP10-19**
Примерочный конический
абатмент, широкая платформа
- 1 **MW-MAC10-20**
Примерочный стандартный
абатмент, широкая платформа
- 1 **MW-P1510-22**
Примерочный эстетический
угловой абатмент 15°,
высота уступа 1мм, широкая
платформа

Кол-во:

- 1 **MW-AN151-21**
Примерочный угловой
абатмент 15°, широкая
платформа
- 6 **MD-GT190**
Направляющий пин для
технического сета



МК-0040
Набор для ортопедического
планирования

Специальный цемент для фиксации коронок на имплантатах

МК-0022

Специальный цемент MIS представляет собой полимерный цемент с высокими ретенционными характеристиками, но с сохранением возможности снятия зацементированной реставрации с абатмента без ее повреждения. Цемент затвердевает в течение 90 сек., что позволяет быстро и просто удалить его излишки на краях коронки, поставляется в шприце для автоматического смешивания.



МК-0022
Специальный
цемент для
фиксация коронок на
имплантатах



Для достижения максимальной ретенции абатменты следует подвергать пескоструйной обработке перед цементной фиксацией коронок.

Ортопедический держатель абатментов

МК-0001

Ортопедический держатель абатментов предназначен для комфортного препарирования керамических и титановых абатментов. Система содержит насадки для всех видов платформ имплантатов MIS.



«
МК-0001
Ортопедический держатель
абатментов

Презентационный ортопедический сет

MK-PIC01

Презентационный ортопедический сет MIS демонстрирует широкое разнообразие ортопедических решений, предлагаемых компанией MIS. В состав набора входят гипсовые модели наиболее часто встречающихся клинических случаев, различные абатменты для цементной фиксации. Кроме того, в наборе представлен диск, на котором записаны поэтапные инструкции к проведению различных ортопедических манипуляций, рекомендуемых компанией MIS.



«
MK-PIC01
Презентационный
ортопедический сет

Содержимое набора

Кол-во:

- 4 **MA-ANH17**
Многокомпонентный
угловой абатмент 17° с
шестигранником
- 4 **MA-ANH30**
Многокомпонентный
угловой абатмент 30° с
шестигранником
- 1 **MA-S1375**
Многокомпонентный
абатмент, высота уступа 1мм
- 5 **MA-S2375**
Многокомпонентный
абатмент, высота уступа 2мм
- 1 **MA-S3375**
Многокомпонентный
абатмент, высота уступа 3мм
- 1 **MA-S4375**
Многокомпонентный
абатмент, высота уступа 4мм
- 2 **MB-AN152**
Шаровидный угловой
абатмент 15°
- 2 **MB-N2375**
Шаровидный абатмент,
высота уступа 2мм
- 1 **MD-CPK42**
Анатомический
трансгингивальный абатмент,
высота уступа 2мм, длина
4мм, стандартная платформа

Кол-во:

- 1 **MD-A1510**
Эстетический угловой
абатмент 15°, высота
уступа 1мм
- 1 **MD-A0010**
Эстетический абатмент,
высота уступа 1мм
- 2 **MD-CP013**
Пластиковый
абатмент без
шестигранника
- 1 **MD-CPH13**
Пластиковый
абатмент с
шестигранником
- 1 **MW-AN151-21**
Примерочный угловой
абатмент 15°, широкая
платформа
- 1 **MD-MAC10**
Стандартный
абатмент
- 1 **ME-G001**
Верхняя челюсть
Мостовидная
конструкция и
одиночная коронка на
угловом абатменте

Кол-во:

- 1 **ME-G003**
Верхняя челюсть
Шаровидные угловые и
прямые абатменты
- 1 **ME-G004**
Нижняя челюсть
Балочная система на
многокомпонентных
абатментах
- 1 **ME-G005**
Модель верхней челюсти
- 1 **ME-G006**
Примерочный
эстетический угловой
абатмент 15°, высота
уступа 1мм, широкая
платформа
- 6 **ME-G007**
Модель нижней
челюсти
- 1 **MK-0001**
Ортопедический
держатель абатментов
- 1 **MK-0040**
Набор для
ортопедического
планирования

Кол-во:

- 1 **MK-CPK42**
Ортопедический сет, высота
уступа 2мм, длина 4мм,
стандартная платформа
- 12 **MM-CP045**
Пластиковый цилиндр
для многокомпонентного
абатмента
- 12 **MM-PBU10**
Пластиковый бар,
овальное сечение
- 1 **MM-TRU10**
Титановая балка, овальное
сечение
- 10 **MT-BK235**
Ключ для
шаровидного
абатмента



Набор MGUIDE для установки имплантатов SEVEN

MG-K001

Набор инструментов MGUIDE для установки имплантатов SEVEN разработан для работы с хирургическими шаблонами. Предварительное планирование на основе КТ повышает точность и безопасность при проведении имплантологической процедуры. Все фрезы в наборе имеют ограничители глубины, что позволяет вести препарирование на заданную при планировании глубину. Эргономичное расположение фрез в наборе позволяет легко следовать предварительному плану при работе как в плотной, так и в мягкой кости.

»
Набор фрез MGUIDE для
установки имплантатов SEVEN






«
Набор инструментов MGUIDE для
установки имплантатов с шестигранным
соединением



Набор фрез MGUIDE для установки имплантатов SEVEN

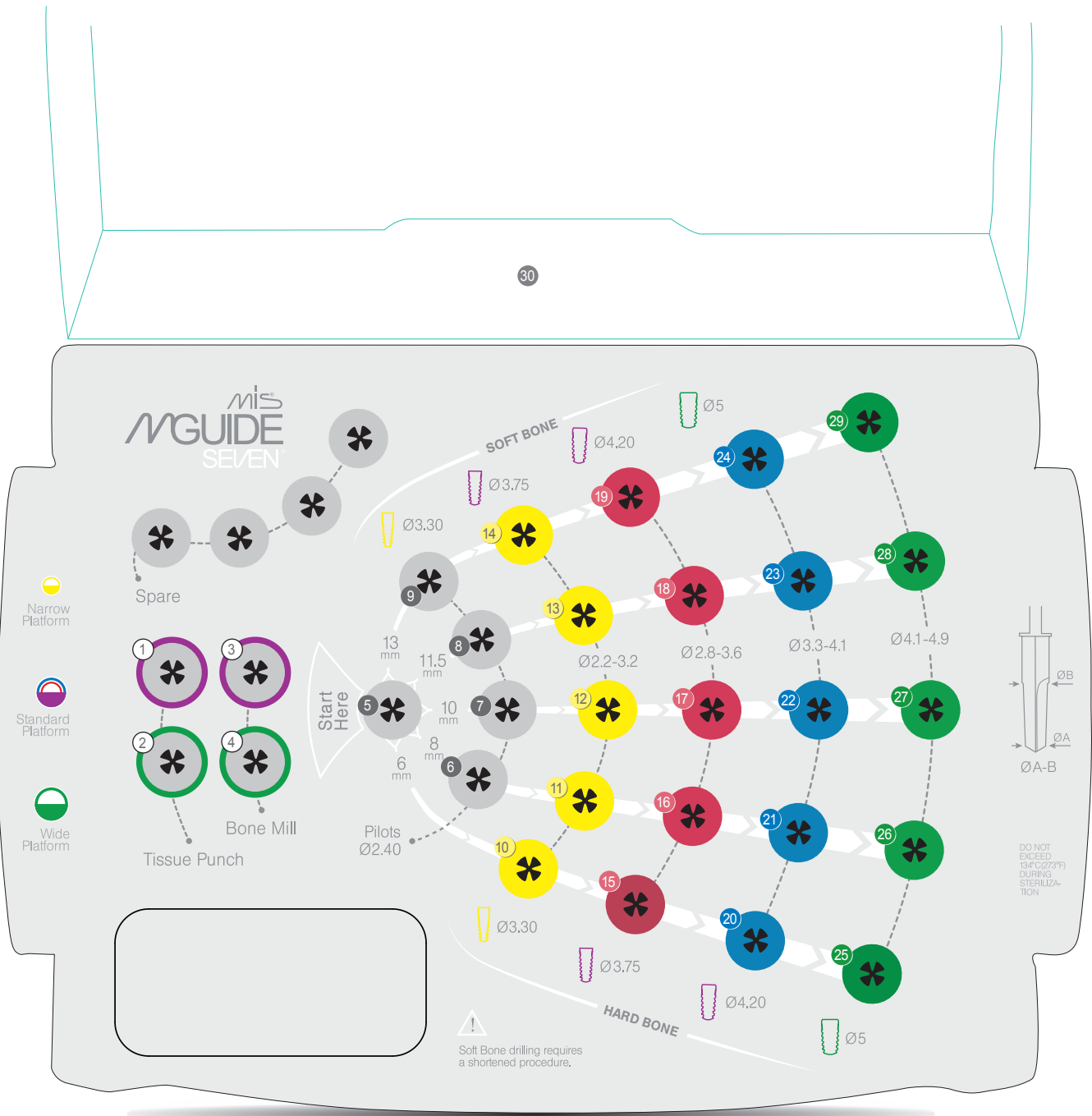


Содержимое набора

Набор фрез MGUIDE для установки имплантатов SEVEN



Набор инструментов MGIUDE

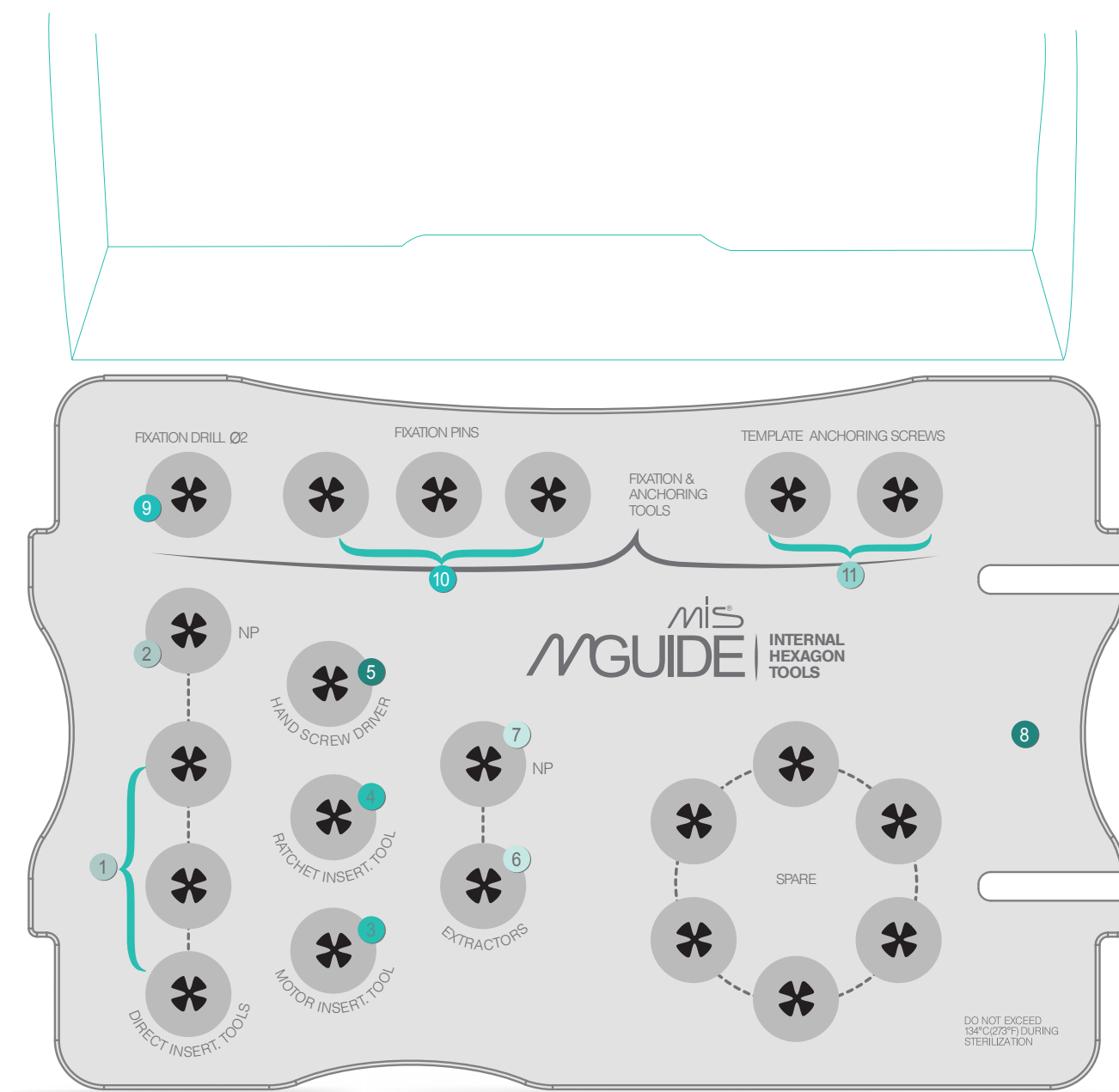

Содержимое набора

Набор инструментов MGUIDE



MG-GRI01
Адаптер MGuide с фиксатором
для реверсивного ключа



MG-GRN01
Адаптер MGuide с фиксатором
для реверсивного ключа,
узкая платформа



MG-GMI10
Адаптер MGuide для
микромотора



MG-GRI10
Адаптер MGuide для
реверсивного ключа



MT-HHR13
Длинная ручная
шестигранная отвертка для
шестигранника 1,27мм



MG-IE172
Экстрактор адаптера



MG-IE160
Экстрактор адаптера,
узкая платформа



MT-RI030
Реверсивный ключ



MT-TDN20
Фреза-пилот 2мм, внешнее охлаждение



MG-FP020
Фиксирующий пин MGUIDE,
диаметром 2мм.



MG-TAS55
Винт для фиксации
шаблонов, 5.5мм



Остеопластические материалы

Разнообразие является ключевой характеристикой продукции 4BONE® компании MIS. Название 4BONE® объединяет целую серию качественных остеопластических биоматериалов, представленных продуктами бычьего и синтетического происхождения, и предлагающих решения для широкого спектра методов регенерации костной ткани.



4BONE® | BCH

0.5cc - 2.5cc

4BONE® BCH - синтетический остеопластический материал

4BONE® представляет собой биоактивный остеопластический материал синтетического происхождения, состоящий из химически синтезированных гидроксиапатита (НА) и бета-трикальция фосфата (βTCP) (в соотношении 60%/40%).



«

BS-4BS01
BCH шприц объемом 0.5 cc,
размер гранулы: 0.5-1mm

BS-4BS1S
BCH туба объемом 1 cc,
размер гранулы: 0.5-1mm

BS-4BS25
BCH туба объемом 2.5 cc,
размер гранулы: 1-2mm

i С 2014 г продукт будет доступен в новой упаковке

BONDBONE®

0.5cc - 1cc

BONDBONE® Связующий остеопластический материал

BONDBONE® - новейший синтетический остеопластический материал, состоящий из двухфазного сульфата кальция. Благодаря инновационной технологии изготовления, материал BONDBONE® исключительно прост в использовании. Материал в первичной пластичной пастообразной консистенции быстро затвердевает, позволяя создать нужную форму и объем, необходимый для заполнения костного дефекта, и не зависит от присутствия крови или слюны.



4BONE® | RCB

4BONE® RCB - Резорбируемая адаптируемая барьерная мембрана

4BONE® RCB Адаптируемая барьерная мембрана изготавливается из высокоочищенных коллагеновых волокон типа I бычьего происхождения. 4BONE® RCB представляет собой полностью резорбируемую, адаптируемую барьерную мембрану, служащую для защиты костного материала и используемую при направленной регенерации костной ткани вокруг имплантатов, а так же при замещении костных дефектов и увеличении объема костного гребня.

»
4B-C1520
RCB - 15X20мм
4B-C2030
RCB - 20X30мм
4B-C3040
RCB - 30X40мм



4Bone® | RSB

4BONE® RSB - Резорбируемая коллагеновая барьерная мембрана

4BONE® RSB представляет собой биорезорбируемую мембрану, служащую для защиты костной ткани и изготавливаемую из высокоочищенных коллагеновых волокон бычьего происхождения. Продукт предназначен к использованию в качестве барьерной мембраны при направленной регенерации костной ткани вокруг дентальных имплантатов, замещении костных дефектов и увеличении объема костного гребня.


»
4B-S1520
RSB - 15X20mm
4B-S2030
RSB - 20X30mm
4B-S3040
RSB - 30X40mm



4BONE® | RCM

4BONE® RCM - резорбируемая коллагеновая мембрана

4BONE® RCB Адаптируемая барьерная мембрана изготавливается из высокоочищенных коллагеновых волокон типа I бычьего происхождения. 4BONE® RCB представляет собой полностью резорбируемую, адаптируемую барьерную мембрану, служащую для защиты костного материала и используемую при направленной регенерации костной ткани вокруг имплантатов, а так же при замещении костных дефектов и увеличении объема костного гребня.

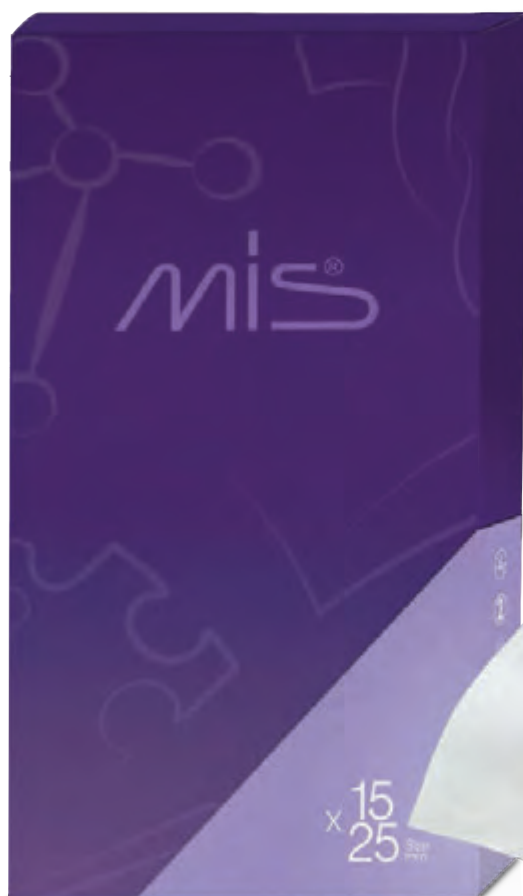

BR-C1525
RCM - 15X25mm

BR-C2030
RCM - 20X30mm

BR-C3040
RCM - 30X40mm



i Одобрение FDA является необходимым условием для представления материала на стоматологическом рынке.

Приложение.



Состав сплава

	Материал	Титановый сплав Ti 6Al 4V ELI	Сплав (Gold-a)	Сплав (Gold-s)	Сплав (Gold-e)
	Применение	C, K	L, G, K	L, G, K	L, K
Химический состав	Au %	-	60	61	70
	Pt %	-	19	12	8.50
	Ag %	-	-	16	13.40
	Pd %	-	20	-	-
	Cu %	-	-	9	7.50
	Zn %	-	-	Равные пропорции	0.05
	Ir %	-	Равные пропорции	-	0.10
	Ti	Равные пропорции	-	-	-
	C (max)	0.08	-	-	-
	Fe (max)	0.25	-	-	-
	O (max)	0.13	-	-	-
	N (max)	0.05	-	-	-
	H (max)	0.013	-	-	-
	Al	5.5-6.5	-	-	-
	V	3.5-4.5	-	-	-
	Температура плавления C°	1604-1660	1400-1490	900-930	895-1010
	Soft annealing HV5	-	145	160	170
	Hardened HV5	350-385	240	250	295
	Soft C° / min	-	100/30	750/5	750/5
	Hardened C° / min	-	700/30	350/15	450/15
Твердость					

Расшифровка: C–бондинг K– связывание пластмассой L– припайвание G– отливка


Ортопедические компоненты

Рекомендации к использованию ортопедических компонентов MIS

Сегмент ►	Передние зубы верхней челюсти		Передние зубы нижней челюсти	Клыки, премоляры и моляры					Премоляры и моляры
Угол наклона имплантата	15°или 25°	15°или 25°	Максимум до 2.5°	Максимум до 3.5°				15°или 25°	Максимум до 4°
Высота десны	Щечный уровень максимум до 2 мм Небный уровень максимум до 4 мм	Щечный уровень максимум до 4 мм Небный уровень максимум до 6 мм	Обрабатыва- ется в соответствии с контуром десны	Щечный уровень максимум до 2 мм Язычный/ небный уровень максимум до 6 мм	Обрабатывается в соответствии с контуром десны	Обрабатывается в соответствии с контуром десны	Максимум до 2 мм	Щечный уровень максимум до 2 мм Язычный/ небный уровень максимум до 4 мм	В зависимости от высоты десны высота уступа составляет 1, 2, 3, 4 мм
Кат. номер	MD-A1510 MD-A2510	MD-P1530 MD-P2530	MD-CTP10	MD-A0010 MD-P0030	MD-MAC10 MD-WMAC1	MD-MACF1	MD-GPC10 MD-GP010	MD-AN151 MD-AN251	MD-CPK41 MD-CPK42 MD-CPK43 MD-CPK44 MD-CPK61 MD-CPK62 MD-CPK63 MD-CPK64 MD-CPK81 MD-CPK82 MD-CPK83 MD-CPK84
Наименование абатмента ►	Эстетический угловой абатмент	Эстетический угловой абатмент	Конический стандартный абатмент	Эстетический абатмент	Стандартный абатмент	Абатмент фрикционного типа с эффектом переключения платформ	Пластиковый абатмент с основой из сплава для винтовой фиксации	Угловой абатмент	Анатомический трансгингивальный абатмент
									
									

Диаметр и цветовая кодировка платформы

Внешняя труба каждого имплантата имеет этикетку с цветовой кодировкой платформы и с указанием диаметра и длины имплантата.

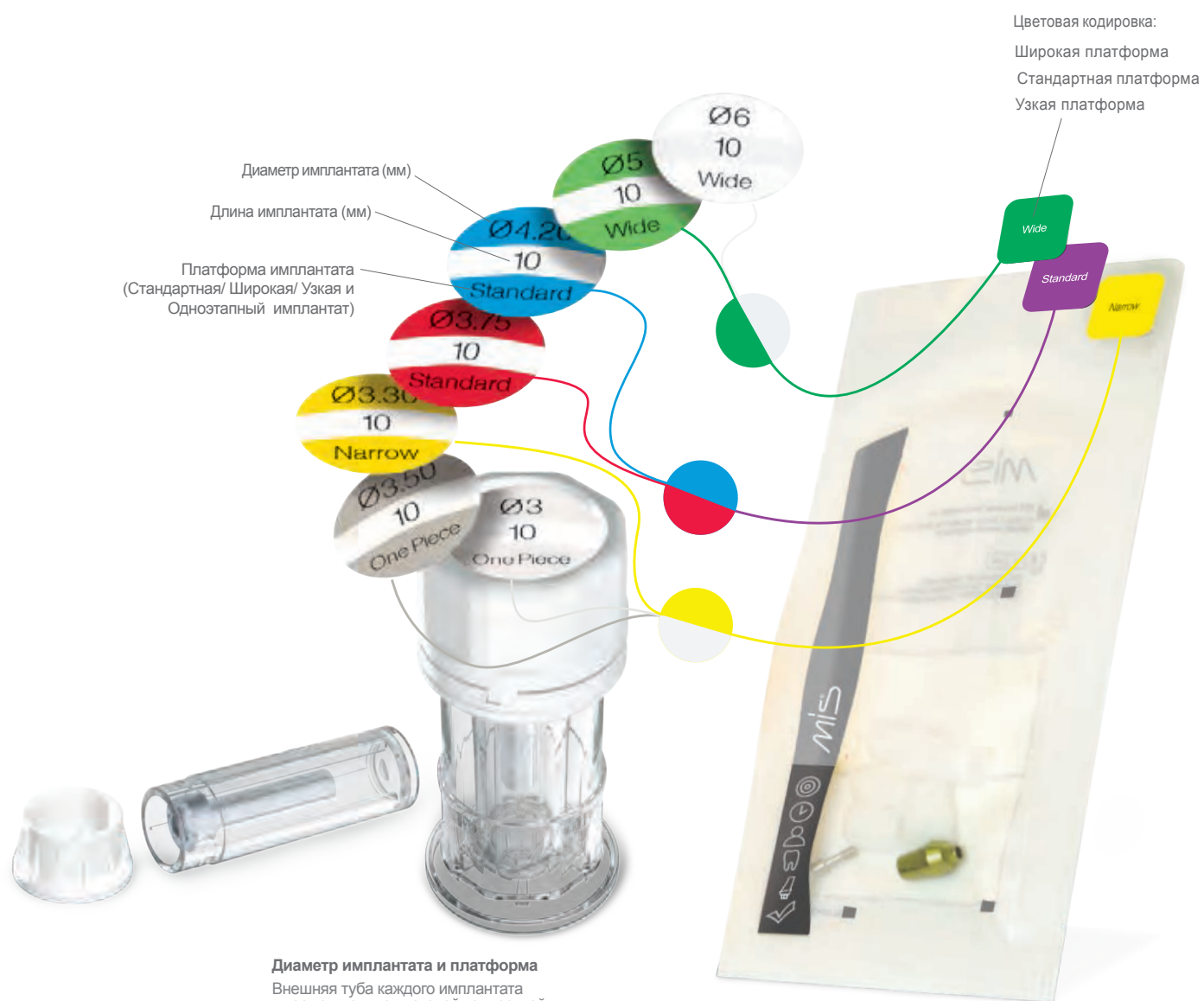

Описание этикетки



Расшифровка названий и символов



индекс.

Cat. No.	Page	Cat. No.	Page	Cat. No.	Page
4B-X1010	150	MB-NZL03	83	MD-CP050	88
4B-X1025	150	MB-NZL04	83	MD-CPH13	88/141
4B-X2505	150	MB-NZL05	83	MD-CPH50	88
4B-X2510	150	MB-NZL06	83	MD-CPK42	141
4B-X2525	150	MB-PPC10	82/104/125	MD-CPK61	86
4B-X2540	150	MB-PPR10	82/104/125	MD-CPK81-1	135
BS-4BS01	148	MB-PR010	82/104/125	MD-CPK82-2	135
ET-IT001	79/95/119	MB-RS375	82/103/124	MD-CPK83-3	135
GI-SCH11	77/92/93	MB-SF200	82/104/125	MD-CPK84-4	135
GI-WCH11	116/117	MB-SZL00	106	MD-CTP10	89
MA-ANH17	101/141	MB-SZL01	106	MD-CTP10-5	135
MA-ANH30	101/141	MB-SZL02	106	MD-G0213	85/109
MA-RSM10	100/122/122	MB-SZL03	106	MD-G0220	88/90/112/114
MA-S1375	101/141	MB-SZL04	106	MD-GP010	88
MA-S2375	101/141	MB-SZL05	106	MD-GP100	85/109
MA-S3375	101/141	MB-SZL06	106	MD-GPC10	88
MA-S4375	101/141	MB-TBS10	82/104/125	MD-GT190	135
MA-W1500	122	MB-TBS20	82/104/125	MD-I0375	85
MA-W2500	122	MB-TTP10	82/104/125	MD-IC040	86
MA-W3500	122	MB-WZL00	126	MD-IC800	86
MA-W4500	122	MB-WZL01	126	MD-ICH40	86
MB-AN152	103/141	MB-WZL02	126	MD-IT100	85
MB-AN252	103	MB-WZL03	126	MD-IT300	85
MB-DB235	82/104/125	MB-WZL04	126	MD-MAC10	89/141
MB-DMH10	82//125	MB-WZL05	126	MD-MAC10-6	135
MB-GPS10	82/125	MB-WZL06	126	MD-MACF1	89
MB-N1375	103	MD-A0010	89/141	MD-P0030	89
MB-N2330	82	MD-A0010-8	135	MD-P0030-7	135
MB-N2375	103/141	MD-A1510	90/141	MD-P1530	90
MB-N3330	82	MD-A1510-11	135	MD-P1530-13	135
MB-N3375	103	MD-A2510	90	MD-P2530	90
MB-N4330	82	MD-A2510-12	135	MD-P2530-14	135
MB-N4375	103	MD-AN151	90	MD-PF375	85
MB-N5375	103	MD-AN151-9	135	MD-PM040	98
MB-NZL00	83	MD-AN251	90	MD-RSM10	70/85/92/93
MB-NZL01	83	MD-AN251-10	135	MD-RSM60	86
MB-NZL02	83	MD-CP013	88/141	MD-S0200	88/90/112/114/

Cat. No.

Page

Cat. No.

Page

Cat. No.

Page

MD-S0220 50/70/88/90/92

MF7-06420 10/12

MG-D0824 145

MD-S0222 88/90/112/114

MF7-06500 13/14

MG-D0833 145

MD-S0224 88/90/112/114

MF7-06600 13/15

MG-D0837 145

MD-SP001 92/93

MF7-08375 10/11

MG-D0842 145

MD-TB001 92

MF7-08420 10/12

MG-D0850 145

MD-TB002 93

MF7-08500 13/14

MG-D1024 145

MD-TCH13 88

MF7-08600 13/15

MG-D1033 145

MD-TPA10 89

MF7-10330 8/9

MG-D1037 145

MD-TPA12 88

MF7-10375 10/11

MG-D1042 145

MD-TPH50 88

MF7-10420 10/12

MG-D1050 145

MD-WMAC1 89

MF7-10500 13/14

MG-D1124 145

MF4-06420 18/20

MF7-10600 13/15

MG-D1133 145

MF4-06500 21/22

MF7-11330 8/9

MG-D1142 145

MF4-06600 21/23

MF7-11375 10/11

MG-D1150 145

MF4-08375 18/19

MF7-11420 10/12

MG-D1324 145

MF4-08420 18/20

MF7-11500 13/14

MG-D1333 145

MF4-08500 21/22

MF7-11600 13/15

MG-D1342 145

MF4-08600 21/23

MF7-13330 8/9

MG-D1350 145

MF4-10330 16/17

MF7-13375 10/11

MG-DLG55 145

MF4-10375 18/19

MF7-13420 10/12

MG-FP020 147

MF4-10420 18/20

MF7-13500 13/14

MG-GMI10 147

MF4-10500 21/22

MF7-13600 13/15

MG-GRI01 147

MF4-10600 21/23

MF7-16330 8/9

MG-GRI10 147

MF4-11330 16/17

MF7-16375 10/11

MG-GRN01 147

MF4-11375 18/19

MF7-16420 10/12

MG-IE160 147

MF4-11420 18/20

MF7-16500 13/14

MG-IE172 147

MF4-11500 21/22

MG2-06160 29

MG-K001 142

MF4-11600 21/23

MG2-08160 29

MG-TP047 145

MF4-13330 16/17

MG2-10160 29

MG-TP055 145

MF4-13375 18/19

MG2-12160 29

MH-00450 101/123

MF4-13420 18/20

MG-BM047 145

MK-0001 139/141

MF4-13500 21/22

MG-BM055 145

MK-0011 60

MF4-13600 21/23

MG-D0624 145

MK-0012 50

MF4-16330 16/17

MG-D0633 145

MK-0014 56

MF4-16375 18/19

MG-D0637 145

MK-0016 54

MF4-16420 18/20

MG-D0642 145

MK-0020 62/63

MF4-16500 21/22

MG-D0650 145

MK-0022 138

индекс.

Cat. No.	Page	Cat. No.	Page	Cat. No.	Page
MK-0023	68	MK-NPK64	73	MM-CHC60	86
MK-0024	69	MK-PIC01	140	MM-CP045	101/123
MK-0036	64/65	MK-SDS06	59	MM-G0330	101/123
MK-0039	66/67	MK-SDS08	59	MM-GB100	128
MK-0040	129/134/135/141	MK-SDS10	59	MM-GBU10	128
MK-BH26	57	MK-SDS11	59	MM-GRU10	128
MK-BS001	58	MK-SDS13	59	MM-IO450	100/122
MK-CPK41	87	MK-SIC6	96/97	MM-IT450	100/122
MK-CPK42	87/141	MK-SIZ6	96/97	MM-LBP10	84/107/127
MK-CPK43	87	MK-SOE1	94	MM-LCT10	83/106
MK-CPK44	87	MK-SOE2	94	MM-LEL10	84/107/127
MK-CPK61	86/87	MK-SOE3	94	MM-LELE1	84/107/127
MK-CPK62	87	MK-SOE4	94	MM-LER10	84/107/127
MK-CPK63	87	MK-SOE5	94	MM-LFA40	83/84/106/107
MK-CPK64	87	MK-SPC4	98/99	MM-LFA50	126
MK-CPK81	87	MK-SPZ4	98/99	MM-LIC10	83/106/126
MK-CPK82	87	MK-TBN4	76	MM-LLR10	84/107/127
MK-CPK83	87	MK-TBS4	70/92	MM-LMP02	83/106/126
MK-CPK84	87	MK-TBW4	70/116	MM-LPP10	84/107/127
MK-DB01	133	MK-WOE1	118	MM-LRM10	84/107/127
MK-EI48	52/129	MK-WOE3	118	MM-LSD15	84/107/127
MK-MUS4	93	MK-WOE5	118	MM-LSD21	84/107/127
MK-MUW4	117	MK-WPC4	120/121	MM-MG450	101/123
MK-NIC6	80/81	MK-WPK41	111	MM-PBU10	128
MK-NIZ6	80/81	MK-WPK42	111	MM-PC100	128
MK-NOE1	78	MK-WPK43	111	MM-S0330	101/123
MK-NOE2	78	MK-WPK44	111	MM-SPZ40	70
MK-NOE3	78	MK-WPK61	110/111	MM-T0450	101/122
MK-NOE4	78	MK-WPK62	111	MM-TC100	128
MK-NOE5	78	MK-WPK63	111	MM-TRU10	128
MK-NPK41	73	MK-WPK64	111	MN-AN020	75
MK-NPK42	73	MK-WPK81	111	MN-CHC60	72
MK-NPK43	73	MK-WPK82	111	MN-CP013	74
MK-NPK44	73	MK-WPK83	111	MN-CPH13	74
MK-NPK61	72/73	MK-WPK84	111	MN-CPK61	72
MK-NPK62	73	MK-WPZ4	120/121	MN-G0160	71
MK-NPK63	73	MM-BGC45	101/123	MN-GP010	74

Cat. No.

Page

Cat. No.

Page

Cat. No.

Page

MN-GP100

71

MO-CS325

50

MT-CS450

132

MN-GPC10

74

MO-CS400

50

MT-CSN33

42/50/55/56

MN-I0330

71

MO-SLA20

50

MT-DE001

45/53/55

MN-IC040

72

MO-SLA30

50

MT-DI001

46/53/67

MN-IC600

72

MO-SLA32

50

MT-F2121

133

MN-ICH40

72

MO-SLA40

50

MT-GDM01

129/132

MN-IT100

71

MO-SLS20

50

MT-GDN33

42/50/53/55/56

MN-IT300

71

MO-SLS30

50

MT-GDN50

32/42/50/53/55/56

MN-MAC10

75

MO-SLS32

50

MT-HDL30

46/67/131

MN-PF330

71

MO-SLS40

50

MT-HDS30

46/67/131

MN-RSM10

70/71/76/77

MO-SO300

63

MT-HHR07

67/131

MN-RSM60

72

MO-SO350

63

MT-HHR13

67/131/147

MN-S0160

70/74/75/77/80

MO-SO400

63

MT-HKL21

25/44/65

MN-SP001

70/76/77

MT-00400

43

MT-HKO21

25/44/65

MN-TB001

76

MT-00500

43

MT-HKS15

25/44

MN-TB002

77

MT-00600

43

MT-HLI10

45/53/55/63

MN-TPA10

75

MT-A4022

133

MT-HMR05

46

MN-TPA12

74

MT-AL005

130

MT-HMR10

46/53

MO1-10300

25/26

MT-B4018

133

MT-HSI10

45/45/53/55/63

MO1-10350

25/27

MT-BC280

57

MT-HTS10

132

MO1-11300

25/26

MT-BC320

57

MT-HW001

45

MO1-11350

25/27

MT-BC380

57

MT-IE160

131

MO1-13300

25/26

MT-BC450

57

MT-IE172

67/131

MO1-13350

25/27

MT-BK235

141

MT-IT100

67/130/130

MO1-16300

25/26

MT-BTI10

48

MT-K2023

133

MO1-16350

25/27

MT-BTT20

65

MT-LCD20

29

MO1-RSA10

28

MT-BTT24

53/65

MT-LM005

46/55/95/119/130

MO-CBS20

50

MT-BTT28

53

MT-LMK13

67/129

MO-CBS30

50

MT-BTT30

65

MT-MAL10

48

MO-CBS32

50

MT-BTT32

53

MT-MRH10

45

MO-CBS40

50

MT-BTT40

53

MT-MRH20

45

MO-CO160

50/63

MT-BTT45

53

MT-MRH25

55

MO-CO200

63

MT-BTT50

53

MT-MSD20

29/48/67/132

MO-CO240

63

MT-C3125

133

MT-MUK02

67/100/123/123

MO-CO280

63

MT-CRD20

43

MT-NB225

67/82/103/124/130

MO-CS200

50

MT-CRD21

43

MT-NRH20

8/16/45/53

MO-CS300

50

MT-CRD28

43

MT-P2406

34/53

индекс.

Cat. No.	Page	Cat. No.	Page	Cat. No.	Page
MT-P2408	34/53	MT-TDN55	37/50/55/56	MW-I0470	109
MT-P2410	34/53	MT-TDO01	29	MW-IC040	110
MT-P2411	34/53	MT-TDT28	35/53	MW-IC800	110
MT-P2413	34/53	MT-TDT30	65	MW-ICH40	110
MT-P2416	34/53/55/65	MT-TDT32	35/53	MW-IT100	109
MT-PP001	45/65	MT-TDT40	35/53	MW-IT300	108/109
MT-PP240	53/55	MT-TDT45	35/53	MW-MAC10	113
MT-RI030	48/53/63/65/147	MT-TDT50	35/53	MW-MAC10-20	135
MT-RI040	48/67	MT-TP420	48	MW-P0010	114
MT-RI050	49	MT-TP500	46	MW-P1510	114
MT-SCD20	29	MT-TSD10	82/104/125/130	MW-P1510-22	135
MT-SHA10	32/45/55/79/119	MT-UML21	44/65	MW-PF550	109
MT-SM005	46/53/119/130	MT-UMS21	44	MW-PM040	70/120
MT-SMD10	42/53/55/63/65	MT-UN002	132	MW-RSM10	70/109/116/117
MT-SMK13	67/129	MT-US002	67/132/132	MW-RSM60	110
MT-SRA10	45/53/63/79/95	MT-UW002	67/132/132	MW-SP001	70/116/117
MT-TD110	42	MW-AN151	114	MW-TB001	116
MT-TD280	40	MW-AN151-21	135/141	MW-TB002	117
MT-TD320	40	MW-B1500	124	MW-TPA10	113
MT-TD380	40	MW-B3500	124	MW-TPA12	112
MT-TD450	41	MW-B5500	124	MW-TPH50	112
MT-TD500	41	MW-CHC60	110	MW-WMAC1	113
MT-TD550	41	MW-CP013	112	OE-IC001	79/95/119
MT-TDI28	38	MW-CP060	112	OE-IC002	79/95/119
MT-TDI32	38	MW-CPH13	112	OE-RSM60	79/95/119
MT-TDI38	38	MW-CPH60	112		
MT-TDI40	39	MW-CPK61	110		
MT-TDI45	39	MW-CPK81-15	135		
MT-TDI50	39	MW-CPK82-16	135		
MT-TDI55	39	MW-CPK83-17	135		
MT-TDN19	42/53/55	MW-CPK84-18	135		
MT-TDN20	34/65/147	MW-CTP10	113		
MT-TDN28	36/50/55/56	MW-CTP10-19	135		
MT-TDN32	36/50/55/56	MW-GP010	112		
MT-TDN38	36/50/55/56	MW-GPC10	112		
MT-TDN45	37/50/55/56	MWH-M0131 (230V), MWH-			
MT-TDN50	37/50/55/56	M0132(115V)	136		

Компания MIS Implants Technologies Ltd. является динамичной, быстро развивающейся, научно-производственной и торговой компанией, специализирующейся на разработке и изготовлении совершенных решений для дентальной имплантологии. Миссия компании MIS заключается в упрощении процедуры имплантации посредством предложения креативных решений как для врача-имплантолога, так и для пациента.



© MIS Corporation. All Rights Reserved.